

Saver EVO®

Kullanıcı Kılavuzu

İçindekiler

Saver EVO kullanıcı talimatları	3
Web sitesinden indirme	3
Hızlı talimatlar	3
Saver EVO'yu kullanma	4
Saver EVO'yu HeartSine samaritan PAD'le kullanma	5
HeartSine samaritan PAD'den olay veri bilgilerini alma	6
Olayları bir HeartSine samaritan PAD'de görüntüleme	7
Bir HeartSine samaritan PAD'de belleği silme	8
HeartSine samaritan PAD ayarlarını değiştirme	8
Saver EVO'yu PDU*'yla kullanma	11
PDU bellek kartından olay verilerini alma	12
Bir PDU'da saklanan olayları görüntüleme	13
PDU ayarlarını görüntüleme	14
Saver EVO'yu kayıtlı olaylarla kullanma	15
Dışa ve içe aktarma	15
Olayları dışa aktarma	15
Olayları içe aktarma	16
Kayıtlı olayları silme	16
Saver EVO ayarlarını değiştirme	17
Parolayı değiştirme	17
Saver EVO dilini değiştirme	18
Otomatik güncellemeleri denetleme	19
Siber Güvenlik	19

Bu doküman içerisindeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir ve HeartSine Technologies adına bir taahhüt teşkil etmez. Bu kılavuzun hiçbir bölümü, HeartSine Technologies'in önceden açık yazılı izni olmaksızın, hiçbir amaç için fotokopi ve kayıt da dahil olmak üzere, elektrikli veya mekanik olarak hiçbir şekilde veya araç kullanarak çoğaltılamaz veya aktarılamaz.

Saver EVO kullanıcı talimatları

Saver EVO® yazılımı, defibrilasyon olayı verilerini HeartSine® samaritan® PAD'inizden ve PDU Bellek Kartından almanızı sağlar. Saver EVO, ayrıca olay verilerini başka Saver ve Saver EVO kullanıcıları için yazdırma, içe ve dışa aktarma işlevleriyle bilgisayara kaydedilmiş olay verilerinin yönetilmesine de izin vermektedir.

Saver EVO, yazılımın Microsoft Windows (tercihen Windows 10) işletim sistemiyle çalışan tek bir bilgisayarda kurulmasına ve kullanılmasına izin veren bir yazılım lisansı ile birlikte sağlanmaktadır.

Web sitesinden indirme

Saver EVO'nun yüklenmesi, yönetici izni gerektirebilir – gerekirse, sistem yöneticinizi/BT servis sağlayıcınızı arayın.

1. HeartSine.com adresine giderek bölgenize yönelik Saver EVO yazılımını indirin.
2. İndirdikten sonra, " SaverEVO_setup.exe" dosyasını çalıştırarak Saver EVO'yu yükleyin. (Ekrandaki talimatları izleyin.)
3. Kullanıcı lisans anlaşmasını okuyun. Bu yazılımı yükleyebilmeniz için bu anlaşmanın şartlarını kabul etmeniz gerekir. Şartları kabul etmek için "Next" (İleri) düğmesine tıklayın.
4. Saver EVO, kendi varsayılan konumuna kendi standart yapılandırmasıyla yüklenecektir. Kabul etmek için "I agree" (Kabul Ediyorum) düğmesine tıklayın. Deneyimli bir bilgisayar kullanıcı değilseniz bu varsayılan ayarları değiştirmemelisiniz.
5. Cihaz sürücü sertifikası istenirse, "Continue anyway" (Yine de devam et) düğmesine tıklayın.

Hızlı talimatlar

Kaydedilmiş defibrilasyon olayı verilerini HeartSine samaritan PAD veya PDU Bellek Kartından almak için.

1. İlgili cihazı bilgisayara bağlayın.
2. Saver EVO yazılımını açın.

3.  veya  düğmesine tıklayın.

4.  düğmesine tıklayarak kaydedilmiş olayların bir listesini görüntüleyin.

5. Gerekli kaydedilmiş olayı listede vurgulayın.


6.  düğmesine tıklayarak olayı görüntüleyin.

7.  düğmesine tıklayın ve olayı bilgisayara kaydetmek için gerekli hasta bilgilerini girin.

8. Gerekirse,  düğmesine tıklayarak olay kaydını yazdırın.

Saver EVO'yu kullanma

Saver EVO Start ekranı aşağıda gösterilmektedir.

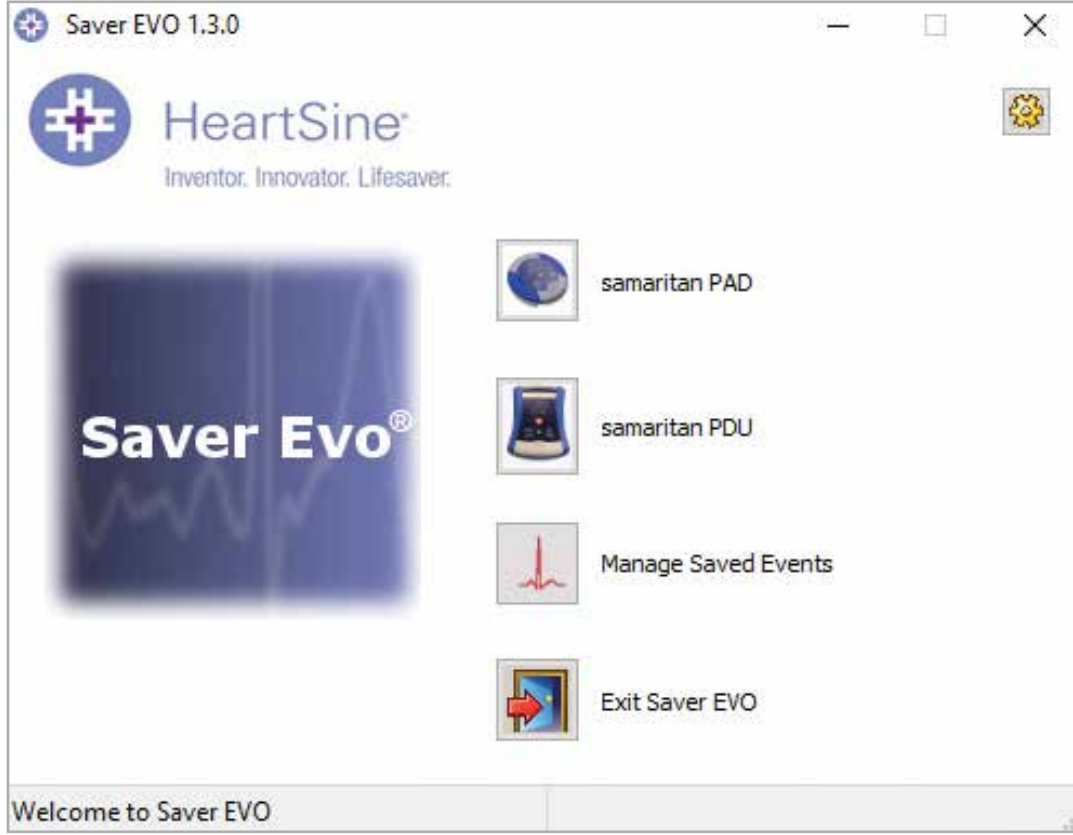

Saver EVO başlangıç ekranı



samaritan PAD – HeartSine samaritan PAD'e özgü fonksiyonların bulunduğu menüyü açar. Ayrıntılar için sayfa 5'e bakın.



samaritan PDU – PDU'ya özgü fonksiyonların bulunduğu menüyü açar. Ayrıntılar için sayfa 12'ye bakın.



Manage Saved Events (Kaydedilmiş Olayları Yönet) – Bilgisayara kaydedilmiş olaylara özgü fonksiyonların bulunduğu menüyü açar. Ayrıntılar için sayfa 16'ya bakın.



Exit Saver EVO (Saver EVO'dan Çıkış) – Saver EVO yazılımından çıkar.



Change Saver EVO password (Saver EVO Parolasını Değiştir) – Saver EVO parolasını değiştirir ve dil seçeneğini seçer. Ayrıca kullanıcının Saver EVO revizyon bilgilerini görüntülemesini sağlar.

Yukarıdaki özel menülerin kullanımı, sonraki kısımlarda daha ayrıntılı ele alınacaktır.

Saver EVO'yu HeartSine samaritan PAD'le kullanma

Saver EVO'yu HeartSine samaritan PAD'le kullanmak için, USB veri kablosunu (HeartSine samaritan PAD'inizle birlikte sağlanmaktadır) kullanmanız gerekmektedir. Bu kablo sizde yoksa, lütfen Stryker satış temsilcinizi veya Yetkili Dağıtıcınızı arayın. Bir HeartSine Gateway, AED'inize bağlıysa, bir mikro USB kablosu kullanabilirsiniz.

1. USB veri kablosunu kullanarak, bunu HeartSine samaritan PAD'e ve bilgisayarınızdaki USB portuna bağlayın. Saver EVO yazılımını açın.
2. samaritan PAD düğmesine basılması aşağıda gösterilen pencereyi açar.



Saver EVO PAD erişim ekranı



PAD Data (PAD Verileri) – HeartSine samaritan PAD'den olay verilerini almak için bu düğmeye tıklayın. Ayrıntılar için sayfa 6'ya bakın.




Change PAD Settings (PAD Ayarlarını Değiştir) – HeartSine samaritan PAD'de tanısal testler yürütmek veya yapılandırmayı değiştirmek için (hacim ve zaman) bu düğmeye tıklayın. Ayrıntılar için sayfa 8'e bakın.



Back (Geri) – Saver EVO başlangıç ekranına dönmek için bu düğmeye tıklayın.

HeartSine samaritan PAD'den olay veri bilgilerini alma

HeartSine samaritan PAD'den defibrilasyon olay verilerini almak için, HeartSine samaritan PAD'inizin bilgisayara bağlandığında emin olun ve ardından PAD Data (PAD Verileri) düğmesine tıklayın. Böylece HeartSine samaritan PAD belleği aranacak ve tüm kayıtlı olaylar listelenecek ve aşağıda gösterildiği gibi görüntülenecektir.

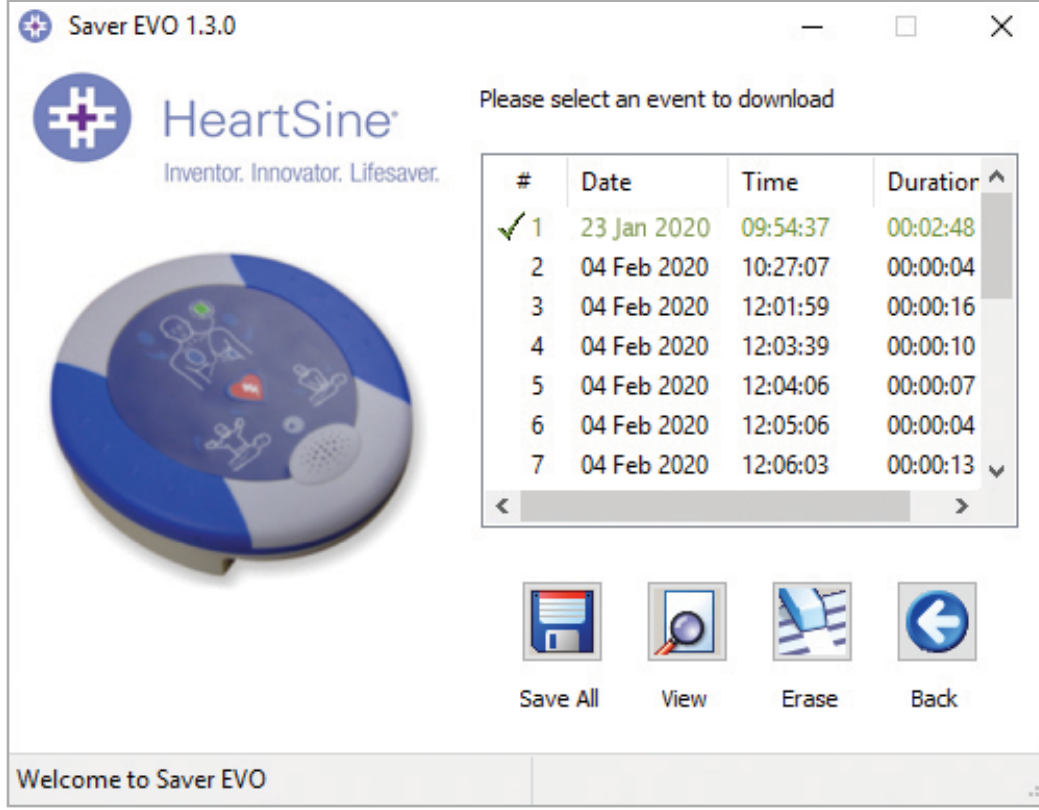

Saver EVO PAD olay günlüğü listesi ekranı

Bir ✓ sembolüyle birlikte yeşil metinle gösterilen olaylar, bilgisayara zaten kaydedilmiş olan olaylardır.



Save All (Tümünü Kaydet) – Save All (Tümünü Kaydet) düğmesine basılması, PAD olay günlüğünde listelenen tüm olayların bilgisayarda tek bir dosya olarak kaydedilmesine neden olur.

NOT: Bu yöntemle kaydedilen olaylar, Saver EVO'nun bu sürümünde görüntüleme amacıyla alınamaz. Olayları bu dosyadan almak için, HeartSine Technologies müşteri destek hizmetlerini arayın. Olayları daha sonra geri almak amacıyla tek tek kaydetmek için, sayfa 7'deki **Olayları bir HeartSine samaritan PAD'de görüntüleme** kısmında, "Save" (Kaydet) fonksiyonuna bakın.



View (Görüntüle) – Bu düğmeye tıklanması, seçilen olayın görüntülenmesine neden olur.



Erase (Sil) – Bu düğmeye tıklanması tüm olayları HeartSine samaritan PAD olay günlüğünden siler. Verileri silme hakkında daha ayrıntılı bilgi için sayfa 8'e bakın.



Back (Geri) – Saver EVO PAD erişim ekranına dönmek için bu düğmeye tıklayın.

Olayları bir HeartSine samaritan PAD'de görüntüleme

1. Bir olayı görüntülemek için, olayı listede vurgulayın ve View (Görüntüle) düğmesine tıklayın. Böylece defibrilasyon olayı EKG çıktısıyla birlikte görüntülenir ve olay günlüğü tek bir görüntüleme penceresinde görüntülenir.



Saver EVO PAD olay görüntüleme penceresi

2. Şimdi, Save (Kaydet) düğmesine tıklayarak görüntülenen bu olayı bilgisayara kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bu şekilde kaydedilen olaylar, alınabilir ve Saver EVO'da görüntülenebilir. Bu, bilgisayara kaydedilmiş olayların listesinden hastayı bulabilmek için bilgi girilmesine yönelik seçenekler sağlar. Hastaya ilişkin ayrıntılar, harf ve sayı karakterlerinden oluşabilir ve her bir alan, doldurulabilir veya istenirse boş bırakılabilir.

Enter Patient Details

Subject0002

Record Type: Subject

Surname:

Forename:

D.O.B.:

Patient ID:

Event Date and Time: 04 Feb 2020 10:27:07 GMT Standard Time

New Record Type

Save

Cancel

Saver EVO PAD Hasta ayrıntıları penceresi

NOT: Defibrilasyon olay verileri bilgisayarınıza bir kez kaydedildiğine, bu bilgiler değiştirilemez.

Saver EVO olay görüntüleme penceresi aşağıdaki düğmeleri sağlar:



Print (Yazdır) – Görüntüleme penceresinde o sırada görüntülenen olayı yazdırmak için bu düğmeye tıklayın.



Print Preview (Baskı Önizleme) – Yazdırılacak verileri ekranda önizlemek için bu düğmeye tıklayın.



Back (Geri) – Saver EVO PAD olay günlüğü listesi ekranına dönmek için bu düğmeye tıklayın.

Bir HeartSine samaritan PAD'de belleği silme

1. Bir HeartSine samaritan PAD belleğini silmek için Erase (Sil) düğmesine tıklayın.
2. Bir önlem olarak, Saver EVO, belleği silmeden önce bir Password (Parola) girmenizi isteyecektir. Doğru parola girildiğinde HeartSine samaritan PAD belleği silinecektir. Varsayılan parolanın nasıl değiştirileceğine ilişkin bilgi için, lütfen sayfa 17'deki **Saver EVO'da Parolayı Değiştirme** kısmına bakın.

HeartSine samaritan PAD'den veriler alındığında ve bilgisayara kaydedildiğinde, olayların HeartSine samaritan PAD belleğinden silinmesi önerilir. Böylece belleğin tamamının, başka bir defibrilasyon olayından verileri kaydetmek için hazır olması sağlanır.

İKAZ: HeartSine, silmeden önce HeartSine samaritan PAD belleğinin tamamını indirmenizi önerir. Bu bilgiler, gelecekte başvurmak üzere güvenli bir yerde saklanmalıdır.

HeartSine samaritan PAD ayarlarını değiştirme

Change PAD Settings (PAD Ayarlarını Değiştir) düğmesi, kullanıcıların HeartSine samaritan PAD'in bazı özelliklerini aşağıdaki gibi yapılandırmalarını sağlar:

- Zamanı denetleme/ayarlama
- Tanısal testleri çalıştırma

Ayrıca ilgili yetkiye sahip kullanıcılar aşağıdakileri değiştirebilirler:

- Hacim
- Metronom sesini etkinleştirme/devre dışı bırakma

1. Change PAD Settings (PAD Ayarlarını Değiştir) düğmesine tıklanması, aşağıdaki ekrana erişim sağlar (sonraki sayfaya bakın):



Saver EVO, PAD ayarlarını değiştir penceresi

2.  **Check/Set PAD time** (PAD Zamanını Denetle/Ayarla) – Bu düğme, kullanıcıların HeartSine samaritan PAD'deki zamanı kendi bilgisayarlarındaki zamanla senkronize etmelerini sağlar.



Saver EVO, PAD zamanını denetle/ayarla penceresi

3. Synchronize (Senkronize Et) düğmesine tıklayarak, HeartSine samaritan PAD'deki zamanı, bağlı olduğu bilgisayardaki zamana ayarlayın.
4. Close (Kapat) düğmesine tıklayarak Saver EVO, Change PAD Settings (PAD Ayarlarını Değiştir) penceresine dönün.



Run Diagnostic Tests (Tanısal Testleri Çalıştır) – Bu düğme, kullanıcının HeartSine samaritan PAD'inin fonksiyon gösterdiğini denetlemek için bazı temel testleri çalıştırmasını sağlar. Mevcut tanısal testlerin listesine, aşağıdaki gösterildiği gibi bir açılır menüden erişilir.




Saver EVO PAD tanısal testler penceresi

Saver EVO, takılı PAD cihazı türünü belirleyecek ve testler sırasında kullanıcıya rehberlik etmek için uygun etiket resimlerini görüntüleyecektir.



Edit PAD Configuration (PAD Yapılandırmasını Düzenle) – Bu düğmeye tıklayarak, hacim ve metronom ayarlarını görüntüleyebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz ve bağlı HeartSine samaritan PAD cihazı için yazılım sürümünü görüntüleyebileceğiniz Edit PAD configuration (PAD Yapılandırmasını Düzenle) penceresini (aşağıda gösterilmektedir) açın. Bu değişiklikleri onaylamak için Saver EVO parolasını girmeniz istenecektir. Varsayılan parolanın nasıl değiştirileceğine ilişkin bilgi için, lütfen sayfa 17'deki **Saver EVO'da Parolayı Değiştirme** kısmına bakın.

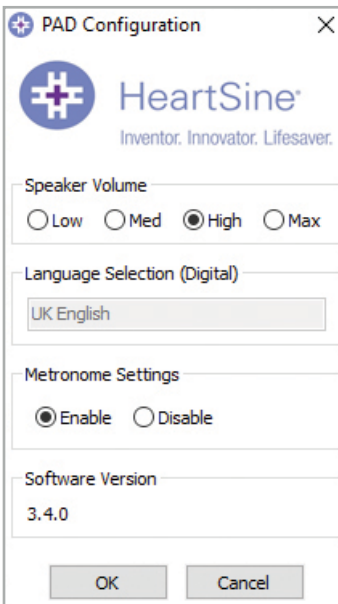

Saver EVO, PAD yapılandırmasını düzenle penceresi

Saver EVO'yu PDU*'yla kullanma

1. Saver EVO'yu samaritan PDU bellek kartıyla kullanmak için, kartı Saver EVO'yu çalıştıran bilgisayarda yerleşik olan veya bu bilgisayara bağlanan bir MMC/SD uyumlu kart okuyucuya takmanız gerekmektedir. Bilgisayarınızın işletim sisteminin kart okuyucuda bir kart bulunduğunu algılamasının birkaç saniye veya hatta bir dakikadan fazla sürebileceğini lütfen unutmayın.
2. Başlangıç ekranından, samaritan PDU düğmesine tıklayın. Böylece aşağıdaki pencere açılacaktır.



Saver EVO PDU erişim ekranı



PDU Data (PDU Verileri) – bir PDU bellek kartından olay verilerini almak için bu düğmeye tıklayın. Ayrıntılar için sayfa 13'e bakın.



PDU Settings (PDU Ayarları) – Yapılandırma ayarlarını görüntülemek için bu düğmeye tıklayın. Ayrıntılar için sayfa 15'e bakın.



Back (Geri) – Saver EVO başlangıç ekranına dönmek için bu düğmeye tıklayın.

* samaritan PDU, ABD'de mevcut değildi ve artık HeartSine tarafından sunulan bir ürün değildir.

PDU bellek kartından olay verilerini alma

samaritan PDU bellek kartının, SD/MMC kart okuyucuya takıldığından emin olun ve PDU Data (PDU Verileri) düğmesine tıklayın. Böylece, Bellek Kartına kaydedilmiş olaylar listelenecektir.



Saver EVO PDU olay günlüğü listesi ekranı

Saat sembolü  bulunan olaylar, başarıyla geçmiş olan PDU kendi kendine testlerdir.

Bir  sembolüyle birlikte yeşil metinle gösterilen olaylar, bilgisayara zaten kaydedilmiş olan olaylardır.



Save All (Tümünü Kaydet) – Bu düğme, PDU modunda devre dışıdır.



View (Görüntüle) – Bu düğmeye tıklanması, seçilen olayın görüntülenmesine neden olur. Ayrıntılar için sayfa 13'e bakın.




Erase (Sil) – Bu düğme, PDU modunda devre dışıdır.



Back (Geri) – Saver EVO PDU erişim ekranına dönmek için bu düğmeye tıklayın.

Bir PDU'da saklanan olayları görüntüleme

1. Bir olayı görüntülemek için, olayı listede vurgulayın ve View (Görüntüle) düğmesine tıklayın. Böylece defibrilasyon olayı EKG çıktısıyla birlikte görüntülenir ve olay günlüğü tek bir görüntüleme penceresinde görüntülenir:

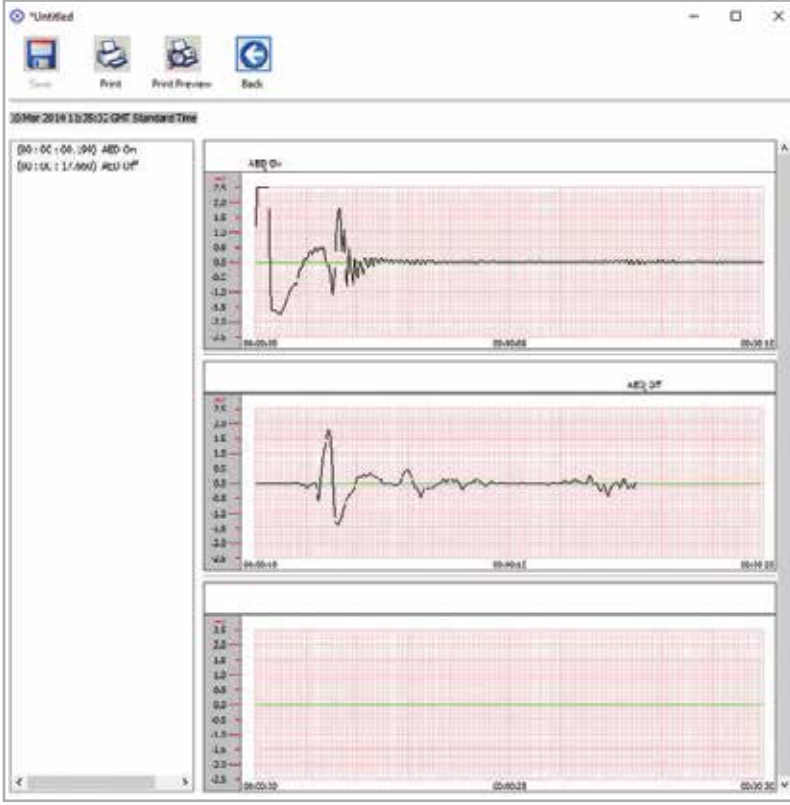

Saver EVO PDU olay görüntüleme penceresi

2. Şimdi kullanıcı, Save (Kaydet) düğmesine tıklayarak görüntülenen bu olayı bilgisayara kaydetmeyi seçebilir. Bu, hastayı bulabilmek için bilgi girilmesine yönelik seçenekler sağlar. Hastaya ilişkin ayrıntılar, harf ve sayı karakterlerinden oluşabilir ve her bir alan, doldurulabilir veya istenirse boş bırakılabilir.

Saver EVO PDU hasta ayrıntıları penceresi

NOT: Defibrilasyon olay verileri bilgisayarınıza bir kez kaydedildiğine, bu bilgiler değiştirilemez.

Saver EVO olay görüntüleme penceresi aşağıdaki düğmeleri sağlar:



Print (Yazdır) – Görüntüleme penceresinde o sırada görüntülenen olayı yazdırmak için bu düğmeye tıklayın.




Print Preview (Baskı Önizleme) – Bu düğmeye tıklanması, yazdırılacak verilerin bir önizlemesinin ekranda görüntülenmesine neden olur.



Back (Geri) – Saver EVO PDU olay günlüğü listesi ekranına dönmek için bu düğmeye tıklayın.

PDU ayarlarını görüntüleme

View Settings (Ayarları Görüntüle) düğmesine tıklanması, aşağıdaki PDU Yapılandırma ekranına erişim sağlar. Bu ekran, kullanıcının pil gücünü, hoparlör ses düzeyini, dil ve metronom ayarlarını, CPR hızını ve süresini ve PDU cihazının son kullanma tarihini, yazılım sürümünü ve seri numarasını görüntülemesini sağlar. Kullanıcı bu ayarları yalnızca görüntüleyebilir ve herhangi bir değişiklik yapamaz.

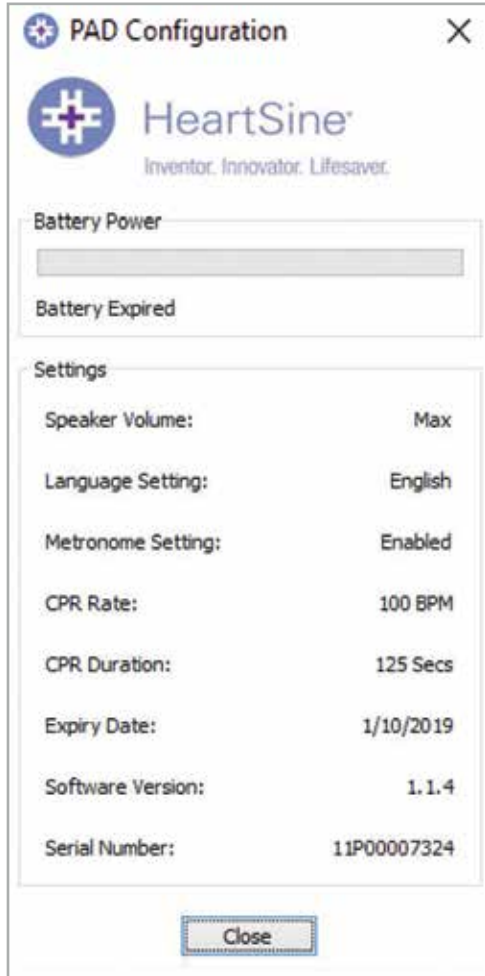


Saver EVO, PDU ayarlarını görüntüle penceresi

Saver EVO'yu kayıtlı olaylarla kullanma

Saver EVO ana ekranındaki Manage Saved Events (Kaydedilmiş Olayları Yönet) düğmesi, kullanıcıların HeartSine samaritan PAD, samaritan Data-Pak pili veya PDU Bellek Kartından indirilmiş ve bilgisayara kaydedilmiş olan olay verilerini gözden geçirmelerini sağlar.

1. Bu düğmeye tıklanması aşağıdaki gibi bir pencereyi açar:

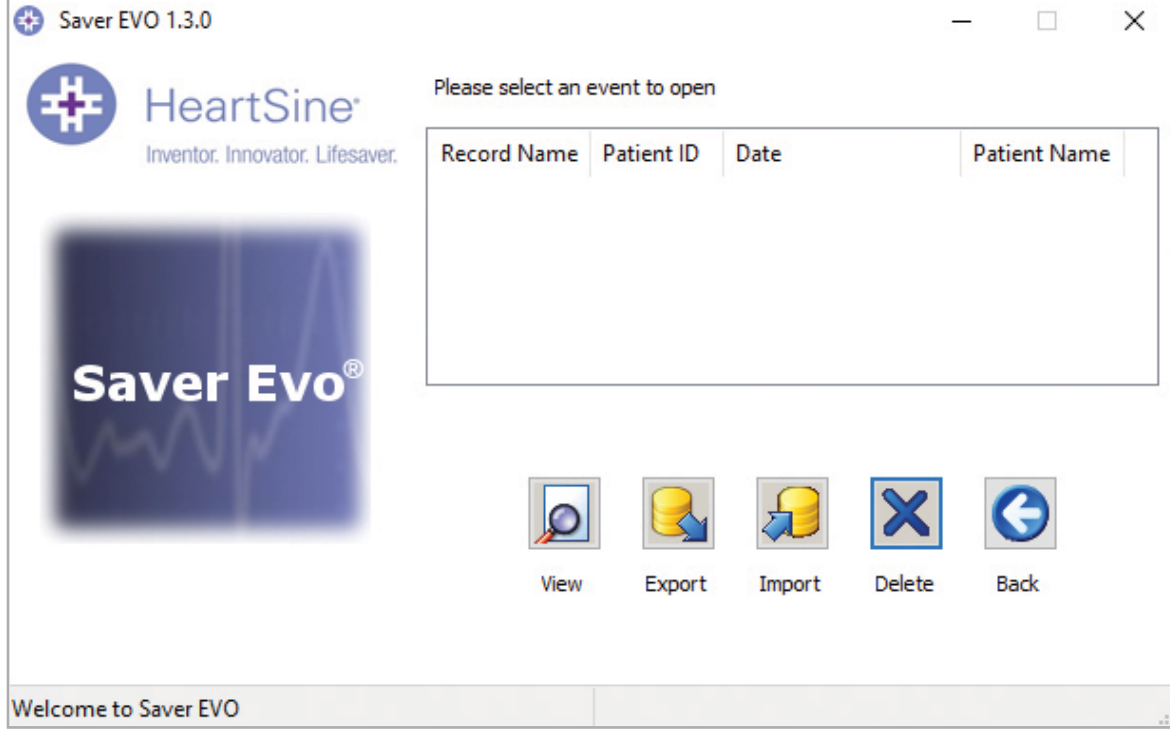

2. Listede bir olayın vurgulanması ve View (Görüntüle) düğmesine tıklanması, EKG verilerini ve olay günlüğünü görüntülemek amacıyla kaydedilmiş olayı açacaktır.

Dışa ve içe aktarma

Saver EVO'da kullanıcıların defibrilasyon olay verilerini, Saver EVO yazılımına sahip başka kişilere göndermelerini ve bu kişilerden almalarını sağlayan fonksiyonlar vardır. Kaydedilmiş olayların kopyalarını göndermek veya almak için, Saver EVO'nun Export (Dışa Aktar) ve Import (İçe Aktar) fonksiyonlarını kullanın.

Olayları dışa aktarmak için:

1. Manage Saved Events (Kaydedilmiş Olayları Yönet) ekranında, dışa aktarmak istediğiniz olayı veya olayları vurgulayın ve ardından Export (Dışa Aktar) düğmesine tıklayın.
2. Bilgisayar, dışa aktarılacak dosyayı kaydetmek istediğiniz bilgisayarınızda bir konum sorar ve dışa aktarılacak dosya için bir ad seçmenize izin verir.
3. Dosyayı seçtiğiniz konuma kaydetmek için Save (Kaydet) düğmesine tıklayın.

Ardından dışa aktarılan bu dosyayı, olağan e-posta yazılımlarını kullanarak bir e-postaya eklemek ve Saver EVO yazılımına sahip başka bir kullanıcıya göndermek olanaklıdır.

Saver EVO'dan olay verileri yalnızca başka bir Saver EVO kullanıcısı tarafından görüntülenebilir. Daha önceki Saver yazılımı, Saver EVO'dan verileri başarıyla içe aktarmayacak ve görüntülemeyecektir.

Olayları içe aktarmak için:

Olayları içe aktarmak ve bilgisayarınızda görüntülemek için, başka bir Saver veya Saver EVO kullanıcısından gönderilmiş olan dosyanın sizin bilgisayarınızda bir konuma kaydedilmesi gerekmektedir.

1. Saver EVO Manage Saved Events (Kaydedilmiş Olayları Yönet) ekranında Import (İçe Aktar) düğmesine tıklayın.
2. Dosyanın kaydedilmiş olduğu konuma gidin ve Open'a (Aç) tıklayın.
3. Kayıtlar, sizin bilgisayarınızdaki Saver EVO dosyalarının listesine eklenecektir.

Ardından bunlar, olay listede vurgulanarak ve View (Görüntüle) düğmesine tıklanarak görüntülenebilir.

Saver EVO, yazılımın Saver olarak adlandırılan önceki sürümünden dışa aktarılmış olan olay verilerini doğru şekilde içe aktaracak ve görüntüleyecektir.

Kayıtlı olayları silmek için:

Kayıtlı olaylar, bilgisayarınızın belleğinden Saver EVO tarafından silinebilir. Olaylar, silinecek olay vurgulanıp seçilerek (birden çok olay seçilebilir) ayrı ayrı silinebilir.

Yalnızca silmek istediğiniz olayların seçilmiş olduğunu onayladıktan sonra Erase (Sil) düğmesine tıklayın. Bir önlem olarak, Saver EVO, belleği silmeden önce bir Password (Parola) girmenizi isteyecektir. Doğru parola girildiğinde seçilen olayların belleği bilgisayarınızdan silinecektir.

İkaz: Silmeden önce lütfen yalnızca silmek istediğiniz olayların seçilmiş olduğundan emin olun. Olaylar, bilgisayarınızın belleğinden bir kez silindikten sonra tekrar oluşturulamazlar ve tüm bilgiler kaybolur.


Saver EVO ayarlarını değiştirme

Saver EVO'da yalnızca bir parola girilerek değiştirilebilen veya tamamlanabilen bazı fonksiyonlar vardır. Bu, yazılımın yöneticilerinin, erişimi belirli özellikteki yetkili kullanıcılarla kısıtlamalarını sağlar. Saver EVO yüklendiğinde, varsayılan parola "password" şeklindedir.

Parolayı değiştirmek için:



1. Bu ana Saver EVO ekranında, küçük Ayarlar düğmesine tıklayın. Böylece aşağıdaki pencere açılacaktır:

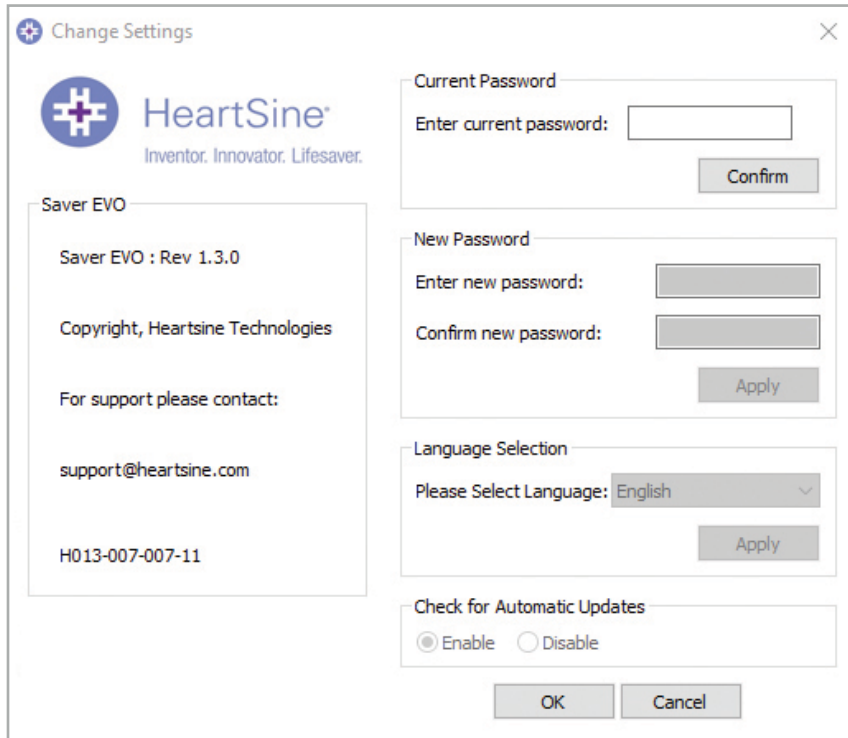


Ayarları değiştir ekranı

2. Mevcut parolayı girin ve Confirm (Onayla) düğmesine tıklayın.
3. Yeni parolayı iki kez girin ve değişikliği gerçekleştirmek için Apply (Uygula) düğmesine tıklayın.
4. Change Password (Parolayı Değiştir) penceresini kapatmak için OK (Tamam) düğmesine tıklayın.

NOT: Saver EVO'nun yeniden yüklenmesi, parolayı yazılımdaki varsayılan parolaya sıfırlar. Anca bu işlem, daha önce kaydedilmiş olan herhangi bir olay verisini kaldırmaz.

Saver EVO dilini değiştirmek için

1. Saver EVO'nun dilini seçmek için, dili açılır listeden seçin ve Apply (Uygula) düğmesine tıklayın.

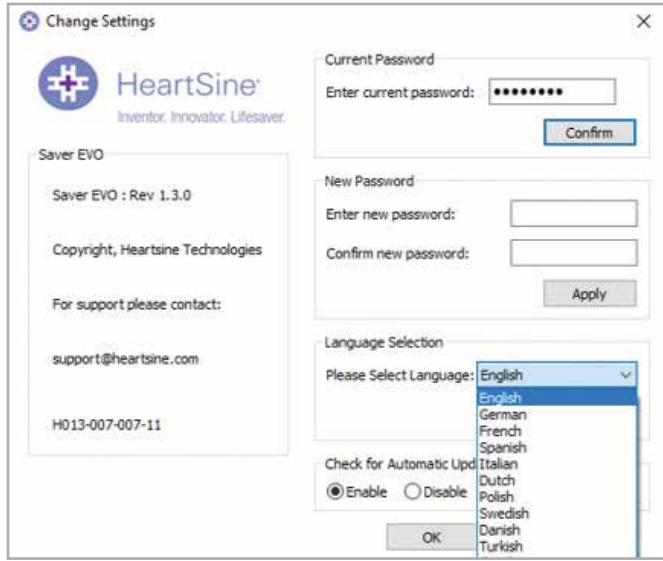


2. Uygula düğmesine tıklandıktan sonra aşağıdaki ekran görünür ve dil değişikliğinin gerçekleşmesi için Saver EVO'nun yeniden başlatılması gerekir.



3. Saver EVO'yu kapatmak için Yes (Evet) veya No (Hayır) düğmesine basın.

Otomatik güncellemeleri denetlemek için:

1. Enable (Etkinleştir) kutusu seçilirse, Saver EVO'nun her başlatılışında, HeartSine web sitesine bağlanarak Saver EVO'nun en son sürümü denetlenir. Bir güncelleme varsa, Saver EVO başlatıldığında size aşağıdaki pencere gösterilir.

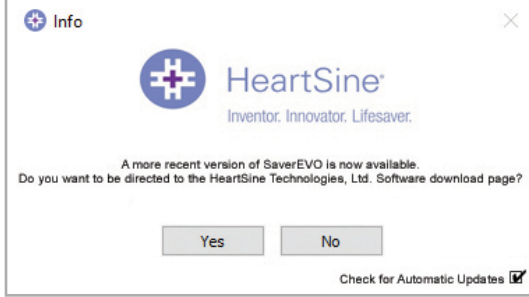

2. Saver EVO'nun daha yeni bir sürümünü indirmek istiyorsanız, Yes (Evet) veya No (Hayır) düğmesini seçin,

Siber Güvenlik

- Bilgisayarınız için tüm Microsoft güvenlik yamalarının uygulandığından emin olun.
- Bilgisayarınızı (Saver EVO dosyaları dahil) düzenli olarak yedekleyin.
- Bilgisayarınıza bir antivirüs/zararlı yazılım önleyici yüklenmesi, etkinleştirilmesi ve güncel tutulması önerilir.
- Bilgisayarınızda oturum açmak için güçlü bir parola kullanın. Parola, büyük ve küçük harf ve rakam ve simge içermelidir.

Daha fazla bilgi için, bizimle **heartsinesupport@stryker.com** adresinden iletişime geçin veya **heartsine.com** adresindeki web sitemizi ziyaret edin.



HeartSine Technologies, Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Faks +44 28 9093 9401

**ABD/Latin Amerika
Müşteri Destek**

11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 U.S.A.
Ücretsiz Hat 866 478 7463
Tel +1 215 860 8100
Faks +1 215 860 8192

Birleşik Krallık'ta oluşturulmuştur.
© 2020 HeartSine Technologies.
Tüm hakları saklıdır.
H013-001-311-4 TR