

„HeartSine samaritan[®] PAD
350P“ treniruoklio
modelis TRN-350-1
naudotojo vadovas

Šiame naudotojo vadove pateikiamos instrukcijos, kaip naudotis „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruokliu.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis yra nemedicininis prietaisas, skirtas naudoti mokant gelbėtojus, kaip tinkamai naudoti „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ automatinį išorinį defibriliatorių. Treniruoklis neturi terapinių funkcijų ir neturėtų būti naudojamas tikromis gelbėjimo situacijomis.



SVARBU! *Kad tikromis gelbėjimo aplinkybėmis neįvyktų nesusipratimas, nelaikykite treniruoklio šalia „HeartSine samaritan PAD 350P“ automatinio išorinio defibriliatoriaus.*

Kad būtų galima lengvai atpažinti, „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio priekinė naudotojo sąsajos plėvelė yra geltona, o „HeartSine samaritan PAD 350P“ automatinio išorinio defibriliatoriaus priekinė plėvelė yra jūros mėlyna / juoda.

„HeartSine“ rekomenduoja, kad gelbėtojai, kurie gali naudotis vienu iš jos defibriliatorių, būtų išmokyti atlikti gaivinimą naudodamiesi defibriliatoriumi (CPR-D). „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis skirtas naudoti kvalifikuotiems CPR-D mokymų instruktoriams mokymų metu.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis yra gamykloje sukonfigūruotas, kad veiktų pagal jungtines Amerikos širdies asociacijos / Europos gaivinimo tarybos 2015 m. gaivinimo rekomendacijas. Prietaisas pristatomas su šešiais iš anksto pagal šias rekomendacijas užprogramuotais scenarijais.

Jeigu pasikeistų gaivinimo rekomendacijos, būtų išleista programinė įranga „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruokliui atnaujinti, kad jas atitiktų. Kreipkitės į „HeartSine“ įgaliotąjį atstovą arba tiesiogiai į „HeartSine Technologies“.

Jungus „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį teikiamos garsinės komandos kartu su regimaisiais indikatoriais. Treniruoklį galima valdyti ir nuotoliniu valdymo pultu, kuris tiekiamas su prietaisu.

Dėl pakaitinių priedų sąrašo kreipkitės į „HeartSine“ įgaliotąjį atstovą.

- 1) Pasirūpinkite, kad „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis būtų visiškai įkrautas (žr. šio vadovo skirsnį „Įkrovimas“).
- 2) Padėkite „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį ir treniruoklio „Trainer-Pak™“ ant lygaus paviršiaus. Įdėkite treniruoklio „Trainer-Pak“ į „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio angą; jeigu tinkamai įdėsite, turite išgirsti spragtelėjimą.
- 3) Į „HeartSine samaritan PAD 350P“ nuotolinio valdymo pultą įdėkite baterijas, kurios tiekiamos su treniruokliu.



Įdėdami nuotolinio valdymo pulto baterijas nepaspauskite jokio mygtuko, nes bus atstatytas nuotolinio valdymo pulto ID.

- 4) Paspauskite ant „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio esantį įjungimo / išjungimo mygtuką ir klausykite garsinių komandų, kad patikrintumėte, ar įrenginys veikia.
- 5) Jeigu „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio įkrova nepakankama, jis tinkamai neveiks. Jeigu reikia įkrauti, įjungus blinks raudonas būsenos indikatorius. Jeigu baterija yra visiškai išsikrovusi, prietaisas iš viso neįsijungs. Visiško įkrovimo instrukcijas žr. šio vadovo skirsnyje „Įkrovimas“.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio įjungimas ir išjungimas

Jei norite įjungti „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį, paspauskite žalią įjungimo / išjungimo mygtuką.



Pagal numatytąją nuostatą treniruoklis veiks pagal paskutinio naudoto scenarijaus nuostatą.

Jei norite „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį išjungti, dar kartą paspauskite žalią įjungimo / išjungimo mygtuką.

Įjungtą „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį galima išjungti pridėdamu nuotolinio valdymo pultu. Treniruokliui išjungti paspauskite nuotolinio valdymo pulto išjungimo mygtuką (raudonas mygtukas).



Įjungtas ir nenaudojamas „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis automatiškai išsijungs po penkiolikos minučių.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis



- A Duomenų prievadas
- B Akumuliatoriaus įkrovos būsenos diodas
- C Būsenos indikatorius
- D Šoko mygtukas
- E Indikatorius „saugu liesti“
- F Garsiakalbis
- G „Trainer-Pak“ kasetė
- H Įjungimo / išjungimo mygtukas
- I Indikatorius „nelieskite“
- J Elektrodų uždėjimo indikatorius
- K Veiksmo rodyklės



Įjungimo / išjungimo mygtukas

Paspauskite šį mygtuką prietaisui įjungti ir išjungti. (Jeigu paspaudžiamas, kai patariama defibriliuoti, siunčiamas pranešimas „įspėjimas, paspaustas išjungimo mygtukas“; prietaisas neišsijungs, nebent dar kartą trims sekundėms paspausite mygtuką.)



Elektrodų uždėjimo indikatorius

Veiksmo rodyklės aplink šią piktogramą blinks, pranešdamos naudotojui, kad HeartSine samaritan PAD 350P elektrodus reikia uždėti, kaip parodyta.



Indikatorius „saugu liesti“

Saugu liesti pacientą, kai blinks veiksmo rodyklės virš šios piktogramos. Galite atlikti gaivinimą arba patikrinti pacientą.



Veiksmo rodyklės

Veiksmo rodyklės aplink šią piktogramą blinks, kad parodytų, kokius veiksmus naudotojui reikia atlikti.



Indikatorius „nelieskite“

Nelieskite paciento, kai blinks veiksmo rodyklės aplink šią piktogramą. HeartSine samaritan PAD 350P gali analizuoti paciento širdies ritmą arba įsikrauti, ruošdamasis defibriliacijai.



Būsenos indikatorius

Blinks žalias – treniruoklis paruoštas naudoti

Blinks raudonas – treniruoklį reikia įkrauti



Šoko mygtukas

Paspauskite šį mygtuką defibriliacijos imitacijai atlikti.


Elektrodų naudojimas

Mokymo scenarijuose naudojamos garsinės komandos išimti elektrodus iš „Trainer-Pak“ ir juos uždėti, kaip nurodyta. Kai raginama, atlikite tolesnius veiksmus.

- 1) Patraukite žalią žiedą, kad atidarytumėte treniruoklio „Trainer-Pak“ kasetę ir visiškai ištrauktumėte elektrodų laidus.
- 2) Nuplėškite elektrodus nuo apsauginės tarpinės.
- 3) Uždėkite elektrodus, kaip rodo elektrodų uždėjimo indikatorius; krūtinkaulio ir viršutinio taško elektrodai yra lengvai atpažįstami.
- 4) Tvirtai prispauskite elektrodus, kad būtų tinkamas kontaktas.

Elektrodų suvyniojimas po naudojimo

- 1) Priklijuokite apsaugines tarpines prie elektrodų arba pakeiskite naujais elektrodais.
- 2) Sulenkite elektrodus kartu taip, kad tarpinės būtų išorėje.
- 3) Leiskite elektrodams kabėti prie prietaiso ir naudokitės mėlynos ritės rankenėle, kad visiškai suvyniotumėte elektrodus:

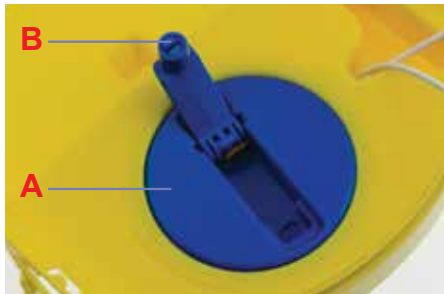


A Ritės mechanizmas

B Ritės rankenėlė

- 4) Padėkite elektrodus ant „Trainer-Pak“ kasetės viršaus pasirūpindami, kad laidai būtų po elektrodais.
- 5) Įstumdami geltoną dėklą į vietą uždarykite „Trainer-Pak“ kasetę.

HeartSine samaritan PAD 350P Trainer treniruoklio nuotolinio valdymo pultas

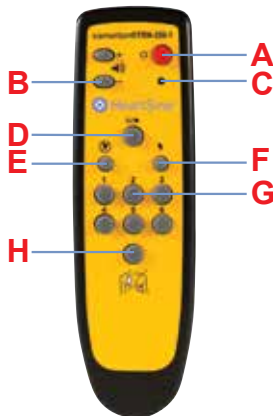


- A Išjungimo mygtukas
- B Garsumo valdiklis
- C Išsikraunančios baterijos indikatorius
- D Pauzės mygtukas
- E Scenarijus „nerekomenduojama taikyti šoko“
- F Scenarijus „rekomenduojama taikyti šoką“
- G Pasirinkti scenarijų
- H Uždėti elektrodus



Treniruoklio išjungimas

Nuotolinio valdymo pultas gali būti naudojamas „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruokliui išjungti. Treniruokliui išjungti paspauskite raudoną nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

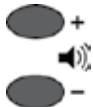


Garsumo keitimas

Yra keturios „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio garsumo nuostatos. Garsumo valdymo mygtukai yra į kairę nuo išjungimo mygtuko nuotoliniame valdymo pulte. Garsumui padidinti paspauskite „+“ mygtuką, garsumui sumažinti – „-“ mygtuką.



Treniruoklio pristabdymas

Mokymų metu „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį galima pristabdyti. Treniruokliui pristabdyti paspauskite pauzės mygtuką (||/▶). Treniruoklis bus pristabdytas, kol dar kartą paspausite pauzės mygtuką; tada bus tęsiamas pasirinktas scenarijus.

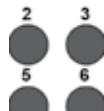

Scenarijaus keitimas

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis pristatomas su šešiais iš anksto užprogramuotais mokymo scenarijais. (Išsamesnės informacijos apie scenarijus žr. šio vadovo skirsnyje „Mokymų scenarijai“.) Scenarijų galima pakeisti paspausdus atitinkamą skaičiaus mygtuką nuotoliniame valdymo pulte, t. y. pasirinkus 3 bus pasirinktas trečiasis mokymų scenarijus.

Pakeitus scenarijų prietaisas veiks, kaip aprašyta scenarijaus skirsnyje. Prietaise bus naudojamas šis scenarijus, kol pasirinksite naują scenarijų.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklyje galima rinktis iš šešių iš anksto užprogramuotų mokymų scenarijų. Visi iš anksto užprogramuoti scenarijai parengti pagal AHA/ERC 2015 rekomendacijas. Toliau pateikiama informacijos apie scenarijus.

1 scenarijus

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nustatymo režimas | - „Iškvieskite greitąją pagalbą“, „Patraukite žalią žiedą“ ir t. t. |
| 2. Naudotojo intervencija | - Norint patvirtinti, kad uždėti elektrodai, reikia paspausti elektrodų mygtuką |
| 3. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 4. Rekomenduojama taikyti šoką | - Naudotojas turi paspausti šoko mygtuką |
| 5. Gaivinimo režimas | - Naudotojas atlieka gaivinimą pagal atitinkamas komandas |
| 6. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 7. Šoko taikyti nerekomenduojama | |
| 8. Gaivinimo režimas | - Naudotojas atlieka gaivinimą pagal atitinkamas komandas |
| 9. Kartojimas | - Veiksmai nuo 6 iki 8 kartojami, kol paspaudžiamas įjungimo / išjungimo mygtukas |

2 scenarijus

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nustatymo režimas | - „Iškvieskite greitąją pagalbą“, „Patraukite žalią žiedą“ ir t. t. |
| 2. Naudotojo intervencija | - Norint patvirtinti, kad uždėti elektrodai, reikia paspausti elektrodų mygtuką |
| 3. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 4. Šoko taikyti nerekomenduojama | |
| 5. Gaivinimo režimas | - Naudotojas atlieka gaivinimą pagal atitinkamas komandas |
| 6. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 7. Rekomenduojama taikyti šoką | - Naudotojas turi paspausti šoko mygtuką |
| 8. Gaivinimo režimas | - Naudotojas atlieka gaivinimą pagal atitinkamas komandas |
| 9. Kartojimas | - Veiksmai nuo 6 iki 8 kartojami, kol paspaudžiamas įjungimo / išjungimo mygtukas |

3 scenarijus

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Elektrodoai | - Prietaisas veikia taip, tarsi elektrodai jau būtų uždėti |
| 2. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 3. Patikrinkite elektrodus | - „Patikrinkite elektrodus“ |
| 4. Naudotojo intervencija | - Norint patvirtinti, kad uždėti elektrodai, reikia paspausti elektrodų mygtuką |
| 5. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 6. Rekomenduojama taikyti šoka | - Naudotojas turi paspausti šoko mygtuką |
| 7. Gaivinimo režimas | - Naudotojas atlieka gaivinimą pagal atitinkamas komandas |
| 8. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 9. Šoko taikyti nerekomenduojama | |
| 10. Gaivinimo režimas | - Naudotojas atlieka gaivinimą pagal atitinkamas komandas |
| 11. Kartojimas | - Veiksmi nuo 3 iki 10 kartojami, kol paspaudžiamas įjungimo / išjungimo mygtukas |

4 scenarijus

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Elektrodoai | - Prietaisas veikia taip, tarsi elektrodai jau būtų uždėti |
| 2. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 3. Rekomenduojama taikyti šoka | - Naudotojas turi paspausti šoko mygtuką |
| 4. Gaivinimo režimas | - Naudotojas atlieka gaivinimą pagal atitinkamas komandas |
| 5. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 6. Rekomenduojama taikyti šoka | - Naudotojas turi paspausti šoko mygtuką |
| 7. Gaivinimo režimas | - Naudotojas atlieka gaivinimą pagal atitinkamas komandas |
| 8. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 9. Šoko taikyti nerekomenduojama | |
| 10. Gaivinimo režimas | - Naudotojas atlieka gaivinimą pagal atitinkamas komandas |
| 11. Kartojimas | - Veiksmi nuo 5 iki 10 kartojami, kol paspaudžiamas įjungimo / išjungimo mygtukas |

5 scenarijus

5 scenarijus yra toks pat, kaip 1 scenarijus, su papildomomis garsinėmis indikacijomis, kada gaivinimo režimu atlikti dirbtinį kvėpavimą.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nustatymo režimas | - „Iškvieskite greitąją pagalbą“, „Patraukite žalią žiedą“ ir t. t. |
| 2. Naudotojo intervencija | - Norint patvirtinti, kad uždėti elektrodai, reikia paspausti elektrodų mygtuką |
| 3. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 4. Rekomenduojama taikyti šoką | - Naudotojas turi paspausti šoko mygtuką |
| 5. Gaivinimo režimas | - Naudotojas turi atlikti gaivinimą pagal atitinkamas komandas; tai apima garsines indikacijas, kada atlikti dirbtinį kvėpavimą – metronomo signalas pasikeičia iš pypsėjimo į tikslų dešimties paspaudimų laikotarpį. |
| 6. Stebėjimo režimas | - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t. |
| 7. Šoko taikyti nerekomenduojama | |
| 8. Gaivinimo režimas | - Naudotojas turi atlikti gaivinimą pagal atitinkamas komandas; tai apima garsines indikacijas, kada atlikti dirbtinį kvėpavimą – metronomo signalas pasikeičia iš pypsėjimo į tikslų dešimties paspaudimų laikotarpį. |
| 9. Kartojimas | - Veiksmai nuo 6 iki 8 kartojami, kol paspaudžiamas įjungimo / išjungimo mygtukas |

6 scenarijus

6 scenarijus yra toks pat, kaip 2 scenarijus, su papildomomis garsinėmis indikacijomis, kada gaivinimo režimu atlikti dirbtinį kvėpavimą.

1. Nustatymo režimas - „Iškvieskite greitąją pagalbą“, „Patraukite žalią žiedą“ ir t. t.
2. Naudotojo intervencija - Norint patvirtinti, kad uždėti elektrodai, reikia paspausti elektrodų mygtuką
3. Stebėjimo režimas - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t.
4. Šoko taikyti nerekomenduojama
5. Gaivinimo režimas - Naudotojas turi atlikti gaivinimą pagal atitinkamas komandas; tai apima garsines indikacijas, kada atlikti dirbtinį kvėpavimą – metronomo signalas pasikeičia iš pypsėjimo į tiksėjimą dešimties paspaudimų laikotarpiui.
6. Stebėjimo režimas - „Širdies ritmo vertinimas“, „Nelieskite paciento“ ir t. t.
7. Rekomenduojama taikyti šoką - Naudotojas turi paspausti šoko mygtuką
8. Gaivinimo režimas - Naudotojas turi atlikti gaivinimą pagal atitinkamas komandas; tai apima garsines indikacijas, kada atlikti dirbtinį kvėpavimą – metronomo signalas pasikeičia iš pypsėjimo į tiksėjimą dešimties paspaudimų laikotarpiui.
9. Kartojimas - Veiksmai nuo 6 iki 8 kartojami, kol paspaudžiamas įjungimo / išjungimo

Su nuotoliniu valdymo pultu instruktorius gali rankiniu būdu valdyti scenarijų. Įjungtas „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis veiks taip, kaip aprašyta išvardytuose mokymų scenarijuose. Instruktoriai gali tai pakeisti paspausdami mygtuką „Rekomenduojama taikyti šoką“, „Nerekomenduojama taikyti šoko“ arba „Uždėkite elektrodus“.



Rekomenduojama taikyti šoką

Paspaudus mygtuką „Rekomenduojama taikyti šoką“ „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis pakeičia pasirinktą mokymų scenarijų ir ima imituoti ritmą, kai reikia defibriliuoti. Visuose tolesniuose analizės etapuose bus rekomenduojama taikyti šoką, kol treniruoklis bus išjungtas arba nuotolinio valdymo pulte bus paspaustas mygtukas „Nerekomenduojama taikyti šoko“.



Nerekomenduojama taikyti šoko

Paspaudus mygtuką „nerekomenduojama taikyti šoko“ „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis pakeis pasirinktą mokymų scenarijų ir imituos ritmą, kai nereikia defibriliuoti. Visuose tolesniuose analizės etapuose bus rekomenduojama taikyti šoką, kol treniruoklis bus išjungtas arba nuotolinio valdymo pulte bus paspaustas mygtukas „Rekomenduojama taikyti šoką“.



Uždėti elektrodus

Jeigu paspaudžiamas mygtukas „Uždėti elektrodus“, treniruoklis analizės etape teiks komandas „Uždėkite elektrodus“. Treniruoklis pakartotinai teiks komandas „Uždėkite elektrodus“, kol bus dar kartą paspaustas mygtukas „Uždėti elektrodus“.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio akumulatoriaus tvarkymas

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklyje yra įkraunamas akumulatorius. Rekomenduojama pasirūpinti, kad prieš atliekant mokymus „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis būtų visiškai įkrautas.

Visiškai įkrautą „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį galima naudoti maždaug septynias valandas iki kitos įkrovos.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis stebės išsikraunančio akumulatoriaus talpą. Mažiausia valandą prieš visiškai išsikraunant akumulatoriui treniruoklis pateiks tokį pranešimą:



„Įspėjimas. Išsikrauna akumulatorius“

Išgirdę tokį pranešimą, „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį galite naudoti ribotą laiką. Jeigu akumulatorius visiškai išsikrauna, treniruoklis savaime išsijungia. Tokiu atveju treniruoklį reikia įkrauti.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio įkrovimas

Kad saugiai įkrautumėte „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį, vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.

- 1) Į „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio lizdą įkiškite įkrovimo adapterį. Pasirūpinkite, kad adapteris būtų įkištas iki galo.
- 2) Į elektros tiekimo tinklą įjunkite kroviklį.
- 3) Palikite treniruoklį įkrauti. Akumulatoriaus įkrovos būsenos diodas (esantis šalia lizdo) šviečia raudonai, kai vyksta spartus įkrovimas, ir bliesi, kai įkrovimas beveik baigiamas. Kai įkrovimas baigiamas, diodas išsijungia. Visiškai išsikrovusiam „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio akumulatoriui įkrauti reikia daugiausia šešių valandų.
- 4) Ištraukite adapterį iš „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio. Įjunkite treniruoklį, kad patikrintumėte, ar prietaisas veikia.

Jeigu „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis įjungiamas įkrovimo metu, kroviklį reikia išjungti ir vėl įjungti, kad būtų iš naujo paleistas spartusis įkrovimas.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį galima įkrauti tik jam skirtu krovikliu. Naudojant bet kokį kitą įkrovimo prietaisą negalios garantija ir „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis gali sugesti.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis ir kroviklis skirti naudoti patalpų viduje. Nenaudokite šlapioje ar drėgnoje aplinkoje.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklyje, treniruoklio „Trainer-Pak“ ir kroviklyje nėra naudotojo remontuojamų detalių. Šių gaminių negalima atidaryti. Mažai tikėtino gedimo atveju nedelsdami kreipkitės į atstovą.

Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio nuotolinio valdymo pulte yra įspėjimo apie išsikraunančius maitinimo elementus indikatorius. Jeigu šis indikatorius bliski raudonai du kartus paspaudus nuotolinio valdymo mygtuką, vadinasi, reikia pakeisti nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus.

Nuotoliniame pulte naudojami du AAA tipo maitinimo elementai.

Maitinimo elementus galima pasiekti nuėmus jų skyriaus dangtelį užpakalinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje.



Jeigu maitinimo elementai į nuotolinį valdymo pultą įdedami nuspaudus išjungimo mygtuką, įjungiamas nuotolinio valdymo pulto susiejimo režimas ir priskiriamas naujas perdavimo ID. Jis skirsis nuo pirmiau įrašyto į treniruoklį. Jeigu taip nutinka netyčia, reikia atlikti visą susiejimo procedūrą, kad nuotolinis valdymo pultas būtų vėl susietas su „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruokliu.

Paprastai maitinimo elementų pakeitimas nebūna problemų priežastis, nes susiejimas inicijuojamas tik tada, kai paspaudžiamas ir išjungimo mygtukas.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio konfigūravimo priemonė

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio konfigūravimo priemonė yra programinė įranga, kurią galima nemokamai parsisiųsti iš „HeartSine“ svetainės (heartsine.com). Su šia programine įranga galite atnaujinti savo treniruoklį. Galimos toliau nurodytos parinktys.

Kalba

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį galima perprogramuoti, kad veiktų su garsinėmis komandomis bet kuria iš pasirinktinių kalbų. Jei norite sužinoti, kaip tai padaryti, parsisiųskite dabartinį „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio konfigūravimo priemonės naudotojo vadovą iš „HeartSine“ svetainės.

Nuotolinio valdymo pulto susiejimas su „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruokliu

Kiekvienas „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis turi specialų nuotolinio valdymo pultą jam valdyti. Taip yra todėl, kad būtų galima be trukdžių vieną šalia kito naudoti kelis prietaisus. Išimtinu atveju, jeigu nuotolinio valdymo pultas su jūsų treniruokliu neveiktų, gali tecti jį susieti su jūsų treniruokliu.

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio konfigūravimo priemonę galima naudoti norint nuotolinio valdymo pultą susieti su treniruokliu. Visos instrukcijos yra atitinkamame naudotojo vadove.

Prietaisų identifikaciniai numeriai

Kiekvienam „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruokliui gamybos metu suteikiamas identifikacinis numeris nuo 001 iki 255. Tada kiekvieno treniruoklio nuotolinio valdymo pultui suteikiamas tas pats identifikacinis numeris. Jei norite mažai tikėtinu atveju, kai du prietaisai su tokiu pačiu ID numeriu naudojami tuo pačiu metu, priskirti prietaisams naujus numerius, naudokitės „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio konfigūravimo priemone. Priskyrus naujus ID numerius gali tecti prietaisą suporuoti su jo nuotoliniu valdymo pultu.

Toliau pateikiama trumpa gaivinimo pagrindų, skirtų neprofesionaliems gelbėtojams, apžvalga pagal Amerikos širdies asociacijos (AHA) ir Europos gaivinimo tarybos (ERC) 2015 metais publikuotas gaivinimo ir greitosios pagalbos centrų rekomendacijas. Jos skirtos naudoti tik kaip išmokytų gaivinimo specialistų trumpos instrukcijos. „HeartSine“ rekomenduoja, kad, prieš pradėdant eksploatuoti, visi potencialūs HeartSine samaritan PAD 350P naudotojai kompetentingos mokymų organizacijos būtų išmokyti tinkamai atlikti gaivinimą ir naudotis HeartSine samaritan PAD 350P. Jeigu rekomendacijos pasikeistų, būtų išleista programinė įranga HeartSine samaritan PAD 350P treniruokliui atnaujinti, kad jas atitiktų. Kreipkitės į „HeartSine“ įgaliotąjį atstovą arba tiesiogiai į „HeartSine Technologies“.

SKAMBINKITE greitajai pagalbai (999 / 911 / 112 ir pan.) Pasiųskite atnešti AID.

Pacientas nereaguoja? Kreipkitės į pacientą ir papurtykite už peties. Skambinkite greitajai pagalbai.




Stebėkite, jauskite, klausykite.

Pražiodykite, patikrinkite, ar kvėpuoja.




Atlikite gaivinimą. Vadovaukitės naujausiomis AHA arba ERC rekomendacijomis.

Atlikite gaivinimą, kol bus atneštas AID ARBA atvyks greitosios pagalbos gydytojas. Pakvieskite kitus žmones padėti ir pasikeiskite atlikdami gaivinimą.

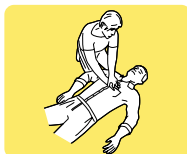

Jeigu yra galimybė, naudokite AID.

Tęskite gaivinimą, kol atvyks greitoji pagalba. Po vieno ciklo arba 2 minučių pasikeiskite su kitu asmeniu.

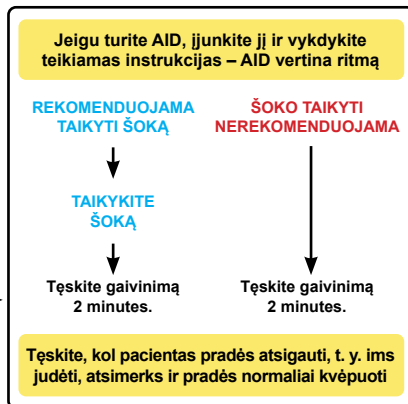

Likvidavimo instrukcijos

„HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklis yra daugkartinis prietaisas. Jeigu prižiūrimas pagal šio vadovo instrukcijas, jam suteikiamas dvejų metų garantinis laikotarpis nuo pagaminimo datos.

Jeigu norite baigti eksploatuoti „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį, jį reikia likviduoti atidavus atitinkamai perdirbimo įmonei, laikantis šalies, valstijos ir vietos reikalavimų. Arba grąžinkite įrenginį likviduoti savo vietiniam atstovui arba „HeartSine Technologies“.

Likvidavimas Europos Sąjungoje

Neišmeskite „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklio su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis: laikykite „HeartSine samaritan PAD 350P Trainer“ treniruoklį atskirai, kad jis būtų pakartotinai naudojamas arba perdirbamas pagal Europos Parlamento ir Europos Sąjungos elektronikos ir elektros įrangos atliekų (WEEE) Direktyvą 2002/96/EEC, arba grąžinkite likviduoti savo vietiniam atstovui arba „HeartSine Technologies“.

Garantijos išimtis

„HeartSine Technologies“ arba įgaliotieji atstovai neįsipareigoja atlikti garantinės priežiūros / remonto jeigu:

- a. Prietaisui buvo atlikta neleistinų pakeitimų.
- b. Naudojami nestandartiniai komponentai.
- c. Naudotojas nenaudojo prietaiso pagal indikacijas ir šiame vadove pateiktas instrukcijas.
- d. Pašalintas, sugadintas arba pakeistas prietaiso serijos numeris.
- e. Prietaisas, elektrodai arba baterijos eksploatuojant laikomi netinkamomis sąlygomis.
- f. Prietaisas buvo išbandytas naudojant nepatvirtintus metodus arba netinkamą įrangą (žr. šio vadovo skirsnį „Priežiūra“).

Bet kokias garantines pretenzijas reikia adresuoti savo atstovui, iš kurio buvo įsigytas prietaisas. Prieš atlikdama garantinį remontą „HeartSine Technologies“ reikalauja įsigijimo įrodymų. Gaminys turi būti naudojamas pagal šį naudotojo vadovą ir pagal savo paskirtį. Jeigu turite klausimų, kreipkitės pagalbos į heartsinesupport@stryker.com.



heartsine.com

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis adresu **heartsinesupport@stryker.com** arba
apsilankykite mūsų svetainėje adresu **heartsine.com**.

EMEA/APAC

HeartSine Technologies, Ltd.

203 Airport Road West

Belfast, BT3 9ED

Jungtinė Karalystė

Tel: +44 28 9093 9400

Faks: +44 28 9093 9401



© 2019 HeartSine Technologies. Visos teisės saugomos. Made in U.K.

H036-019-115-1 LT