

HeartSine samaritan® PAD
SAM 360P Trainer

malli TRN-360-1

Käyttöopas



HeartSine®

ässä käyttöoppaassa annetaan ohjeet HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -harjoittelulaitteen käyttöön.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer on ei-lääkinnällinen laite, joka on tarkoitettu käytettäväksi koulutettaessa ensiapuhenkilökuntaa automaattisen ulkoisen HeartSine samaritan PAD 360P -defibrillaattorin asianmukaiseen käyttöön. Trainer-harjoittelulaite ei todellisuudessa anna hoitoa, eikä sitä saa käyttää aidoissa pelastustilanteissa.



TÄRKEÄÄ: *Sekaannusten välttämiseksi aidoissa hätätilanteissa harjoittelulaitetta ei saa säilyttää automaattisen ulkoisen HeartSine samaritan PAD 360P -defibrillaattorin läheisyydessä tai jättää sen lähelle.*

Jotta laitteet olisi helppo erottaa toisistaan, HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen etupuolen ohjauspaneelin pintakalvo on keltainen, kun taas automaattisessa ulkoisessa HeartSine samaritan PAD 360P -defibrillaattorissa pintakalvo on tummansininen/musta.

HeartSine suosittelee, että ensiapuhenkilöt, jotka saattavat joutua käyttämään yhtiön defibrillaattoreita, saavat painelu-puhalluselvytys- ja defibrillointikoulutuksen (PPE-D). HeartSine samaritan PAD 360P Trainer on tarkoitettu hyväksytyjen PPE-D-kouluttajien käyttöön koulutustilaisuuksissa.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer on valmiiksi määritetty noudattamaan Amerikan sydänliiton/Euroopan elvytysneuvoston vuonna 2015 yhteisesti antamia painelu-puhalluselvytys (PPE) -ohjeita. Laitteessa on kuusi esiohjelmointia tapausta, jotka perustuvat näihin ohjeisiin.

Jos elvytysohjeet muuttuvat, HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -harjoittelulaitteen ohjelmistolle julkaistaan niitä noudattava päivitys. Ota yhteys valtuutettuun HeartSine-jälleenmyyjään tai suoraan HeartSine Technologiesiin.

Kun HeartSine samaritan PAD 360P Trainer käynnistetään, se antaa äänikehoitteita ja niihin liittyviä visuaalisia merkkejä. Trainer-laitetta voidaan myös ohjata laitteen mukana toimitettavan kaukosäätimen avulla.

Ota yhteys valtuutettuun HeartSine-jälleenmyyjään saadaksesi luettelon vaihto-osista.


- 1) Varmista, että HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen akku on täysin ladattu (katso tämän oppaan lataamista koskeva osa).
- 2) Aseta HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ja sen Trainer-Pak™ -pakkaus tasaiselle alustalle. Työnnä Trainer-Pak -pakkaus HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen aukkoon, ja varmista, että kuulet sen napsahtavan kunnolla paikalleen.
- 3) Aseta Trainer-laitteen mukana toimitetut paristot HeartSine PAD -kaukosäätimeen.

 *Älä paina mitään painikkeita asettaessasi paristoja kaukosäätimeen, sillä kaukosäätimen tunnus saattaa nollautua.*

- 4) Paina HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen virtapainiketta ja kuuntele äänikehoitteet varmistaaksesi, että laite toimii.
- 5) Jos HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen lataustaso ei ole riittävä, se ei toimi oikein. Kun laite on käynnissä, tilan merkkivalo vilkkuu punaisena, jos lataus on tarpeen. Jos laitteen akku on kokonaan tyhjä, se ei käynnisty lainkaan. Täydelliset latausohjeet saat tämän oppaan latausta koskevasta osasta.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistä HeartSine samaritan PAD 360P Trainer painamalla vihreätä virtapainiketta.

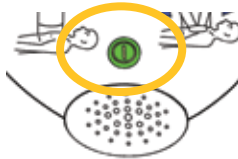


 *Harjoituslaite toimii oletusarvoisesti viimeksi käytetyn tapausasetuksen mukaan.*

Sammuta HeartSine samaritan PAD 360P Trainer painamalla vihreätä virtapainiketta uudelleen.

Kun HeartSine samaritan PAD 360P Trainer on käynnissä, se voidaan sammuttaa sen mukana toimitetulla kaukosäätimellä. Voit sammuttaa Trainer-laitteen painamalla kaukosäätimen sammutuspainiketta (punainen painike).

 *Kun HeartSine samaritan PAD 360P Trainer on käynnistetty, laite sammuu automaattisesti viidentoista minuutin kuluttua, jos sitä ei käytetä.*

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer

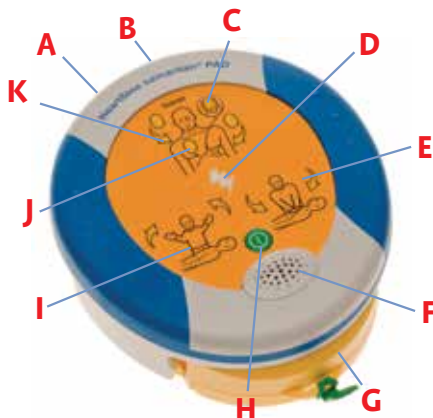

A Tiedonsiirtoportti

B Akun lataustilan merkkivalo

C Tilan ilmaisin

D Iskukuvake

E Koskeminen turvallista -ilmaisin

F Kaiutin

G Trainer-Pak-lokero

H Virtapainike

I Älä koske -ilmaisin

J Kiinnitä elektrodit -ilmaisin

K Toimintanuolet



Virtapainike

Tällä painikkeella voit käynnistää ja sammuttaa laitteen. (Jos painiketta painetaan, kun laite suosittelee iskua, se antaa varoitusviestin: "Varoitus, virtapainiketta painettu"; laite ei sammu, ellei paina painiketta uudelleen kolmen sekunnin kuluessa.)



Kiinnitä elektrodit -ilmaisin

Kuvakkeen ympärillä olevat toimintanuolet vilkkuvat ohjataksesi käyttäjän kiinnittämään HeartSine samaritan PAD 360P -laitteen elektrodit potilaaseen ohjeiden mukaisesti.



Koskeminen turvallista -ilmaisin

Potilaaseen on turvallista koskea, kun toimintanuolet tämän kuvakkeen ympärillä vilkkuvat. Voit antaa painelu-puhallusvytystä tai tutkia potilaan.



Toimintanuolet

Kuvakkeen ympärillä olevat toimintanuolet vilkkuvat ilmaistakseen toimia, joita käyttäjän pitää suorittaa.



Älä koske -ilmaisin

Älä koske potilaaseen, kun toimintanuolet tämän kuvakkeen ympärillä vilkkuvat. HeartSine samaritan PAD 360P saattaa analysoida potilaan sydämen rytmiä tai valmistautua iskun antamiseen.



Tilan ilmaisin

Vilkkuu vihreänä – harjoittelulaite on valmis käyttöön
Vilkkuu punaisena – harjoittelulaite vaatii latausta



Iskukuvake

Tämä ilmaisee, että annetaan simuloitu isku.


Elektrodien käyttö

Harjoitustapauksiin sisältyy äänikehoitteita, jotka käskvät ottamaan elektrodit Pad-Pak-pakkauksesta ja asettamaan ne paikalleen ohjeiden mukaan. Noudata alla olevia vaiheita, kun äänikehoitteet ohjaavat tekemään niin.

- 1) Avaa Trainer-Pak -lokero vetämällä vihreästä lipukkeesta ja avaa elektrodien johdot kokonaan.
- 2) Irrota elektrodien taustapaperi.
- 3) Sijoita elektrodit elektrodien kiinnityksen ilmaisimen mukaisesti; rintalastan ja sydämen kärjen elektrodit on merkitty selkeästi.
- 4) Paina elektrodit tukevasti paikalleen, jotta niiden kontaktipinnat ovat varmasti kiinni ihossa.

Elektrodien kelaaminen kokoon käytön jälkeen

- 1) Kiinnitä taustapaperit takaisin elektrodeihin tai vaihda elektrodit uusiin.
- 2) Aseta elektrodit vastakkain siten, että taustapaperi on niiden ulkopuolella.
- 3) Anna elektrodien roikkua laitteesta ja käytä sinisen kelausmekanismin kahvaa niiden kiertämiseen takaisin paikalleen:

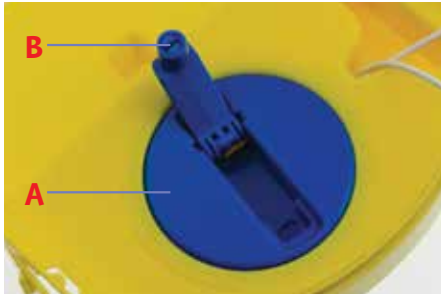


A Kelausmekanismi

B Kelauskahva

- 4) Aseta elektrodit Pad-Pak-pakkauksen päälle ja varmista, että johdot ovat elektrodien alla.
- 5) Sulje Pad-Pak-lokero työntämällä keltainen alusta paikalleen.


HeartSine samaritan PAD 360P Trainer-laitteen kaukosäädin

- A Virtapainike
- B Äänenvoimakkuuden säätö
- C Paristojen tyhjenemisen merkkivalo
- D Keskeytyspainike
- E Isku ei tarpeen -tapaus
- F Isku tarpeen -tapaus
- G Tapauksen valinta
- H Kiinnittä elektrodit

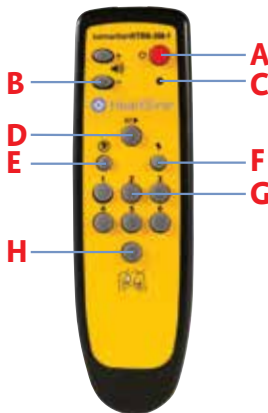

Trainer-laitteen sammuttaminen

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laite voidaan sammuttaa kaukosäätimellä. Sammuta Trainer-laite painamalla kaukosäätimen punaista painiketta.

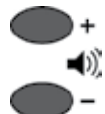


Äänenvoimakkuuden säätäminen

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteessa on neljä äänenvoimakkuuden asetusta. Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet ovat kaukosäätimessä virtapainikkeen vasemmalla puolella. Lisää äänenvoimakkuutta painamalla "+"-näppäintä ja pienennä äänenvoimakkuutta painamalla "-"-näppäintä.



Trainer-laitteen toiminnan keskeyttäminen

Voit asettaa HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen keskeytystilaan koulutuksen aikana. Voit keskeyttää Trainer-laitteen toiminnan painamalla keskeytyspainiketta (||/▶). Trainer-laite pysyy keskeytystilassa, kunnes keskeytyspainiketta painetaan uudelleen, jolloin se jatkaa valitun tapauksen toistamista.

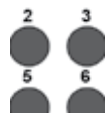

Tapauksen vaihtaminen

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteessa on esiohjelmoituna kuusi harjoittelutapausta. (Katso lisätietoja tapauksista tämän oppaan harjoittelutapauksia koskevasta osasta.) Voit vaihtaa harjoittelutapausta painamalla kaukosäätimen numeronäppäimiä, eli jos esim. painat näppäintä 3, laite ottaa käyttöön harjoittelutapauksen kolme.

Kun tapaus on vaihdettu, laite toimii tapauksia koskevan osan kuvausten mukaan. Laite käyttää tätä harjoitustapausta, kunnes valitaan jokin toinen tapaus.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteessa on valittavana kuusi esiohjelmointia harjoittelutapausta. Kaikki esiohjelmoidut tapaukset perustuvat AHA:n ja ERC:n vuonna 2015 antamiin ohjeisiin. Alla on lueteltu tapausten tiedot.

Tapaus 1

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Valmistelutila | - | "Soita saadaksesi lääkäriapua", "Vedä vihreästä lipukkeesta", jne. |
| 2. Käyttäjän toimet | - | "Elektrodit"-painiketta painettava sen vahvistamiseksi, että elektrodit on asetettu paikalleen |
| 3. Valvontatila | - | "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne. |
| 4. Iskua suositellaan | - | HeartSine samaritan PAD 360P simuloi iskua automaattisesti |
| 5. Elvytystila | - | Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan |
| 6. Valvontatila | - | "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne. |
| 7. Iskua ei suositella | - | |
| 8. Elvytystila | - | Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan |
| 9. Toisto | - | Vaiheita 6–8 toistetaan, kunnes virtapainiketta painetaan |

Tapaus 2

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Valmistelutila | - | "Soita saadaksesi lääkäriapua", "Vedä vihreästä lipukkeesta", jne. |
| 2. Käyttäjän toimet | - | "Elektrodit"-painiketta painettava sen vahvistamiseksi, että elektrodit on asetettu paikalleen |
| 3. Valvontatila | - | "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne. |
| 4. Iskua ei suositella | - | |
| 5. Elvytystila | - | Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan |
| 6. Valvontatila | - | "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne. |
| 7. Iskua suositellaan | - | HeartSine samaritan PAD 360P simuloi iskua automaattisesti |
| 8. Elvytystila | - | Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan |
| 9. Toisto | - | Vaiheita 6–8 toistetaan, kunnes virtapainiketta painetaan |

Tapaus 3

1. Elektrodit - Laite olettaa, että elektrodit on jo kiinnitetty
2. Valvontatila - "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne.
3. Tarkista elektrodit - "Tarkista elektrodit"
4. Käyttäjän toimet - "Elektrodit"-painiketta painettava sen vahvistamiseksi, että elektrodit on asetettu paikalleen
5. Valvontatila - "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne.
6. Iskua suositellaan - HeartSine samaritan PAD 360P simuloi iskua automaattisesti
7. Elvytystila - Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan
8. Valvontatila - "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne.
9. Iskua ei suositella
10. Elvytystila - Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan
11. Toisto - Vaiheita 3–10 toistetaan, kunnes virtapainiketta painetaan

Tapaus 4

1. Elektrodit - Laite olettaa, että elektrodit on jo kiinnitetty
2. Valvontatila - "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne.
3. Iskua suositellaan - HeartSine samaritan PAD 360P simuloi iskua automaattisesti
4. Elvytystila - Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan
5. Valvontatila - "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne.
6. Iskua suositellaan - HeartSine samaritan PAD 360P simuloi iskua automaattisesti
7. Elvytystila - Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan
8. Valvontatila - "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne.
9. Iskua ei suositella
10. Elvytystila - Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan
11. Toisto - Vaiheita 5–10 toistetaan, kunnes virtapainiketta painetaan

Tapaus 5

Tapaus 5 on sama kuin tapaus 1, mutta siinä on lisäksi ääniohjeet puhalluselvytyksen suorittamiseen elvytystilassa.

1. Valmistelutila - "Soita saadaksesi lääkäriapua", "Vedä vihreästä lipukkeesta", jne.
2. Käyttäjän toimet - "Elektrodit"-painiketta painettava sen vahvistamiseksi, että elektrodit on asetettu paikalleen
3. Valvontatila - "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne.
4. Iskua suositellaan - HeartSine samaritan PAD 360P simuloi iskua automaattisesti
5. Elvytystila - Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan; tämä sisältää ääniohjauksen puhalluselvytyksen antamiseen – metronomin ääni muuttuu piippauksesta nakutukseksi kymmenen painalluksen ajaksi.
6. Valvontatila - "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne.
7. Iskua ei suositella
8. Elvytystila - Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan; tämä sisältää ääniohjauksen puhalluselvytyksen antamiseen – metronomin ääni muuttuu piippauksesta nakutukseksi kymmenen painalluksen ajaksi.
9. Toisto - Vaiheita 6–8 toistetaan, kunnes virtapainiketta painetaan

Tapaus 6

Tapaus 6 on sama kuin tapaus 2, mutta siinä on lisäksi ääniohjeet puhalluselvytyksen suorittamiseen elvytystilassa.

1. Valmistelutila - "Soita saadaksesi lääkäriapua", "Vedä vihreästä lipukkeesta", jne.
2. Käyttäjän toimet - "Elektrodit"-painiketta painettava sen vahvistamiseksi, että elektrodit on asetettu paikalleen
3. Valvontatila - "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne.
4. Iskua ei suositella
5. Elvytystila - Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan; tämä sisältää ääniohjauksen puhalluselvytyksen antamiseen – metronomin ääni muuttuu piippauksesta nakutukseksi kymmenen painalluksen ajaksi.
- "Analysoin sydämen rytmiä", "Älä koske potilaaseen", jne.
6. Valvontatila -
7. Iskua suositellaan - HeartSine samaritan PAD 360P simuloi iskua automaattisesti
8. Elvytystila - Käyttäjän pitää antaa painelu-puhalluselvytystä ohjeiden mukaan; tämä sisältää ääniohjauksen puhalluselvytyksen antamiseen – metronomin ääni muuttuu piippauksesta nakutukseksi kymmenen painalluksen ajaksi.
9. Toisto - Vaiheita 6–8 toistetaan, kunnes virtapainiketta painetaan

Kouluttajat voivat käyttää kaukosäädintä tapauksen ohjaamiseen manuaalisesti. Kun HeartSine samaritan PAD 360P Trainer on käynnissä, se toimii lueteltujen harjoittelutapausten mukaisesti. Kouluttajat voivat ohittaa tapausjärjestyksen painamalla "Isku tarpeen"-, "Isku ei tarpeen"- tai "Kiinnitä elektrodit" -painiketta.



Isku tarpeen

Kun "Isku tarpeen" -painiketta painetaan, HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ohittaa valitun harjoittelutapausten kulun ja simuloi iskettävän rytmin. Jokainen sitä seuraava analyysijakso suosittelee iskun antamista, kunnes harjoittelulaite sammutetaan tai kaukosäätimen "Isku ei tarpeen" -painiketta painetaan.



Isku ei tarpeen

Kun "Isku ei tarpeen" -painiketta painetaan, HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ohittaa valitun harjoittelutapausten kulun ja simuloi ei-iskettävän rytmin. Jokainen sitä seuraava analyysijakso suosittelee, ettei iskua anneta, kunnes harjoittelulaite sammutetaan tai kaukosäätimen "Isku tarpeen" -painiketta painetaan.



Kiinnitä elektrodit

Jos "Kiinnitä elektrodit" -painiketta painetaan, harjoittelulaite toistaa "Kiinnitä elektrodit" -kehoitteet analyysijakson aikana. Laite jatkaa "Kiinnitä elektrodit" -kehoitteiden toistamista, kunnes "Kiinnitä elektrodit" -painiketta painetaan uudelleen.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen akun hallinta

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteessa on ladattava akku. On suositeltavaa varmistaa ennen koulutustoimia, että HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen akku on täysin ladattu.

Täysin ladattuna HeartSine samaritan PAD 360P Trainer toimii noin seitsemän tuntia ennen kuin se on ladattava uudelleen.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer valvoo akun kapasiteettia sen tyhjentyessä. Vähintään tuntia ennen kuin akku on tyhjentynyt kokonaan, harjoittelulaite antaa seuraavan viestin:



”Varoitus. Akku vähissä”

Ilos kuulet tämän varoituksen, voit jatkaa HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen käyttöä rajallisen ajan. Jos akku tyhjenee täysin, harjoittelulaite sammuttaa itsensä. Tässä vaiheessa harjoittelulaitteen akku on ladattava.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen akun lataaminen

Noudata alla olevia ohjeita HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen lataamiseksi turvallisesti.

- 1) Työnnä laturin liitin HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen sivussa olevaan vastakkeeseen. Varmista, että liitin on kunnolla paikoillaan.
- 2) Kytke laturi verkkovirtaan.
- 3) Anna harjoittelulaitteen latautua. Akun lataustilan merkkivalo (vastakkeen vieressä) palaa punaisena, kun pikalataus on käynnissä ja alkaa vilkkua, kun lataus on lähes valmis. Kun lataus on valmis, merkkivalo sammuu. Kokonaan tyhjentyneen HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen akun lataus kestää enintään kuusi tuntia.
- 4) Irrota liitin HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteesta. Käynnistä harjoittelulaite varmistaaksesi, että se toimii.

Jos HeartSine samaritan PAD 360P Trainer käynnistetään latauksen aikana, laturi on sammutettava ja käynnistettävä uudelleen, jotta se aloittaa pikalatauksen uudelleen.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitetta saa ladata vain sen mukana toimitetulla laturilla. Jonkin muun latauslaitteen käyttäminen mitätöi takuun ja saattaa johtaa HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen vahingoittumiseen.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ja sen laturi on suunniteltu vain sisäkäyttöön. Älä käytä märissä tai kosteissa ympäristöissä.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen, Trainer-Pak -pakkauksen tai laturin sisällä ei ole käyttäjän vaihdettavia osia. Näitä tuotteita ei saa avata. Jos laite ei jostain syystä toimi oikein, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

Kaukosäätimen paristot

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen kaukosäätimessä on paristojen tyhjenemisen merkkivalo. Jos merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa, kun jotakin kaukosäätimen painiketta painetaan, kaukosäätimen paristot on vaihdettava.

Kaukosäädin tarvitsee kaksi tavallista AAA-paristoa.

Paristoihin pääset käiksi irrottamalla kaukosäätimen takapuolella olevan paristokotelon kannen.



Jos asetat paristot kaukosäätimeen painaen samalla virtapainiketta, kaukosäädin siirtyy pariliitoksen muodostustilaan ja ottaa käyttöön uuden lähetystunnuksen. Tunnus ei ole sama kuin ennestään Trainer-laitteeseen tallennettu tunnus. Jos näin käy vahingossa, pariliitoksen muodostus on suoritettava loppuun kaukosäätimen ja HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen uudelleen yhteen liittämiseksi.

Normaali paristojen vaihto ei aiheuta ongelmaa, sillä pariliitoksen muodostus aloitetaan vain, kun virtapainiketta painetaan samanaikaisesti.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen määrittästyökalu

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen määrittästyökalu on ohjelma, jonka voit ladata ilmaiseksi HeartSinen verkkosivuilta (heartsine.com). Ohjelman avulla voit päivittää Trainer-laitteen. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Kieli

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer voidaan ohjelmoida uudelleen käyttämään mitä tahansa saatavana olevan kielivalikoiman kielistä äänikehoteissa. Lataa HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -määrittästyökalun viimeisimmän version käyttöopas HeartSinen verkkosivuilta saataksesi ohjeita.

Kaukosäätimen liittäminen HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteeseen

Jokaisella HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteella on oma kaukosäätimensä. Näin useita laitteita voidaan käyttää lähekkäin ilman häiriöitä. Jos kaukosäätimesi ei jostain syystä enää toimi Trainer-laitteen kanssa, se on ehkä liitettävä Trainer-laitteeseen uudelleen.

Voit käyttää HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -määrittästyökalua kaukosäätimen liittämiseen Trainer-laitteeseen. Täydelliset ohjeet tämän tekemiseen löydät saamastasi käyttöoppaasta.

Laitetunnukset

Jokaiselle HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteelle annetaan valmistuksen aikana tunnusnumero väliltä 001–255. Kunkin laitteen kaukosäädin saa saman numeron kuin itse laite. Jos käy niin, että kahdella samaan aikaan käytettävällä laitteella on sama tunnusnumero, voit antaa laitteille uudet numerot HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -määrittästyökalun avulla. Laite täytyy liittää kaukosäätimeensä uudelleen, kun uusi tunnusnumero on annettu.

Seuraavassa on lyhyt katsaus maallikoiden antaman ensiavun ja elvytyksen perusohjeisiin, jotka Amerikan sydänliitto (AHA) ja Euroopan elvytysneuvosto (ERC) ovat antaneet vuonna 2015 julkaistuissa painelu-puhalluselvytys (PPE)- ja Emergency Cardiovascular Care (ECC) -ohjeissa. Tämä on tarkoitettu vain viitetiedoksi koulutetuille elvytyksen antajille. HeartSine suosittelee, että kaikki HeartSine samaritan PAD 360P -laitteen mahdolliset käyttäjät saavat pätevän koulutusorganisaation antaman koulutuksen sekä elvytykseen että HeartSine samaritan PAD 360P -laitteen käyttöön ennen kuin HeartSine samaritan PAD 360P otetaan käyttöön. Jos elvytysohjeet muuttuvat, HeartSine samaritan PAD 360P -laitteen ohjelmistolle julkaistaan niitä noudattava päivitys. Ota yhteys valtuutettuun HeartSine-jälleenmyyjään tai suoraan HeartSine Technologiesiin.

SOITA hätänumeroon
(999/911/112 jne.). Lähetä joku hakemaan defibrillaattori.

Jos potilas ei reagoi ärsykkeisiin?
Puhuttele potilasta ja ravista häntä olkapäästä. Soita hätänumeroon.




Watch, feel, listen.

Ava ilmatiet, tarkista hengitys.



Perform CPR following the latest AHA or ERC guidelines.

Anna elvytystä, kunnes defibrillaattori on käytettävissä TAI lääkäri saapuu paikalle. Pyydä muita auttamaan sinua ja vuorottelemaan elvytyksessä.

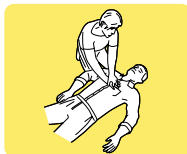

If available use an AED.

Continue CPR until Emergency Services arrive. Alternate with second person after one cycle or 2 minutes.



Jos defibrillaattori on käytettävissä, käynnistä se ja noudata ohjeita - defibrillaattori arvioi rytmin.

**ISKUA
SUOSITELLAAN**



**ANNA
ISKU**

**Jatka elvytystä
2 minuuttia.**

**ISKUA
EI SUOSITELLA**



**Jatka elvytystä
2 minuuttia.**

Jatka, kunnes potilas alkaa herätä, eli liikkuu, avaa silmät ja hengittää normaalisti.

Hävitysohjeet

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer on uudelleen käytettävä laite. Jos sitä ylläpidetään tämän oppaan ohjeiden mukaisesti, sen takuu on voimassa kaksi vuotta valmistuspäivästä.

Jos haluat hävittää HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitteen, se on vietävä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen kansallisten, alueellisten ja paikallisten vaatimusten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voit palauttaa laitteen paikalliselle jälleenmyyjälle tai HeartSine Technologiesille hävitettäväksi.

Laitteen hävittäminen Euroopan unionin maissa:

Älä hävitä HeartSine samaritan PAD 360P Trainer -laitetta lajittelemattoman kunnallissijäteen mukana: pidä HeartSine samaritan PAD 360P Trainer erillään, jotta se käytetään uudelleen tai kierrätetään Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin 2002/96/EEC mukaisesti, tai palauta se paikalliselle jälleenmyyjällesi tai HeartSine Technologiesille hävitystä varten.

Takuun poikkeukset

HeartSine Technologiesilla tai sen valtuutetulla jälleenmyyjällä ei ole velvollisuutta huoltaa/korjata laitetta takuun piirissä, jos:

- a. Laitteeseen on tehty luvattomia muutoksia.
- b. Laitteessa on käytetty muita kuin vakio-osia.
- c. Käyttäjä ei ole käyttänyt laitetta käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti sen oikeaan tarkoitukseen.
- d. Laitteen sarjanumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi, tai sitä on käytetty väärin tai muutettu.
- e. Laitetta, elektrodeja tai akkuja on säilytetty tai käytetty ympäristöolosuhteissa, jotka eivät vastaa määrityksiä.
- f. Laitetta on testattu epäsovelmavien menetelmin tai laitteen (katso tämän oppaan Ylläpito-osa).

Kaikki takuuta koskevat vaatimukset on osoitettava jälleenmyyjälle, jolta laite alun perin ostettiin. Ennen takuukorjauksen suorittamista HeartSine Technologies vaatii ostotodistuksen. Tuotetta on käytettävä käyttöoppaan mukaisesti ja laitteen alkuperäiseen tarkoitukseen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys osoitteeseen heartsinesupport@stryker.com.



heartsine.com

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen **heartsinesupport@stryker.com** tai käy internetsivullamme **heartsine.com**.

EMEA/APAC

HeartSine Technologies, Ltd.

203 Airport Road West

Belfast, BT3 9ED

Yhdistynyt kuningaskunta

Tel: +44 28 9093 9400

Fax: +44 28 9093 9401



© 2019 HeartSine Technologies. Kaikki oikeudet pidätetään. Made in U.K.

H038-019-113-3 FI