



HeartSine

Saver EVO®



Data management Software
for samaritan® PAD & PDU

Oprogramowanie Saver EVO® do
defibrylatora samaritan® PAD i karty pamięci
PDU
Instrukcja użytkownika

Zawarte tu informacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony firmy HeartSine Technologies Inc. Nie wolno kopiować ani przekazywać żadnego fragmentu niniejszej instrukcji w jakiegokolwiek formie lub jakimikolwiek środkami, czy to elektrycznymi czy mechanicznymi, również poprzez wykonywanie fotokopii lub nagrań w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody firmy HeartSine Technologies Inc.

Prawa autorskie© 2014 HeartSine Technologies.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

„samaritan” jest znakiem towarowym firmy HeartSine Technologies Inc.

„Saver” oraz „SCOPE” są znakami towarowymi firmy HeartSine Technologies Inc.

Wszelkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Saver EVO© 2014

HeartSine Technologies Ltd.

Canberra House
203 Airport Road West
Belfast
BT3 9ED
Northern Ireland




Telefon: +44 28 9093 9400 • Fax: +44 28 9093 9401
Strona www: www.heartsine.com • E-mail: support@heartsine.com

Polish
H013-001-306-3

Saver EVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA







Oprogramowanie Saver EVO umożliwia odzyskiwanie danych o zdarzeniach z defibrylatora samaritan PAD i karty pamięci PDU. Oprogramowanie Saver EVO umożliwia również zarządzanie danymi o zdarzeniach, które zostały zapisane na komputerze PC w zakresie drukowania, importowania i eksportowania tych danych do innych użytkowników oprogramowania Saver i Saver EVO. Oprogramowanie Saver EVO posiada licencję umożliwiającą jego instalację i użytkowanie na jednym komputerze PC.

Pobierz ze strony

1. Przejdź do <http://heartsine.com/support/system-updates/> i kliknij na łącze Pobierz pod „Saver EVO Software”.
2. Po pobraniu uruchom „ SaverEVO_setup.exe”, aby zainstalować aplikację Saver EVO. (Postępuj według instrukcji na ekranie.)
3. Należy przeczytać umowę licencyjną użytkownika. Aby zainstalować oprogramowanie, należy zaakceptować warunki tej umowy, naciskając przycisk „dalej”.
4. Oprogramowanie Saver EVO zostanie zainstalowane w domyślnej lokalizacji w konfiguracji standardowej. Aby zaakceptować, należy nacisnąć przycisk „Zgadzam się”. Ustawień domyślnych nie powinny zmieniać osoby, które nie są doświadczonymi użytkownikami komputera.
5. W przypadku pojawienia się pytania o uwierzytelnienie sterownika urządzenia należy nacisnąć przycisk „Kontynuuj”.

KRÓTKA INSTRUKCJA

Aby odzyskać dane o zdarzeniu zapisane na defibrylatorze samaritan PAD lub baterii zestawu Data-Pak defibrylatora samaritan AED, lub Karcie Pamięci PDU.

1. Należy podłączyć odpowiednie urządzenie do komputera PC.
2. Należy otworzyć oprogramowanie Saver EVO.
3. Należy nacisnąć przycisk  lub .
4. Należy nacisnąć przycisk  w celu wyświetlenia listy zapisanych zdarzeń.
5. Należy zaznaczyć na liście żądane zapisane zdarzenie.
6. Należy nacisnąć przycisk , aby uzyskać widok zdarzenia.
7. Należy nacisnąć przycisk  i wpisać dane pacjenta wymagane w celu zapisania zdarzenia na komputerze PC.
8. W razie potrzeby należy nacisnąć przycisk , aby wydrukować zapis zdarzenia.

UŻYWANIE oprogramowania Saver EVO

Oprogramowania Saver EVO używa się przy pomocy intuicyjnych przycisków w nim zawartych. Poniżej przedstawiono ekran startowy oprogramowania Saver EVO.



Ekran startowy
oprogramowania
Saver EVO



defibrylator samaritan PAD – Otwiera menu umożliwiające dostęp do funkcji defibrylatora PAD. Więcej informacji na stronie 5.



Karta Pamięci PDU – Otwiera menu umożliwiające dostęp do funkcji karty pamięci PDU. Więcej informacji na stronie 12.



Zarządzaj zapisanymi zdarzeniami – Otwiera menu umożliwiające dostęp do funkcji dotyczących zdarzeń zapisanych na komputerze PC. Więcej informacji na stronie 16.



Wyjście – Wyjście z oprogramowania Saver EVO.



Zmień ustawienia oprogramowania Saver EVO – Umożliwia zmianę hasła dostępu do oprogramowania Saver EVO oraz wybranie opcji językowych. Ponadto umożliwia użytkownikowi dostęp do informacji na temat zmian w oprogramowaniu Saver EVO.

Używanie poszczególnych menu przedstawionych powyżej zostało opisane bardziej szczegółowo w następnych sekcjach.

UŻYWANIE oprogramowania Saver EVO z defibrylatorem samaritan PAD

Aby używać oprogramowania Saver EVO z defibrylatorem samaritan PAD, należy posiadać kabel do transmisji danych USB, który został dołączony do defibrylatora PAD lub oprogramowania Saver EVO.

Kabel USB należy podłączyć do defibrylatora samaritan PAD oraz do portu USB znajdującego się w komputerze PC. Należy uruchomić oprogramowanie Saver EVO.



Naciśnięcie przycisku defibrylatora Samaritan PAD spowoduje otwarcie poniższego okna.



Ekran dostępu do defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO



Dane defibrylatora PAD – Należy nacisnąć ten przycisk w celu odzyskania danych o zdarzeniu z defibrylatora PAD. Więcej informacji na stronie 6.



Zmień ustawienia defibrylatora PAD - Należy nacisnąć ten przycisk w celu uruchomienia testów diagnostycznych lub zmiany konfiguracji (głośność, język lub czas) w defibrylatorze samaritan PAD. Więcej informacji na stronie 8.



Powrót - Należy nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do ekranu startowego oprogramowania Saver EVO.

ODZYSKANIE DANYCH O ZDARZENIU Z DEFIBRYLATORA samaritan PAD

Aby odzyskać dane o zdarzeniu z defibrylatora samaritan PAD, należy upewnić się, czy defibrylator samaritan PAD jest podłączony do komputera PC, a następnie nacisnąć przycisk Dane defibrylatora



PAD. Umożliwi to przeszukanie pamięci defibrylatora PAD oraz wyświetlenie listy wszystkich zapisanych zdarzeń w sposób przedstawiony poniżej.



Ekran listy dziennika zdarzeń defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO

Zdarzenia napisane zieloną czcionką i opatrzone symbolem ✓ to zdarzenia, które już zostały zapisane na komputerze PC.



Zapisz wszystkie – Naciśnięcie przycisku Zapisz wszystkie spowoduje zapisanie wszystkich zdarzeń znajdujących się na liście dziennika zdarzeń defibrylatora PAD na komputerze PC w jednym pliku.

NB. W tej wersji oprogramowania Saver EVO zdarzeń zapisanych w ten sposób nie można odzyskać w celu przeglądania. W celu odzyskania zdarzeń z tego pliku należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy HeartSine Technologies. Aby zapisać poszczególne zdarzenia w celu ich późniejszego odtworzenia, proszę skorzystać z funkcji „Zapisz funkcji „Save” (Zapisz) w części PRZEGLĄDANIE ZDARZEŃ NA DEFIBRYLATORZE samaritan PAD opisanej na stronie 7.



Widok – Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie wybranych zdarzeń.



Usuń – Naciśnięcie tego przycisku spowoduje usunięcie wszystkich zdarzeń z dziennika zdarzeń defibrylatora PAD. Więcej szczegółowych informacji na temat usuwania danych na stronie 8.




Powrót – Należy nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do ekranu dostępu do defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO.

PRZEGLĄDANIE ZDARZEŃ NA DEFIBRYLATORZE samaritan PAD

Aby uzyskać widok zdarzenia, należy zaznaczyć je na liście, a następnie nacisnąć przycisk Widok



Spowoduje to wyświetlenie w osobnym oknie widoku zdarzenia wraz z wykresem EKG oraz dziennik zdarzeń.

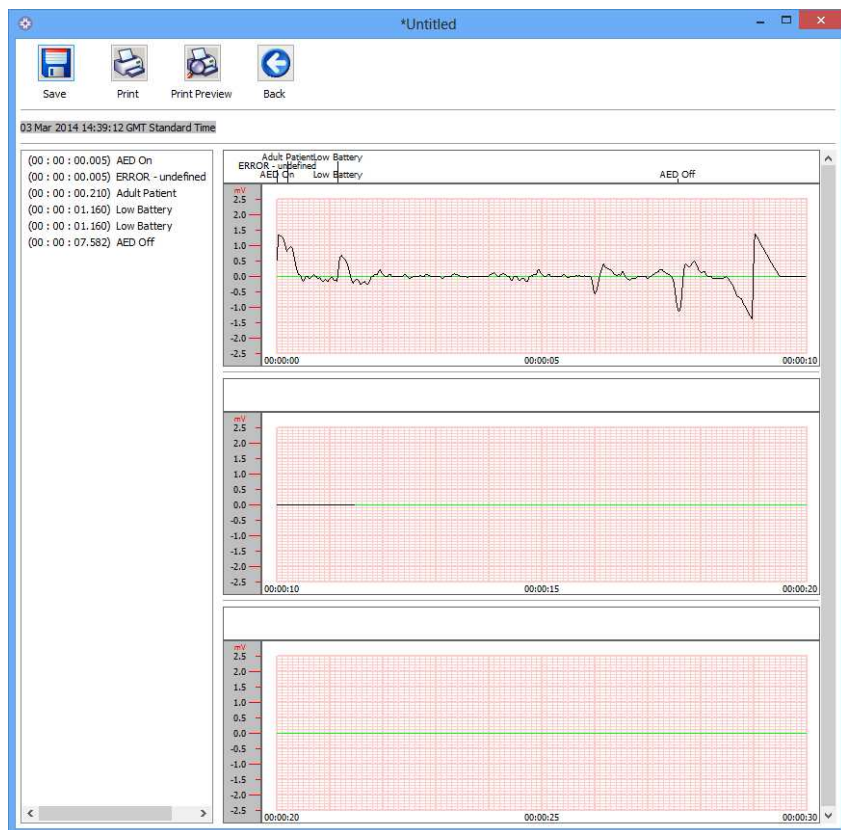

Okno widoku zdarzeń defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO

Teraz można zapisać



wyświetlane zdarzenie na komputerze PC, naciskając przycisk Zapisz. Zdarzenia zapisane w ten sposób można odzyskiwać i przeglądać w oprogramowaniu Saver EVO. Daje to możliwość wpisania informacji w celu zidentyfikowania pacjenta na liście zdarzeń zapisanych na komputerze PC. Dane pacjenta mogą składać się ze znaków alfanumerycznych, a w miarę potrzeby każde pole można wypełnić lub pozostawić puste.

Okno danych pacjenta defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO

NB. Po zapisaniu danych o zdarzeniu na komputerze PC, informacji tych nie można zmieniać.

W oknie widoku zdarzeń oprogramowania Saver EVO znajdują się również następujące przyciski:



Drukuj zdarzenie – Należy nacisnąć ten przycisk w celu wydrukowania zdarzenia aktualnie wyświetlanego w oknie widoku.



Podgląd wydruku – Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie podglądu drukowanych danych wyświetlonych na ekranie.



Powrót – Należy nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do ekranu dziennika zdarzeń defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO.

KASOWANIE PAMIĘCI DEFIBRYLATORA samaritan PAD



Aby skasować pamięć defibrylatora samaritan PAD, należy nacisnąć przycisk Usuń

Dla bezpieczeństwa przed skasowaniem pamięci oprogramowanie Saver EVO wyświetli żądanie wpisania Hasła. Po wpisaniu poprawnego hasła pamięć defibrylatora samaritan PAD skasowana usunięta. Informacje o zmianie domyślnego hasła można znaleźć w części ZMIANA HASŁA I JĘZYK OPROGRAMOWANIA Saver EVO na stronie 18.

Uwaga: Firma HeartSine zaleca pobranie pełnej pamięci defibrylatora PAD przed jej skasowaniem. Tę informację należy zachować na przyszłość.

Po odzyskaniu danych z defibrylatora samaritan PAD i zapisaniu ich na komputer PC zaleca się usunięcie zdarzeń z pamięci defibrylatora PAD. Dzięki temu dostępna będzie cała pamięć w celu zapisania danych z innego zdarzenia.

ZMIANA USTAWIEŃ DEFIBRYLATORA samaritan PAD



Przycisk Zmień ustawienia defibrylatora PAD pozwala użytkownikom konfigurować niektóre z następujących funkcji defibrylatora samaritan PAD:

- Sprawdź/Ustaw czas
- Uruchom testy diagnostyczne

Dodatkowo użytkownicy posiadający stosowne uprawnienia mogą zmieniać następujące elementy:

- Poziom głośności
- Język
- Włączanie dźwięków taktomierza



Naciśnięcie przycisku Zmień ustawienia defibrylatora PAD spowoduje uzyskanie dostępu do poniższego ekranu (patrz następna strona):



Okno zmiany ustawień defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO



Sprawdź/Ustaw czas defibrylatora PAD – Ten przycisk pozwala użytkownikom zsynchronizować czas na defibrylatorze samaritan PAD z czasem na komputerze PC.



Okno Sprawdz/Ustaw czas defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO

Naciśnięcie przycisku Synchronizuj ustawi czas na defibrylatorze samaritan PAD zgodnie z czasem na komputerze PC, do którego jest on podłączony.

Należy nacisnąć przycisk Zamknij, aby powrócić do Okna zmiany ustawień defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO.



Uruchom testy diagnostyczne – Przycisk ten pozwala użytkownikowi uruchomić niektóre podstawowe testy w celu sprawdzenia, czy defibrylator samaritan PAD działa poprawnie. Dostęp do listy dostępnych testów diagnostycznych można uzyskać w „rozwijanym” menu w oknie, które otwiera się po naciśnięciu tego przycisku, co przedstawiono poniżej.



Okno testów diagnostycznych defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO




Edytuj konfigurację defibrylatora PAD – Przycisk umożliwia użytkownikom przeglądanie aktualnych ustawień głośności, języka i metronomu podłączonego urządzenia PAD, a także o wersji zainstalowanego w nim oprogramowania. Okna PAD Configuration (pokazanego poniżej) można używać do zmiany poziomu głośności, wybranego języka oraz włączania lub wyłączenia dźwięku metronomu. Zmiany te można potwierdzić jedynie poprzez wprowadzenie na żądanie wymaganego hasła. Informacje o zmianie domyślnego hasła można znaleźć w części ZMIANA HASŁA I JĘZYK OPROGRAMOWANIA Saver EVO na stronie 18.



Okno edycji konfiguracji defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO

Opcje języków dostępne są w rozwijanym menu (wybór języków może być ograniczony do języków zaprogramowanych w urządzeniu lub kraju, w którym zakupiono urządzenie).

Po zmianie języka proszę sprawdzić, czy wyświetla się okno potwierdzenia, jak pokazano poniżej. Jeśli po zakończeniu programowania nie wyświetli się ten komunikat, proszę skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy HeartSine lub bezpośrednio z HeartSine.

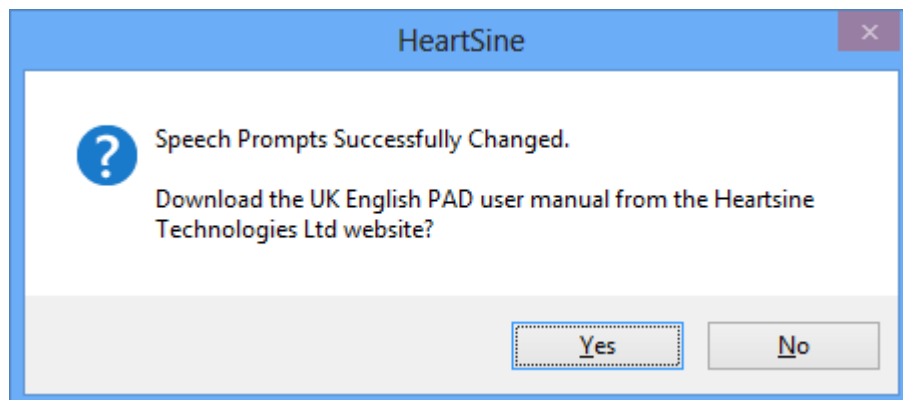

Proszę również sprawdzić, czy w urządzeniu PAD ustawiono odpowiedni język, włączając urządzenie i wysłuchując pierwszego komunikatu.

- Dorosły/dziecko
- Wezwij pomoc medyczną

Po upewnieniu się, że w urządzeniu zainstalowano właściwy język, urządzenie można wyłączyć.

UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA Saver EVO Z KARTĄ PAMIĘCI PDU

Aby używać oprogramowania Saver EVO z kartą pamięci samaritan PDU, należy włożyć kartę do czytnika kart MMC/SD, który jest albo podłączony, albo wbudowany do komputera PC, na którym działa oprogramowanie Saver EVO. Należy zauważyć, że odnalezienie przez system operacyjny komputera karty włożonej do czytnika może potrwać kilka sekund lub nawet minutę.



Należy nacisnąć przycisk karty pamięci PDU. Spowoduje to otwarcie poniższego okna podmenu.



Dane Karty pamięci PDU – Należy nacisnąć ten przycisk w celu odzyskania danych o zdarzeniu z Karty pamięci PDU. Więcej informacji na stronie 13.



Ustawienia Karty pamięci PDU - Należy nacisnąć ten przycisk w celu uzyskania widoku ustawień konfiguracyjnych zestawu Data-Pak defibrylatora samaritan PDU. Więcej informacji na stronie 15.



Powrót – Należy nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do ekranu startowego oprogramowania Saver EVO.

ODZYSKIWANIE DANYCH O ZDARZENIU Z KARTY PAMIĘCI PDU

Należy upewnić się, że karta pamięci samaritan PDU jest włożona do czytnika kart SD/MMC i



nacisnąć przycisk Dane karty pamięci PDU. Spowoduje to wyświetlenie listy zdarzeń zapisanych na karcie pamięci.



Ekran listy dziennika zdarzeń karty pamięci PDU oprogramowania Saver EVO

Zdarzenia opatrzone symbolem zegara to autotesty karty pamięci PDU, które zostały zakończone pomyślnie.

Zdarzenia napisane zieloną czcionką i opatrzone symbolem ✓ to zdarzenia już zapisane na komputerze PC.



Zapisz wszystkie – Przycisk ten jest nieaktywny w trybie karty pamięci PDU.



Widok – Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie wybranych zdarzeń. Więcej informacji na stronie 14.




Usuń – Przycisk ten jest nieaktywny w trybie karty pamięci PDU.




Powrót – Należy nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do ekranu dostępu do karty pamięci PDU oprogramowania Saver EVO.

PRZEGLĄDANIE ZDARZEŃ ZAPISANYCH NA KARCIE PAMIĘCI PDU

Aby uzyskać dostęp do widoku zdarzenia, należy podświetlić je na liście, a następnie nacisnąć

przycisk Widok .

Spowoduje to wyświetlenie w osobnym oknie widoku zdarzenia wraz z wykresem EKG oraz dziennikiem zdarzeń:

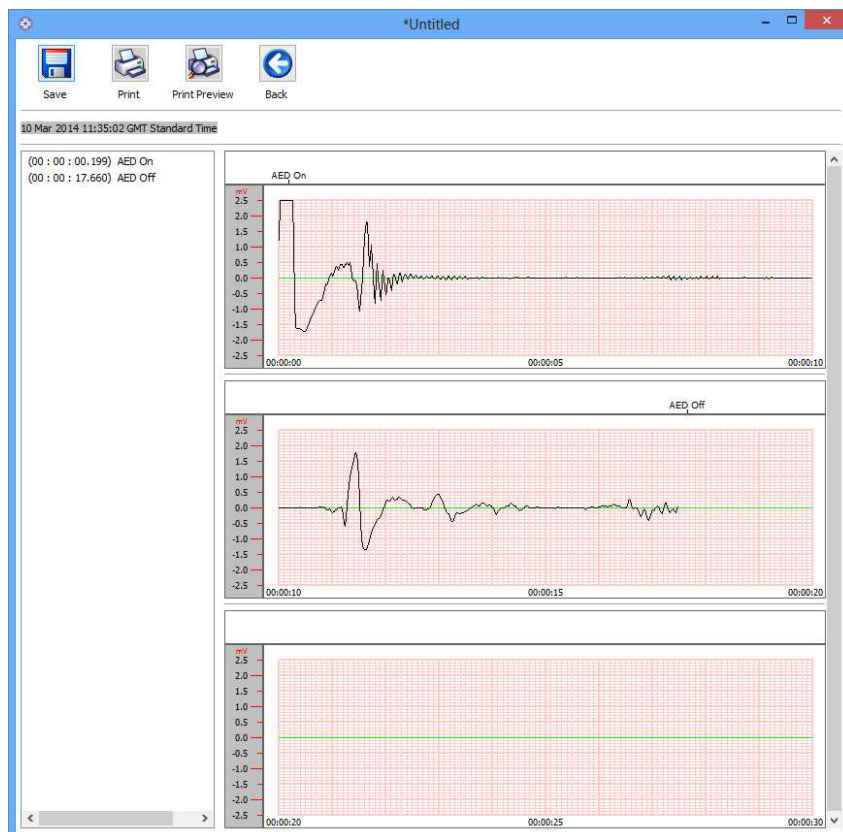

Okno widoku zdarzeń karty pamięci PDU oprogramowania Saver EVO

Użytkownik może teraz zapisać wyświetlane zdarzenie na komputerze PC, naciskając przycisk Zapisz



. Daje to możliwość wpisania informacji w celu zidentyfikowania pacjenta. Dane pacjenta mogą składać się ze znaków alfanumerycznych, a w miarę potrzeby każde pole można wypełnić lub pozostawić puste.

Okno danych pacjenta karty PDU oprogramowania Saver EVO

NB. Po zapisaniu zdarzenia na komputerze PC informacji tych nie można modyfikować.

W oknie zdarzenia oprogramowania Saver EVO znajdują się również następujące przyciski:



Drukuj zdarzenie – Należy nacisnąć ten przycisk w celu wydrukowania zdarzenia aktualnie wyświetlanego w oknie widoku.



Podgląd wydruku – Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie podglądu wydruku danych wyświetlanych na ekranie.




Powrót – Należy nacisnąć ten przycisk, aby powrócić do ekranu dziennika zdarzeń defibrylatora PAD oprogramowania Saver EVO.

PRZEGLĄDANIE USTAWIEŃ KARTY PAMIĘCI PDU.



Naciśnięcie przycisku Widok ustawień umożliwi uzyskanie dostępu do ekranu Konfiguracji karty pamięci PDU. Ekran ten pozwala użytkownikowi uzyskać dostęp do widoku ustawień mocy baterii, natężenia dźwięku głośnika, języka i taktometru, częstotliwości ucisków przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz czasu trwania i terminu ważności, wersji oprogramowania i numeru seryjnego urządzenia PDU. Użytkownik może jedynie przeglądać te ustawienia i nie może ich zmieniać.

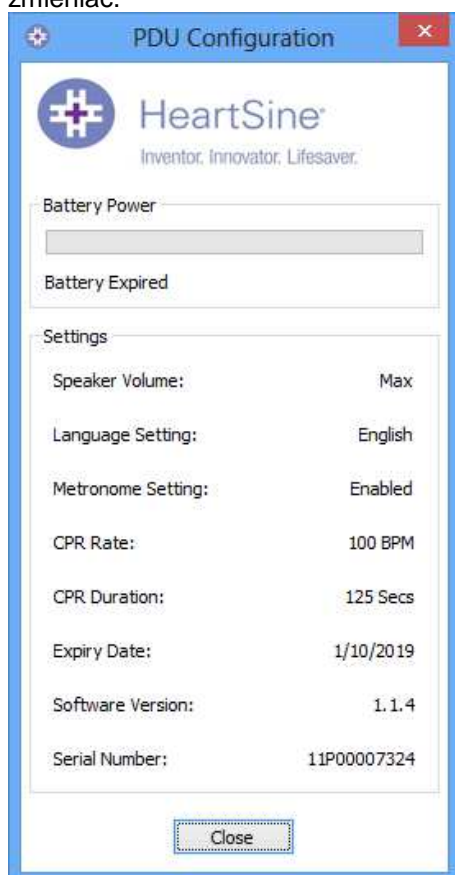

Okno widoku ustawień karty PDU oprogramowania Saver EVO

UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA Saver EVO W ODNIESIENIU DO ZAPISANYCH ZDARZEŃ



Przycisk Zarządzaj zapisanymi zdarzeniami znajdujący się na ekranie głównym oprogramowania Saver EVO pozwala użytkownikom kontrolować dane o zdarzeniach pobranych z defibrylatora samaritan PAD, baterii zestawu samaritan Data-Pak lub karty pamięci PDU oraz zapisanych na komputerze.

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie poniższego okna:



Podświetlenie zdarzenia na liście i naciśnięcie przycisku Widok spowoduje otwarcie zapisanego zdarzenia w celu uzyskania widoku danych EKG i dziennika zdarzeń.

Eksport i Import

Oprogramowanie Saver EVO jest wyposażone w funkcje umożliwiające użytkownikom przesyłanie lub odbieranie danych o zdarzeniach do lub od innych osób, które używają oprogramowania Saver EVO. Aby przesłać lub odebrać kopie zapisanych zdarzeń, należy skorzystać z funkcji Eksportuj i Importuj oprogramowania Saver EVO.

Aby dokonać Eksportu zdarzeń.

1. Na ekranie Zarządzaj zapisanymi zdarzeniami należy podświetlić zdarzenie lub kilka zdarzeń,



- które mają zostać wyeksportowane, a następnie nacisnąć przycisk
2. Komputer zapyta o lokalizację, w której eksportowany plik ma zostać zapisany, a także pozwoli wybrać nazwę tego pliku.
3. Należy nacisnąć przycisk Zapisz, aby zapisać plik w wybranej lokalizacji.

Następnie będzie można dołączyć eksportowany plik do wiadomości e-mail w standardowym programie poczty elektronicznej i przesłać go innemu użytkownikowi, który posiada oprogramowanie Saver EVO.

Dane o zdarzeniu z oprogramowania Saver EVO może przeglądać wyłącznie inny użytkownik oprogramowania Saver EVO. Poprzednia wersja oprogramowania Saver nie umożliwia skutecznego importu i wyświetlenia danych z oprogramowania Saver EVO

Aby Importować zdarzenia

Aby importować zdarzenia i przeglądać je na komputerze PC, plik, który został przesłany przez innego użytkownika oprogramowania Saver lub Saver EVO, musi zostać zapisany w wybranej lokalizacji na komputerze PC.

1. Na ekranie Zarządzaj zapisanymi zdarzeniami oprogramowania Saver EVO należy nacisnąć



przycisk

2. Należy odnaleźć lokalizację, w której plik został zapisany i nacisnąć przycisk Otwórz.
3. Rekordy zostaną dodane do listy plików oprogramowania Saver EVO na komputerze.

Można je następnie przeglądać, podświetlając zdarzenie na liście i naciskając przycisk Widok.

Oprogramowanie Saver EVO poprawnie zaimportuje i wyświetli dane o zdarzeniu, które zostały wyeksportowane przy użyciu poprzedniej wersji oprogramowania o nazwie Saver.

Aby usunąć zapisane zdarzenia

Zapisane zdarzenia można usunąć z pamięci komputera przy pomocy oprogramowania Saver EVO. Zdarzenia są usuwane pojedynczo poprzez wybranie zdarzenia/zdarzeń do usunięcia (można wybrać kilka zdarzeń) i podświetlenie wybranego zdarzenia.



Po potwierdzeniu zdarzeń przeznaczonych do usunięcia należy nacisnąć przycisk Usuń . Dla bezpieczeństwa przed usunięciem pamięci oprogramowanie Saver EVO wyświetli żądanie wpisania Hasła. Po wpisaniu poprawnego hasła wybrane zdarzenia zostaną usunięte z komputera.


Uwaga: Przed usunięciem należy upewnić się, że wybrane zostały wyłącznie zdarzenia przeznaczone do usunięcia. Po usunięciu zdarzeń z pamięci komputera nie będzie można ich odtworzyć, a wszelkie informacje zostaną utracone.


ZMIANA HASŁA I JĘZYK OPROGRAMOWANIA Saver EVO

Oprogramowanie Saver EVO jest wyposażone w funkcje, które można zmienić lub uzupełnić wyłącznie po wpisaniu hasła. Pozwala to administratorom oprogramowania ograniczać dostęp do określonych możliwości tylko do upoważnionych użytkowników. Oprogramowanie Saver EVO jest oryginalnie wyposażone w hasło „default” („domyślne”).

Aby zmienić to hasło na własne, należy wykonać następujące czynności:



Na powyższym ekranie głównym oprogramowania Saver EVO należy nacisnąć mały przycisk . Spowoduje to otwarcie poniższego okna.

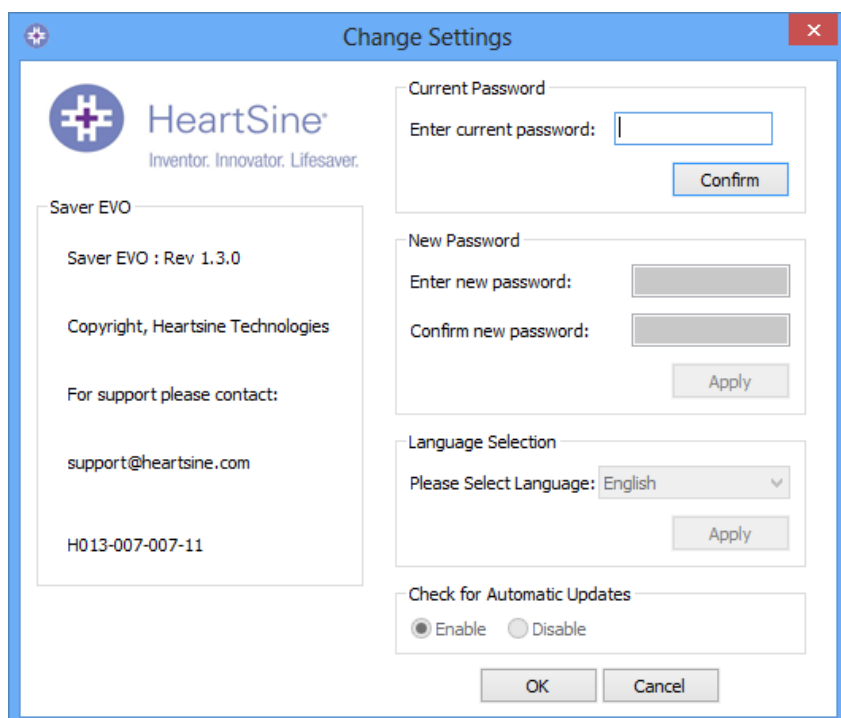


Wprowadź hasło i kliknij "Potwierdź" (Confirm). Pozwoli to wprowadzić i potwierdzić nowe hasło. Aby dokonać zmiany, należy kliknąć przycisk "Zastosuj" (Apply). Zostanie wyświetlone potwierdzenie zmiany hasła. Należy potwierdzić klikając przycisk OK, a następnie ponownie kliknąć "OK" w oknie zmiany hasła (Change Password), aby zakończyć tę funkcję.


Należy pamiętać, że ponowne zainstalowanie aplikacji Saver EVO spowoduje ponowne ustawienie hasła jako domyślnego w tym programie. Nie spowoduje to jednak usunięcia danych dotyczących zdarzeń, które zostały wcześniej zapisane.

Wybór języka

Aby wybrać język oprogramowania Saver EVO, należy wybrać język z listy rozwijanej i nacisnąć przycisk „Zastosuj”.

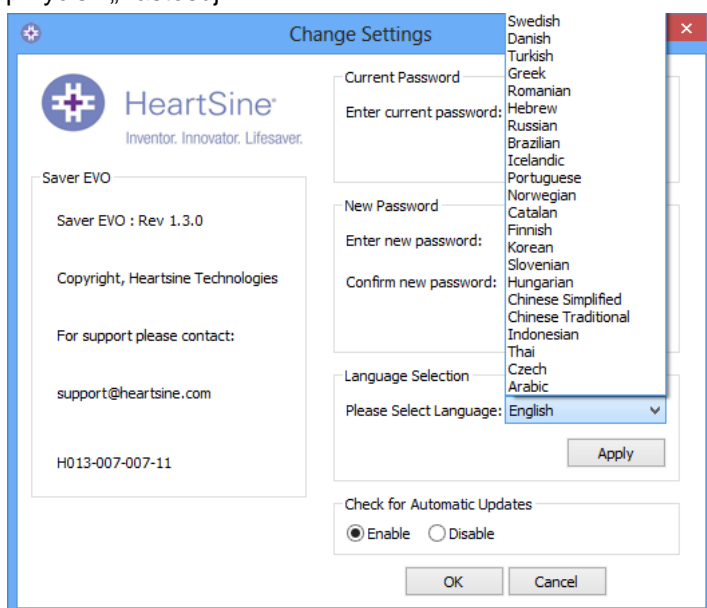

Po naciśnięciu przycisku „Zastosuj” pojawi się następujący ekran, po czym należy ponownie uruchomić oprogramowanie Saver EVO w celu wprowadzenia zmian.

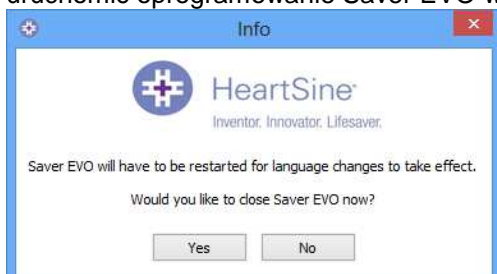

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje automatyczne

Jeśli pole wyboru "Włącz" (Enable) jest zaznaczone, wówczas po każdym uruchomieniu aplikacji Saver EVO nastąpi próba połączenia ze stroną internetową Heartsine celu sprawdzenia, czy dostępne są nowsze wersje aplikacji Saver EVO. Jeśli aktualizacja jest dostępna, po uruchomieniu aplikacji Saver EVO zostanie wyświetlone następujące okno.



Jeżeli użytkownik chce pobrać nowszą wersję aplikacji Saver EVO, należy wybrać odpowiednio Tak (Yes) lub Nie (No).