



samaritan® JULKISEN PÄÄSYN
KAMMIOVÄRINÄN POISTAJA ja
HENKILÖKOHTAINEN KAMMIOVÄRINÄN
POISTAJA YKSIKKÖ
Tallentaja™ EVO Käyttöohjeet

Tässä asiakirjassa annetut tiedot voivat muuttua ilman ennakkotiedotusta ja asiakirja ei ole sitova HeartSine Technologies Inc.:in puolesta. Mitään osaa tästä käsikirjasta ei saa julkaista uudelleen tai lähettää radion tai tv:n välityksellä missään muodossa, sähköisessä eikä koneellisessa, mukaanlukien valokopiointi ja tallennus muhina tahansa tarkoituksiin ilman tarkkaa kirjallista lupaa HeartSine Technologies Inc.:in puolesta.

Copyright© 2008 HeartSine Technologies Inc.
Kaikki oikeudet pidätetty.

“samaritan” on of HeartSine Technologies Inc rekisteröity kauppanimi.

“Tallentaja” ja “SCOPE” ovat HeartSine Technologies Inc rekisteröityjä kauppanimiä.

Kaikki muut kauppanimet ja rekisteröidyt kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Tallentaja™ EVO Joulukuu 2008

HeartSine Technologies Ltd.

Canberra House
203 Airport Road West
Belfast
BT3 9ED
Northern Ireland



Puhelin: +44 28 9093 9400 • Faksi: +44 28 9093 9401
Verkkosivut: www.heartsine.com • S-posti: support@heartsine.com

**Finnish
H013-001-313-1**

Tallentaja™ EVO KÄYTTÖOHJEET

Tallentaja™ EVO ohjelma sallii sinun noutaa kammiovärinän poiston tapahtuma tietoja samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan ja Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön Muistikortista. Tallentaja™ EVO tulee sallimaan myös sellaisten tapahtumatietojen hallinnon jotka on tallennettu tietokoneelle tulostusta varten, tietojen tuomisen ja viemisen muille Tallentaja™ ja Tallentaja™ EVO käyttäjille.

Tallentaja™ EVO on varustettu ohjelma-lisenssillä ohjelman asennusta ja käytön sallimista PC:llä varten.

CD-ROM:issa on asennusohjeet mukana ja ne on kopioitu tähän mukavuuden vuoksi.

Tallentaja EVO Asennusohjeet

1. Laita CD sen tietokoneen CD ROM-asemaan jolle se on tarkoitus asentaa.
2. CD alkaa pyörittää automaattisesti asennusohjelmaa. (Jos tietokoneesi ei juoksuta automaattisesti asennusohjelmaa niin selaa CD ROM :iin ja tuplaklikkaa '  ' ikonia).
3. Lue käyttölisenssisuostumus. Asentaaksesi ohjelmiston sinun pitää hyväksyä suostumuksen ehdot. Hyväksyäksesi ehdot klikkaa "seuraava" painiketta.
4. Tallentaja™ EVO asennetaan oletusasemaansa standardikokoonpanollaan. Klikkaa "Hyväksyn" painiketta hyväksyäksesi. Näitä oletusasetuksia ei pitäisi muuttaa ellet ole kokemut tietokonekäyttäjä.
5. Jos kysytään laiteajurivarmennuksesta klikkaa "Jatka joka tapauksessa" painiketta.
6. Ohjelmistoasennus on nyt suoritettu. Kun se on suoritettu niin poista CD CD ROM-asemasta ja säilytä se.

NOPEAT OHJEET

Noutaaksesi tallennettuja kammiovärinänpoisto tapahtumatietoja samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajasta tai samaritan® Automaattisen Ulkoisen Kammiovärinän Poistaja Data-Pak™ akusta tai PDU Muistikortista.

1. Yhdistä kyseessä oleva laite tietokoneeseen.
2. Avaa Tallentaja™ EVO ohjelmisto.
3. Klikkaa  painiketta tai  painiketta.
4. Klikkaa  painiketta näyttääksesi listan tallennetuista tapahtumista.
5. Korosta vaadittua tallennettua tapahtumaa listasta.
6. Klikkaa  painiketta katselleksasi tapahtumaa.
7. Klikkaa  painiketta ja syötä potilastiedot kuten vaaditaan tallentaaksesi tapahtuman koneelle.
8. Jos vaaditaan, klikkaa  tulostaaksesi tallennetun tapahtuman.

Saver™ EVO:n KÄYTTÖ

Saver™ EVO:n käyttö tapahtuu intuitiivisten painikkeiden kautta ohjelmistossa. Tallentaja Saver™ EVO

Aloitusikkuna näytetään tässä.



Tallentaja™ EVO aloitus ikkuna



samaritan Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja– Avaa valikon Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan erityistoimintoja varten. Katso sivu 5 yksityiskohtia varten.



PDU – Avaa valikon PDU. :n erityistoimintoja varten Katso Sivua 16 yksityiskohtia varten.



Hallitse tallennettuja tapahtumia – Avaa valikon koneelle tallennettujen tapahtumien erityistoimintoja varten.
Katso sivu 20 yksityiskohtia varten.



Poistu Tallentajasta – Poistuu Tallentaja™ EVO ohjelmistosta.



Muuta Tallentaja™ EVO Asetuksia – Muuta Tallentaja™ EVO salasana ja valitse kielivaihtoehto. Sallii myös käyttäjän katsella Tallentaja™ EVO muutostietoja.

Ylläolevien erityisvalikkojen käyttöä käsitellään yksityiskohtaisemmin myöhemmissä osissa.

Tallentaja™ EVO:n KÄYTTÖ samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan kanssa

Käyttääksesi Tallentaja™ EVO yhdessä samaritan® PAD:in kanssa tarvitset USB tietokaapelin joka tuli Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan tai Tallentaja™ EVO-ohjelmiston mukana.

Käyttääksesi USB-tietokaapelia liitä tämä samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajaan ja USB porttiin koneellasi. Avaa Tallentaja™ EVO ohjelma.



Klikkaamalla Samaritan Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja painiketta avautuu allaoleva ikkuna.



Tallentaja™ EVO
Julkisen Pääsyn Kammiovärinän
Poistaja pääsyikkuna



Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja Tiedot – Klikkaa tätä painiketta noutaaksesi tapahtumatietoja Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajasta . Katso Sivu 6 yksityiskohtia varten.



Muuta PAD Asetuksia – Klikkaa tätä painiketta juoksuttaaksesi diagnostisia testejä tai muuttaaksesi kokoonpanoa (volyymi, kieli tai aika) samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajalla. Katso sivu 8 yksityiskohtia varten.




Takaisin - Klikkaa tätä painiketta palataksesi Tallentaja™ EVO aloitusikkunaan.

TAPAHTUMATIETOJEN NOUTO samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajasta

Noutaaksesi kammiovärinänpoisto tapahtumatietoja samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajasta varmista että samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajasi on yhdistetty



koneeseen ja sitten klikkaa Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja Tiedot-painiketta. Tämä hakee kaikki tallennetut tapahtumat Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan muistista ja luetteloi ne kuten alla näytetään.

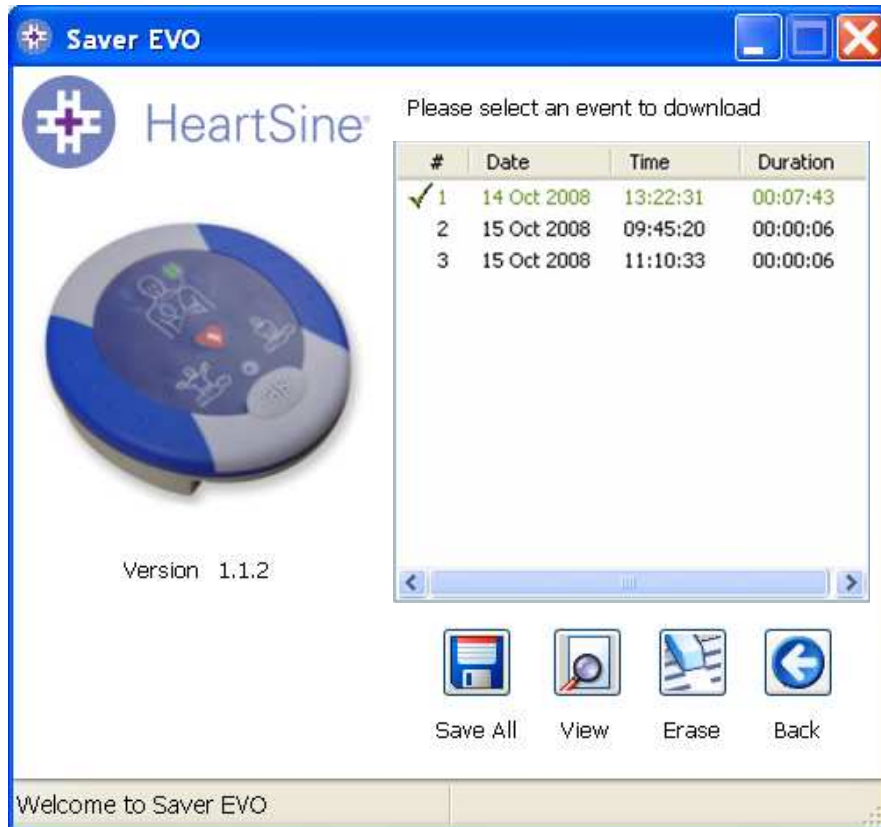

Tallentaja™ EVO
Julkisen Pääsyn
Kammiovärinän
Poistaja
tapahtumakirjausluet-
teloikkuna

Vihreällä tekstillä näytetyt tapahtumat ✓ symbolilla ovat tapahtumia jotka on jo tallennettu koneelle.



Tallenna Kaikki - Klikkaamalla Tallenna Kaikki-painiketta tallennat kaikki Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja -tapahtumalokikirjassa luetteloidut tapahtumat koneelle yhdessä tiedostossa. *Huom. Tällä metodilla tallennetuja tapahtumia ei voida noutaa katseltaviksi tällä Tallentaja™ EVO-versiolla. Tästä tiedostosta haettua tietoa varten, ota yhteyttä HeartSine Technologies asiakastukeent.*



Katsele – Klikkaamalla tätä painiketta saat valitut tapahtumat näyttöön.



Pyyhi – Klikkaamalla tätä painiketta pyyhki kaikki tapahtumat Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja tapahtumalokikirjasta. Katso sivu 8 yksityiskohtaisempia tietoja tietojen pyyhkimisestä varten.



Takaisin – Klikkaa tätä painiketta palataksesi Tallentaja™ EVO Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja pääsynäyttöön.

TAPAHTUMIEN KATSELU samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajalla

Katsellaksesi tapahtumaa, korosta tätä tapahtumaa luettelossa ja sitten klikkaa Katsele painiketta



Tämä näyttää kammiovärinänpoisto tapahtuman EKG jäljellä ja tapahtumalokikirjan yhden katselukerran ikkunassa



Tallentaja™ EVO
Julkisen Pääsyn
Kammiovärinän Poistaja
tapahtumienkatseluikkuna



Voit nyt valita tämän tapahtuman näytön koneella klikkaamalla Tallenna-painiketta. Tällä tavalla tallennetut tapahtumat voidaan hakea ja katsella Tallentaja™ EVO:ssa. Tämä tarjoaa vaihtoehtoja tietojen syöttöön voidaksesi tunnistaa potilaan koneelle tallennettujen tapahtumien luettelosta. Yksityiskohtaiset tiedot potilaasta voivat muodostua kirjain- tai numeromerkeistä ja jokainen kenttä voidaan täyttää tai jättää tyhjäksi jos niin vaaditaan.

Tallentaja™ EVO
Julkisen Pääsyn
Kammiovärinän Poistaja
Potilasyksityiskohtaisten
tietojen ikkuna

HUOM. Kun kammiovärinänpoisto tapahtumatiedot on tallennettu koneellesi niin näitä tietoja ei voida muuttaa.

Tallentaja™ EVO tapahtumien katselu ikkuna on varustettu myös seuraavilla painikkeilla:



Tulosta tapahtuma – Klikkaa tätä painiketta tulostaaksesi tapahtuman joka näkyy tällä hetkellä katseluikkunassa.



Tulosta Esikatselu – Klikkaamalla tätä painiketta saat tulostettavien tietojen esikatselun näyttöön ikkunaan.



Takaisin - Klikkaa tätä painiketta palataksesi Tallentaja™ EVO Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja tapahtumalokiluetteloikkunaan.

MUISTIN PYYHKIMINEN samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajalla

Pyyhiäksesi samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan muistin klikkaa Pyyhi-painiketta



Varotoimenpiteenä Tallentaja™ EVO pyytää sinua syöttämään Salasanasi ennen muistin pyyhkimistä. Kun oikea salasana on syötetty niin samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan muisti pyyhkiytyy.

Varoitus HeartSine suosittelee että lataat koko Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan-muistin ennen kuin pyyhit sen. Nämä tiedot tulisi pitää turvassa tulevaa viittausta varten.

Suositellaan että kun tapahtumatietoja noudetaan samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajasta ja tallennetaan että tapahtumat pyyhitään Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan muistista. Tämä vahvistaa sen että koko muisti on saatavilla tietojen tallennukseksi toisesta kammiovärinänpoisto tapahtumasta.

samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan ASETUSTEN MUUTTAMINEN



Muuta Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja asetuksia painike sallii käyttäjien joidenkin ominaisuuksien kokoonpanon samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajalla seuraavasti;

- Tarkista/Aseta aika
- Juoksuta diagnostisia testejä

Lisäksi käyttäjät joilla on asiaankuuluva valtuus voivat muuttaa seuraavia;

- Volyyymi
- Kieli
- Metronomi ääni päälle/pois




Klikkaamalla Muuta Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja asetuksia-painiketta pääset seuraavaan ikkunaan (katso seuraava sivu):



Tallentaja™ EVO
Muuta Julkisen Pääsyn Kammiovärinän
Poistaja Asetuksia-ikkuna



Tarkista/Aseta Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja aika – Tämä painike antaa käyttäjien synkronisoida ajan samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajalla koneensa ajan kanssa.

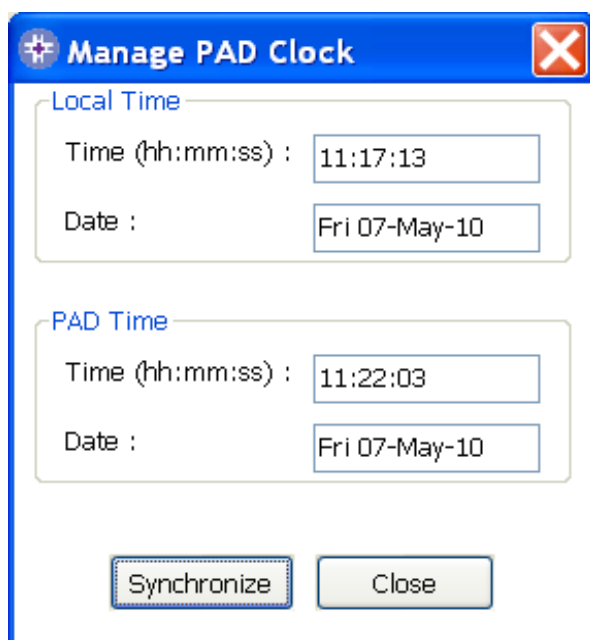

Tallentaja™ EVO
Tarkista/Aseta Julkisen Pääsyn
Kammiovärinän Poistaja aika-ikkuna

Klikkaamalla Synkronisoi-painiketta asetet ajan samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajalla samaan aikaan kuin koneella johon ohjelma on liitetty.

Klikkaa Sulje-painiketta palataaksesi Tallentaja™ EVO Muutos Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja Asetusikkunaan.




Juoksuta Diagnostisia Testejä – Tämä painike antaa käyttäjän juoksuttaa joitakin peruskokeita heidän samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan olemisen toiminnassa tarkistamiseksi. Saatavilla olevien diagnostisten testien luetteloon pääsee “pudotus” valikosta ikkunassa joka avautuu tästä painikkeesta kuten alla näkyy.



Tallentaja™ EVO
Julkisen Pääsyn Kammiovärinän
Poistaja Diagnostisten testien ikkuna



Muokkaa Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja Kokoonpanoja – Tämä painike antaa käyttäjien muuttaa volyymiä, kieltä ja metronomi-äänien laittamista päälle tai pois päältä. Nämä muutokset voidaan vahvista ainoastaan syöttämällä vaadittu salasana pyydettäessä. Allaoleva ikkuna näyttää nämä vaihtoehdot. Kielivalinta rajoittuu niihin jotka on ohjelmoitu laitteeseen ja joihin pääsee pudotusvalikosta. Tämä ikkuna näyttää myös Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajan ohjelmisto-version.

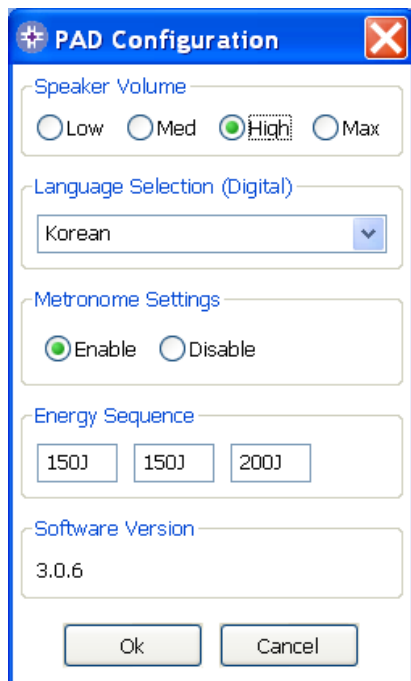

PAD-laitteissa kielenvalinnan pudotusvalikossa on luettelo nykyisin käytettävistä kielistä, jotka on mahdollista ohjelmoida laitteeseen.


Tallentaja™ EVO
Muokkaa Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja
Kokoonpanoikkunaa

Tallentaja™ EVO:N KÄYTTÖ Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön KANSSA

Käytä soveltuvaa kortinlukijaa joka on liitetty tai sisäänrakennettu koneeseen joka juoksuttaa Tallentaja™ EVO-ohjelmaa. Huomioi että voi kestää muutaman sekunnin , tai jopa yli minuutin koneesi toimintajärjestelmän kortinlukijassa olevan kortin tunnistamiseksi.



Klikkaa PDU painiketta. Tämä avaa alapuolella olevan alivalikon.

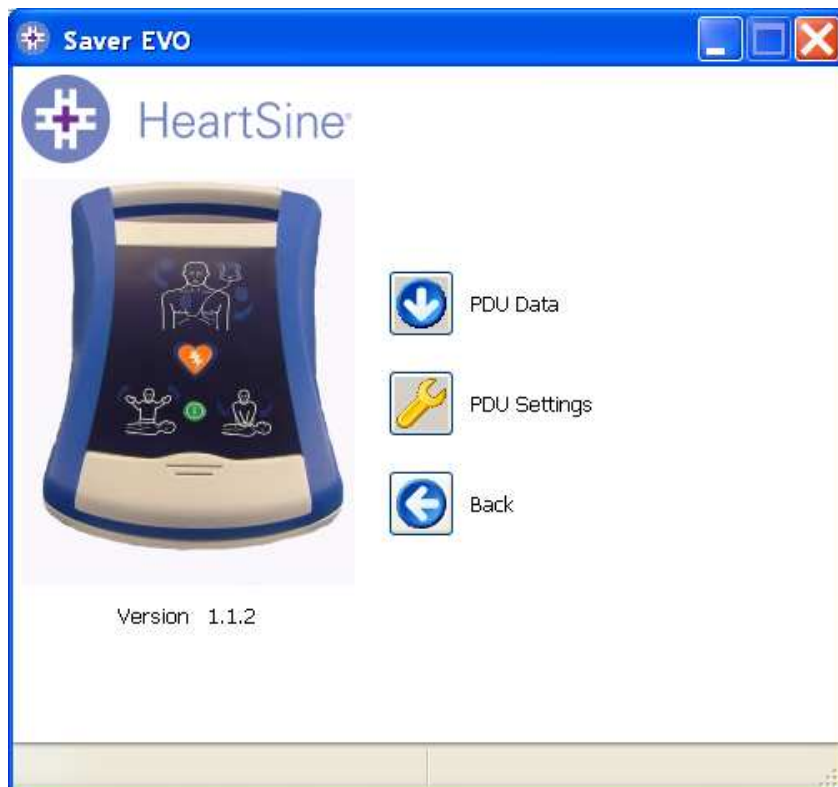

PDU Tiedot – Klikkaa tätä painiketta noutaaksesi tapahtumatietoja Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön Muistikortista. Katso sivu 17 yksityiskohtia varten.



Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön Asetukset – Klikkaa tätä painiketta katsellaksesi kokoonpanoasetuksia samaritan® Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön Data-Pak:issa™. Katso sivu 19 yksityiskohtia varten .



Takaisin - Klikkaa tätä painiketta palataksesi Tallentaja™ EVO -aloitusikkunaan.

TAPAHTUMATIEDOJEN NOUTO Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön™ MUISTIKORTISTA

Varmista että samaritan® Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön muistikortti on laitettu



SD/MMC kortinlukijaan ja klikkaa Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön Tiedot-painiketta. Tämä luetteloi tapahtumat jotka on tallennettu Muistikortille.



Tallentaja™ EVO
Henkilökohtaisen
Kammiovärinän
Poistoyksikön
tapahtumalokiluetteloikkuna

Tapahtumat joissa kello symboli 🕒 ovat Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön itse tehtäviä kokeita jotka on suoritettu menestyksekkäästi.

Vihreällä tekstillä näytetyt tapahtumat joissa on ✓ symboli ovat tapahtumia jotka on jo tallennettu koneelle.



Tallenna Kaikki – Tämä painike on deaktivoitu Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön toimintamallissa.



Katsele – Klikkaamalla tätä painiketta saat valitun tapahtuman näyttöön. Katso sivu 18 yksityiskohtia varten.



Pyyhi – Tämä painike on deaktivoitu Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön Toimintamallissa




Takaisin - Klikkaa tätä painiketta palataksesi Tallentaja™ EVO Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön pääsyikkunaan.

PDU:LLA TALLENNETTUIJEN TAPAHTUMIEN KATSELU

Katsellaksesi tapahtumaa, korosta tapahtumaa luettelossa ja sitten klikkaa Katsele-valikkoa .

Tämä näyttää kammiovärinänpoisto tapahtuman yhdessä EKG jäljen kanssa ja tapahtumalokin yhden katselukerran ikkunassa:

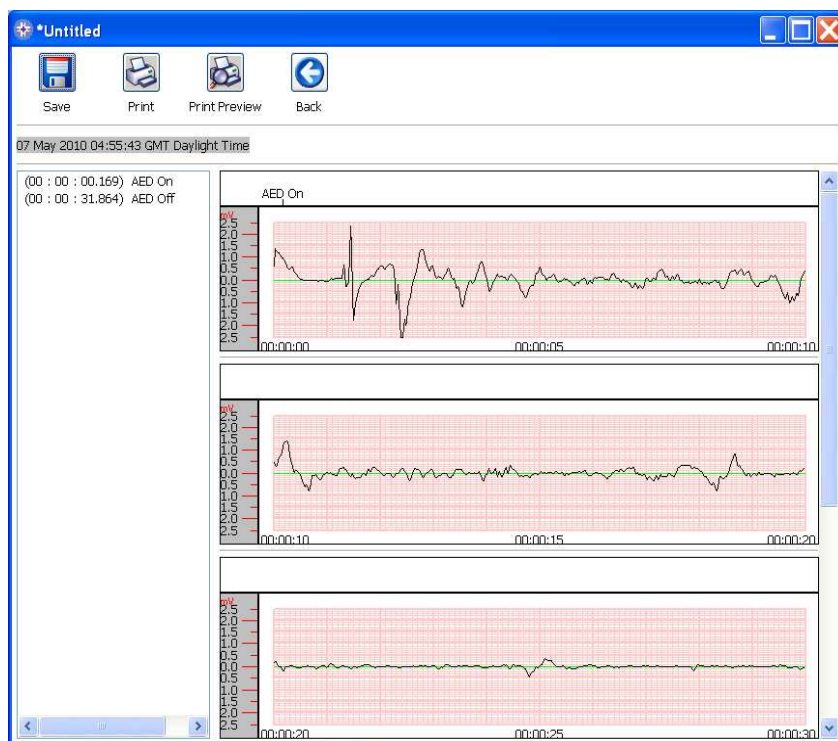

Tallentaja™ EVO
Henkilökohtaisen
Kammiovärinän
Poistoyksikön
tapahtumankatseluik-
kuna

Käyttäjä voi nyt valita näytetyn tapahtuman tallentamisen koneelle klikkaamalla Tallenna-painiketta



. Tämä tarjoaa vaihtoehtoja tiedonsyöttöön potilaan tunnistamista varten.. Yksityiskohtaiset potilastiedot voivat muodostua joko kirjain- tai numeromerkeistä ja jokainen kenttä voidaan täyttää tai jättää tyhjäksi vaadittaessa.

Tallentaja™ EVO
Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön
Potilastietojen ikkuna

HUOM. Kun kammiovärinänpoisto tiedot on tallennettu koneellesi niin näitä tietoja ei voi muuttaa.

Tallentaja™ EVO tapahtumankatseluikkuna on varustettu myös seuraavilla painikkeilla:



Tulosta Tapahtuma – Klikkaa tätä painiketta tulostaaksesi tapahtuman joka näkyy tällä hetkellä katseluikkunassa.



Tulostuksen Esikatselu – Klikkaa tätä painiketta niin voit esikatsella tulostettavia tietoja ikkunassa.




Takaisin - Klikkaa tätä painiketta palataksesi Tallentaja™ EVO Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistaja tapahtumalokiluetteloikkunaan.

KATSELE Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön ASETUKSIA.



Klikkaamalla Katsele Asetuksia-painiketta pääset seuraavaan Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön Kokoonpano-ikkunaan. Tämä ikkuna antaa käyttäjän katsella akun virtaa, kaiutinvolyymiä, kieltä ja metronomiasetuksia, CPR-astetta ja kestoja sekä voimassaoloajan päättymistä, ohjelmaversiota ja Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön laitteen sarjanumeroa. Käyttäjä voi ainoastaan katsella näitä asetuksia eikä voi tehdä mitään muutoksia.

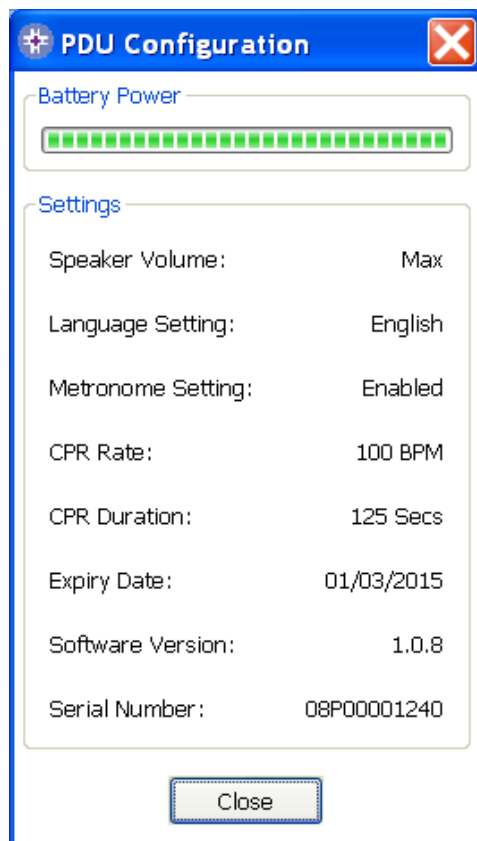

Tallentaja™ EVO
katsele Henkilökohtaisen Kammiovärinän
Poistoyksikön Asetuksia-ikkuna

Tallentaja™ EVO:N KÄYTTÖ TALLENNETUJEN TAPAHTUMIEN KANSSA



Hallitse tallennettuja tapahtumia-painike Tallentaja™ EVO:n pääikkunassa antaa käyttäjien tarkistaa tapahtumatietoja jotka on ladattu samaritan® Julkisen Pääsyn Kammiovärinän Poistajasta , samaritan® Data-Pak akusta tai Henkilökohtaisen Kammiovärinän Poistoyksikön Muistikortista ja tallennettu koneelle.

Klikkaamalla tätä painiketta avautuu seuraava ikkuna;



Korosta tapahtumaa luettelossa ja klikkaa Katselu avaa tallennetun tapahtuman EKG-tietojen ja tapahtumalokin katselua varten .

Vienti ja Tuonti

Tallentaja™ EVO:ssa on toimintoja jotka antavat käyttäjien lähettää tai vastaanottaa kammiovärinänpoisto tapahtumatietoja muille ihmisille joilla on Tallentaja™ EVO -ohjelma. Lähettääksesi, tai vastaanottaaksesi kopioita tallennetuista tapahtumista Käytä Tallentaja™ EVO:n Vienti-ja Tuonti-toimintoja.

Tapahtumien vientiä varten.

1. Hallitse Tallennettuja tapahtumia-ikkunasta korosta tapahtumaa tai tapahtumia jotka haluat



viedä ja sitten klikkaa painiketta.

2. Kone kysyy sen tietokoneen sijaintia jolle haluat tallentaa viedyn tiedoston, ja antaa sinun myös valita nimen viedylle tiedostolle.
3. Klikkaa Tallenna-painiketta tallentaaksesi tiedoston toivottuun sijaintiin.

Sitten on mahdollista liittää tämä tiedosto sähköpostiviestiin käyttäen normaalia sähköpostiohjelmaasi ja lähettää viety tiedosto toiselle käyttäjälle jolla on Tallentaja™ EVO ohjelma.

Tapahtumatietoja Tallentaja™ EVO:sta voi katsella ainoastaan toinen Tallentaja™ EVO käyttäjä. Edellinen Tallentaja-™ ohjelma ei tuo menestyksellisesti eikä näytä kunnolla tietoja Tallentaja™ EVO:sta.

Tapahtumien tuonti

Tapahtumien tuontia varten ja niiden katselua varten koneellasi, tiedosto joka on lähetetty sinulle toisen Tallentaja™ tai Tallentaja™ EVO n käyttäjän toimesta pita tallentaa sijaintiin koneellasi.

1. Tallentaja™ EVO Hallitse Tallennettuja Tapahtumia-ikkunassa klikkaa  painiketta.
2. Selaa sijaintiin johon tiedosto on tallennettu ja klikkaa avaa.
3. Talletukset lisätään Tallentaja™ EVO-tiedostojen luetteloon koneellasi.

Näitä voidaan sitten katsella korostamalla tapahtumaa luettelossa ja klikkaamalla Katsele-painiketta.

Tallentaja™ EVO tulee tuomaan ja näyttämään oikein tapahtumatietoja jotka on viety ohjelman edellisestä versiosta nimeltä Tallentaja™.

Tallennettujen tapahtumien poisto

Tallennetut tapahtumat voidaan pyyhkiä koneesi muistista Tallentaja™ EVO:n toimesta. Tapahtumat pyyhitään yksittäin valitsemalla pyyhittävät tapahtuma/t (voidaan valita monta tapahtumaa) korostamalla kyseistä tapahtumaa.

Kun olet vahvistanut että ainoastaan tapahtumat jotka haluat pyyhkiä on valittu, klikkaa



Pyyhi-painiketta . Varatoimenpiteenä Tallentaja™ EVO pyytää sinua syöttämään Salasanasi ennen muistin pyyhkimistä. Kun oikea salasana on syötetty, valittujen tapahtumien muisti pyyhitään koneeltasi.

Varoitus: Varmista että ainoastaan tapahtumat jotka haluat pyyhkiä on valittu ennen pyyhkimistä. Koneesi muistilta pyyhkimisen jälkeen tapahtumia ei voida elvyttää ja kaikki tiedot menetetään.


SALASANAN JA KIELEN MUUTTAMINEN Tallentaja™ EVO:ssa

Tallentaja™ EVO:ssa on joitakin toimintoja jotka voidaan muuttaa tai suorittaa ainoastaan syöttämällä salasana. Tämä antaa ohjelman ylläpitäjien rajoittaa pääsyä tiettyihin kapasiteetteihin ainoastaan valtuutetuille käyttäjille. Tallentaja™ EVO toimitetaan salasanan kanssa salasana-asetuksena oletus "salasana".

Muuttaaksesi salasanan oman valintasi mukaiseksi sinun pitää tehdä seuraava;



Tässä pää Tallentaja™ EVO ikkunassa klikkaa pientä  painiketta. Tämä avaa seuraavan ikkunan.

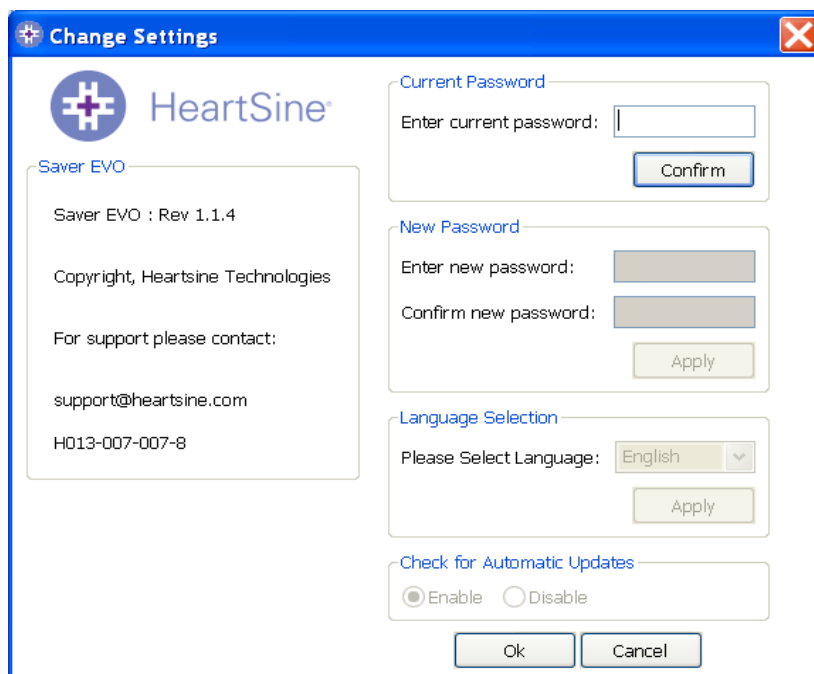


Kirjoita ruutuun voimassa oleva salasana ja klikkaa ”Vahvista”. Näin toimimalla voit valita ja vahvistaa uuden salasanan.

Suorita vaihdos klikkaamalla ”Suorita”. Näytölle tulee vahvistus, että salasana on onnistuneesti vaihdettu. Klikkaa nyt OK ja poistu sitten tästä toiminnosta klikkaamalla salasanan vaihtoikkunassa uudelleen OK.


Huomaa kuitenkin, että kun Saver™ EVO asennetaan uudelleen, salasana palautuu ohjelmistossa oletusmuotoonsa. Tällöin ei kuitenkaan menetetä mitään aiemmin tallennettuja tapahtumätietoja.

Kielen valinta

Valitaksesi Tallentaja™ EVO –ohjelman kielen valitse kieli pudotusvalikosta ja klikkaa sovelia.

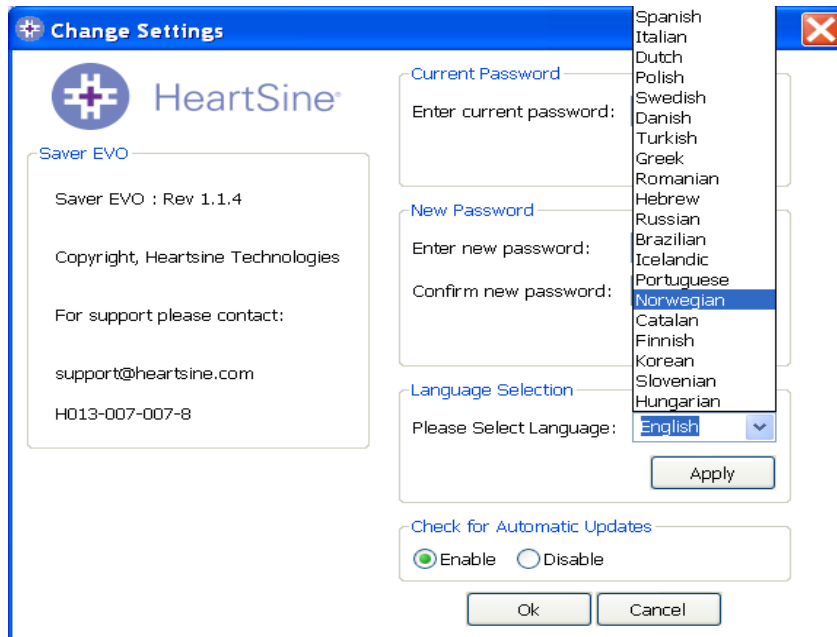


Klikkaamalla sovelia seuraava ikkuna ilmestyy ja Tallentaja™ EVO pitää käynnistää uudelleen jotta kielimuutokset tulevat voimaan.

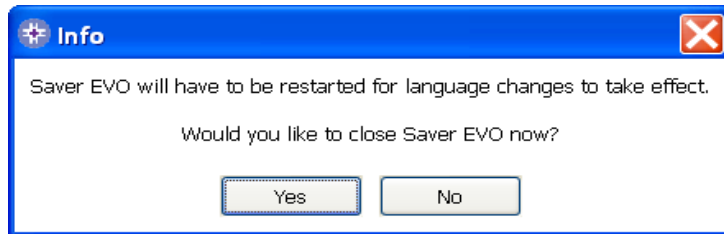

Tarkasta automaattiset päivitykset

Jos Käytössä-ruutu on valittuna, silloin joka kerta kun Saver™ EVO käynnistetään, se yrittää kytkeytyä HeartSine-sivustoon ja tarkastaa onko Saver™ EVOsta saatavissa uusi versio. Jos päivitys on saatavissa, saat sitä koskevan kehoitteen seuraavan ruudun muodossa, kun Saver™ EVO käynnistyy.

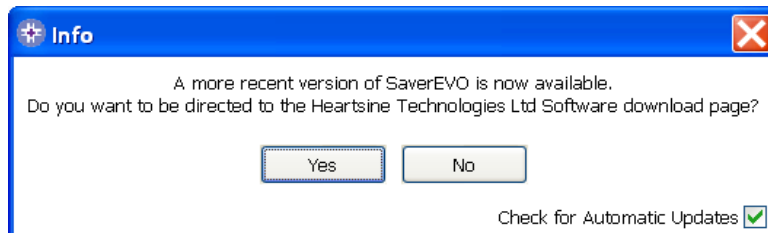

Valitse Kyllä tai Ei riippuen siitä haluatko ladata Saver™ EVO:n uudemman version.