



HeartSine samaritan[®] PAD
500P Trainer
μοντέλο TRN-500-1
Εγχειρίδιο χρήστη



HeartSine[®]



HeartSine samaritan® PAD με CPR Advisor μοντέλο 500P Trainer

Στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη περιέχονται οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό του HeartSine PAD 500P Trainer (συσσκευή εκπαίδευσης).

Το HeartSine PAD 500P Trainer είναι μια μη ιατρική συσκευή που προορίζεται για την εκπαίδευση ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες στη σωστή χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή PAD 500P της HeartSine. Η συσκευή εκπαίδευσης (Trainer) δεν έχει θεραπευτικές δυνατότητες και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πραγματικές περιστάσεις διάσωσης.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφευχθεί η σύγχυση στις περιπτώσεις των πραγματικών καταστάσεων διάσωσης, μην φυλάσσετε ή αφήνετε το Trainer κοντά στον αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή HeartSine PAD.

Για τη γρήγορη και εύκολη αναγνώρισή της, η συσκευή PAD 500P Trainer της HeartSine περιλαμβάνει κίτρινη μεμβράνη πρόσοψης διεπαφής χρήστη, σε αντίθεση με τον αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή PAD 500P της HeartSine που διαθέτει σκούρα μπλε/μαύρη μεμβράνη πρόσοψης.

Η HeartSine συνιστά στα άτομα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν έναν από τους απινιδωτές της να εκπαιδευτούν στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με χρήση απινιδωτή (CPR-D). Η συσκευή HeartSine PAD 500P Trainer προορίζεται για χρήση από εγκεκριμένους εκπαιδευτές CPR-D για τον σκοπό αυτόν.

Η συσκευή HeartSine PAD 500P Trainer έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά ούτως ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις κοινές οδηγίες του έτους 2010 που εξέδωσε η Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης σχετικά με την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Η συσκευή διαθέτει έξι προ-προγραμματισμένα σενάρια με βάση αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Σε περίπτωση που οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ΚΑΡΠΑ αλλάξουν, θα διατεθεί λογισμικό για την ανάλογη αναβάθμιση της συσκευής PAD 500P Trainer. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της HeartSine ή απευθείας με την HeartSine Technologies.

Μόλις ενεργοποιηθεί, η συσκευή HeartSine PAD Trainer αναπαράγει φωνητικά μηνύματα που συνοδεύονται από οπτικές ενδείξεις. Η συσκευή PAD 500P Trainer μπορεί επίσης να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.

Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της HeartSine για να λάβετε τον κατάλογο των ανταλλακτικών.



Προετοιμασία του HeartSine PAD 500P Trainer για χρήση

- 1) Βεβαιωθείτε πως το HeartSine PAD 500P Trainer είναι πλήρως φορτισμένο (δείτε την ενότητα «Φόρτιση» στο παρόν εγχειρίδιο).
- 2) Τοποθετήστε το HeartSine PAD 500P Trainer και το Trainer Pad-Pak σε επίπεδη επιφάνεια. Πιέστε το Trainer Pad-Pak στο άνοιγμα του HeartSine PAD 500P Trainer μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο (κλικ) που επιβεβαιώνει τη σωστή εισαγωγή του.
- 3) Τοποθετήστε τις μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το Trainer στο τηλεχειριστήριο του HeartSine PAD.



Μην πατήσετε κάποιο κουμπί όσο τοποθετείτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, καθώς έτσι θα γίνει επαναφορά του αναγνωριστικού αριθμού του τηλεχειριστηρίου.

- 4) Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) του HeartSine PAD 500P Trainer και ακούστε τα φωνητικά μηνύματα που επιβεβαιώνουν τη λειτουργία της μονάδας.
- 5) Εάν το HeartSine PAD 500P Trainer δεν είναι επαρκώς φορτισμένο, δεν θα λειτουργεί σωστά. Όταν ενεργοποιείται, η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα υποδεικνύοντας ότι απαιτείται φόρτιση. Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί πλήρως, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί. Για πλήρεις οδηγίες σχετική με τη φόρτιση, δείτε την ενότητα «Φόρτιση» στο παρόν εγχειρίδιο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του HeartSine PAD 500P Trainer

Για να ενεργοποιήσετε το HeartSine PAD 500P Trainer, πατήστε το πράσινο κουμπί κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off).



Το Trainer έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με το τελευταίο σενάριο που χρησιμοποιήθηκε.

Για να απενεργοποιήσετε το HeartSine PAD 500P Trainer, πατήστε ξανά το κουμπί On/Off.


Αφού ενεργοποιηθεί, το HeartSine PAD 500P Trainer μπορεί να απενεργοποιηθεί με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. Για να απενεργοποιήσετε το Trainer, πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης (κόκκινο κουμπί) του τηλεχειριστηρίου.



Αφού ενεργοποιηθεί, το HeartSine PAD 500P Trainer απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δεκαπέντε λεπτά, εφόσον δεν χρησιμοποιείται.



PAD 500P Trainer

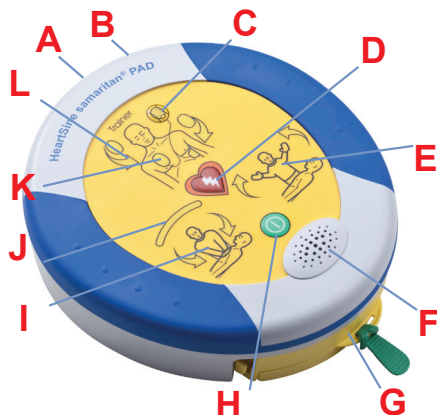

- A Θύρα δεδομένων
- B Λυχνία LED κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
- C Ένδειξη κατάστασης
- D Κουμπί ηλεκτροσόκ
- E Ένδειξη «μην αγγίζετε»
- F Ηχείο
- G Φυσιγγίο Pad-Pak
- H Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- I Ένδειξη «ασφαλές να αγγίζετε»
- J Ένδειξη ΚΑΡΠΑ
- K Ένδειξη τοποθέτησης επαφών
- L Βέλη ενεργειών

**Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off)**

Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. (Εάν πατηθεί όταν υποδεικνύεται η πραγματοποίηση ηλεκτροσόκ, ακούγεται το εξής προειδοποιητικό μήνυμα «Προειδοποίηση, πατήθηκε το κουμπί απενεργοποίησης». Η συσκευή δεν θα απενεργοποιηθεί αν δεν πατήσετε ξανά το κουμπί εντός τριών δευτερολέπτων.)

**Ένδειξη τοποθέτησης επαφών**

Τα βέλη ενεργειών γύρω από αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνουν για να ειδοποιήσουν τον χρήστη πως πρέπει να τοποθετηθούν οι επαφές (pads) του PAD 500P στον ασθενή σύμφωνα με τις ενδείξεις.

**Ένδειξη «ασφαλές να αγγίζετε»**

Είναι ασφαλές να αγγίζετε τον ασθενή όταν τα βέλη ενεργειών γύρω από αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνουν. Μπορείτε να εκτελέσετε ΚΑΡΠΑ ή να ελέγξετε τον ασθενή.

**Ένδειξη κατάστασης**

Αναβοσβήνει πράσινο - Το Trainer είναι έτοιμο για χρήση
Αναβοσβήνει κόκκινο - Το Trainer χρειάζεται φόρτιση

**Βέλη ενεργειών**

Τα βέλη ενεργειών γύρω από ένα εικονίδιο αναβοσβήνουν για να υποδείξουν τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης.

**Ένδειξη «μην αγγίζετε»**

Μην αγγίζετε τον ασθενή όταν τα βέλη ενεργειών γύρω από αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνουν. Η συσκευή PAD 500P μπορεί να αναλύει τον καρδιακό ρυθμό του ασθενή ή να ετοιμάζεται για χορήγηση ηλεκτροσόκ.

**Κουμπί ηλεκτροσόκ**

Πατήστε το κουμπί για την προσομοίωση της χορήγησης θεραπευτικού ηλεκτροσόκ.

**Ένδειξη ΚΑΡΠΑ**

Πρόκειται για μια διάταξη λυχνιών που παρέχει μια διαβαθμισμένη ένδειξη της δύναμης που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια των μαλάξεων στην ΚΑΡΠΑ. Όταν οι πράσινες λυχνίες είναι αναμμένες, η δύναμη που εφαρμόζεται στις μαλάξεις θεωρείται επαρκής.



Διαχείριση των ηλεκτροδίων


Χρήση των ηλεκτροδίων

Τα εκπαιδευτικά σενάρια περιλαμβάνουν ηχητικές ειδοποιήσεις για την αφαίρεση των ηλεκτροδίων από το Pad-Pak και την τοποθέτηση των επαφών των ηλεκτροδίων σύμφωνα με τις ενδείξεις. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν σας ζητηθεί.

- 1) Τραβήξτε την πράσινη ταινία για να ανοίξετε το φυσίγγιο του Trainer Pad-Pak και επεκτείνετε πλήρως τα καλώδια των ηλεκτροδίων.
- 2) Ξεκολλήστε τους επαφείς των ηλεκτροδίων από τις προστατευτικές επενδύσεις τους.
- 3) Τοποθετήστε τους επαφείς των ηλεκτροδίων όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη τοποθέτησης ηλεκτροδίων. Οι επαφείς των ηλεκτροδίων στέρνου (sternum) και κορυφής (apex) φέρουν σαφείς αναγνωριστικές ενδείξεις.
- 4) Πιέστε με δύναμη τους επαφείς για να βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείται σωστή επαφή.

Ανατύλιξη των ηλεκτροδίων μετά τη χρήση

- 1) Τοποθετήστε ξανά τις προστατευτικές επενδύσεις στους επαφείς των ηλεκτροδίων ή αντικαταστήστε τους με νέους επαφείς.
- 2) Διπλώστε τους επαφείς μεταξύ τους έτσι ώστε η επένδυση να βρίσκεται προς τα έξω.
- 3) Αφήστε τα ηλεκτρόδια να κρέμονται από τη συσκευή και χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή στον μπλε μηχανισμό περιτύλιξης για να τυλίξετε πλήρως τα ηλεκτρόδια:

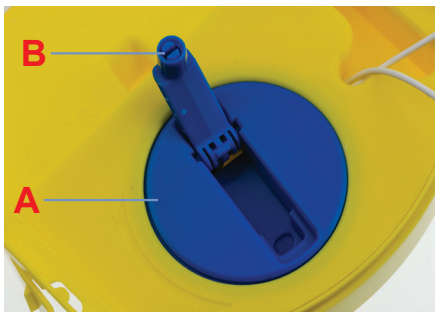


A Μηχανισμός περιτύλιξης
B Χειρολαβή περιτύλιξης

- 4) Τοποθετήστε τους επαφείς επάνω από το φυσίγγιο του Pad-Pak και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια βρίσκονται κάτω από τους επαφείς.
- 5) Κλείστε το φυσίγγιο του Pad-Pak σύροντας την κίτρινη θήκη στη θέση της.



Το τηλεχειριστήριο

Τηλεχειριστήριο του PAD 500P Trainer

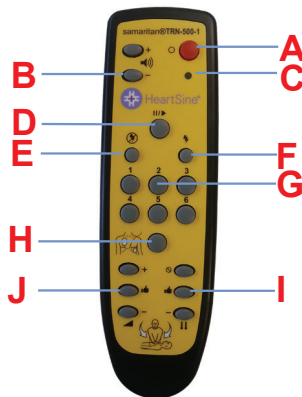

- A Κουμπί απενεργοποίησης
- B Ρυθμιστικό έντασης ήχου
- C Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- D Κουμπί παύσης
- E Σενάριο «δεν απαιτείται ηλεκτροσόκ»
- F Σενάριο «απαιτείται ηλεκτροσόκ»
- G Επιλογή σεναρίου
- H Τοποθέτηση επαφών ηλεκτροδίων
- I Έλεγχος δύναμης CPR Advisor
- J Έλεγχος ρυθμού CPR Advisor



Απενεργοποίηση του Trainer

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε το HeartSine PAD 500P Trainer. Για να το απενεργοποιήσετε το Trainer, πατήστε το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο.



Αλλαγή έντασης ήχου

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα έντασης ήχου στο HeartSine PAD 500P Trainer. Τα κουμπιά ελέγχου της έντασης βρίσκονται στα αριστερά του κουμπιού απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου. Για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε το κουμπί '+' και για να την μειώσετε, το κουμπί '-'.



Παύση του Trainer

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του HeartSine PAD 500P Trainer. Για την παύση του Trainer, πατήστε το κουμπί Παύσης (||/▶). Το Trainer θα παραμείνει σε παύση έως ότου πατήσετε ξανά το κουμπί παύσης, οπότε θα συνεχιστεί η αναπαραγωγή του επιλεγμένου σεναρίου.



Αλλαγή σεναρίου

Το HeartSine PAD 500P Trainer διαθέτει έξι προ-προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σενάρια. (Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα εκπαιδευτικά σενάρια, δείτε την αντίστοιχη ενότητα του παρόντος εγχειριδίου). Μπορείτε να αλλάξετε σενάρια πατώντας το κουμπί του αντίστοιχου αριθμού σεναρίου στο τηλεχειριστήριο, π.χ. πατώντας το κουμπί «3» επιλέγετε το σενάριο τρία.

Αφού αλλάξει το σενάριο, η συσκευή θα λειτουργήσει όπως περιγράφεται στην ενότητα περιγραφής των σεναρίων. Η συσκευή παραμένει στο σενάριο αυτό έως ότου επιλεγεί κάποιο άλλο σενάριο.



Προ-προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σενάρια

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε έξι προ-προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σενάρια στο HeartSine PAD Trainer. Όλα τα προ-προγραμματισμένα σενάρια βασίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες των AHA/ERC του 2010. Παρακάτω περιγράφονται οι λεπτομέρειες των προ-προγραμματισμένων σεναρίων.

Σενάριο 1

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 1. | Τρόπος λειτουργίας ρύθμισης | - | «Καλέστε ιατρική βοήθεια», «Τραβήξτε την πράσινη ταινία», κλπ |
| 2. | Παρέμβαση χρήστη | - | Πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Pads» (επαφείς) για να επιβεβαιωθεί η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων |
| 3. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 4. | Συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ |
| 5. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 6. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 7. | Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | |
| 8. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 9. | Επανάληψη | - | Επανάληψη των βημάτων 6 έως 8 έως ότου πατηθεί το κουμπί «On/Off» |

Σενάριο 2

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 1. | Τρόπος λειτουργίας ρύθμισης | - | «Καλέστε ιατρική βοήθεια», «Τραβήξτε την πράσινη ταινία», κλπ |
| 2. | Παρέμβαση χρήστη | - | Πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Pads» (επαφείς) για να επιβεβαιωθεί η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων |
| 3. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 4. | Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | |
| 5. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 6. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 7. | Συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ |
| 8. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 9. | Επανάληψη | - | Επανάληψη των βημάτων 6 έως 8 έως ότου πατηθεί το κουμπί «On/Off» |





Προ-προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σενάρια

Σενάριο 3

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---|
| 1. | Ηλεκτρόδια | - | Η συσκευή υποθέτει πως τα ηλεκτρόδια έχουν ήδη τοποθετηθεί |
| 2. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 3. | Έλεγχος επαφών | - | «Ελέγξτε τους επαφείς» |
| 4. | Παρέμβαση χρήστη | - | Πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Pads» (επαφείς) για να επιβεβαιωθεί η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων |
| 5. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 6. | Συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ |
| 7. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 8. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 9. | Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | |
| 10. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 11. | Επανάληψη κουμπί «On/Off» | - | Επανάληψη των βημάτων 3 έως 10 έως ότου πατηθεί το |

Σενάριο 4

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|--|
| 1. | Ηλεκτρόδια | - | Η συσκευή υποθέτει πως τα ηλεκτρόδια έχουν ήδη τοποθετηθεί |
| 2. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 3. | Συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ |
| 4. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 5. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 6. | Συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ |
| 7. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 8. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 9. | Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | |
| 10. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 11. | Επανάληψη | - | Επανάληψη των βημάτων 5 έως 10 έως ότου πατηθεί το κουμπί 'On/Off' |



Προ-προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σενάρια

Σενάριο 5

Το Σενάριο 5 είναι ίδιο με το Σενάριο 1 με την προσθήκη ηχητικών ενδείξεων για τους χρόνους εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΚΑΡΠΑ.

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 1. | Τρόπος λειτουργίας ρύθμισης | - | «Καλέστε ιατρική βοήθεια», «Τραβήξτε την πράσινη ταινία», κλπ |
| 2. | Παρέμβαση χρήστη | - | Πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Pads» (επαφείς) για να επιβεβαιωθεί η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων |
| 3. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 4. | Συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ |
| 5. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές, αυτό περιλαμβάνει μια ηχητική ένδειξη των κατάλληλων χρόνων εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης - ο μετρονόμος αλλάζει από ήχο «μπιπ» σε «τικ» καθ' όλη τη διάρκεια των δέκα μαλάξεων. |
| 6. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 7. | Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | |
| 8. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές, αυτό περιλαμβάνει μια ηχητική ένδειξη των κατάλληλων χρόνων εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης - ο μετρονόμος αλλάζει από ήχο «μπιπ» σε «τικ» καθ' όλη τη διάρκεια των δέκα μαλάξεων. |
| 9. | Επανάληψη | - | Επανάληψη των βημάτων 6 έως 8 έως ότου πατηθεί το κουμπί 'On/Off' |



Προ-προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σενάρια

Σενάριο 6

Το Σενάριο 6 είναι ίδιο με το Σενάριο 2 με την προσθήκη ηχητικών ενδείξεων για τους χρόνους εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΚΑΡΠΑ.

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 1. | Τρόπος λειτουργίας ρύθμισης | - | «Καλέστε ιατρική βοήθεια», «Τραβήξτε την πράσινη ταινία», κλπ |
| 2. | Παρέμβαση χρήστη | - | Πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Pads» (επαφείς) για να επιβεβαιωθεί η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων |
| 3. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 4. | Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | |
| 5. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές, αυτό περιλαμβάνει μια ηχητική ένδειξη των κατάλληλων χρόνων εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης - ο μετρονόμος αλλάζει από ήχο «μπιπ» σε «τικ» καθ' όλη τη διάρκεια των δέκα μαλάξεων. |
| 6. | Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - | «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 7. | Συνιστάται ηλεκτροσόκ | - | Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ |
| 8. | Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - | Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές, αυτό περιλαμβάνει μια ηχητική ένδειξη των κατάλληλων χρόνων εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης - ο μετρονόμος αλλάζει από ήχο «μπιπ» σε «τικ» καθ' όλη τη διάρκεια των δέκα μαλάξεων. |
| 9. | Επανάληψη | - | Επανάληψη των βημάτων 6 έως 8 έως ότου πατηθεί το κουμπί 'On/Off' |



Χειροκίνητος έλεγχος του HeartSine PAD 500P Trainer

Το τηλεχειριστήριο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν το σενάριο χειροκίνητα. Όταν ενεργοποιείται, το HeartSine PAD 500P Trainer λειτουργεί όπως περιγράφεται στην ενότητα των εκπαιδευτικών σεναρίων. Οι εκπαιδευτές μπορούν να παρακάμψουν αυτό το στάδιο αυτό πατώντας το κουμπί «Απαιτείται ηλεκτροσόκ», «Δεν απαιτείται ηλεκτροσόκ» ή «Τοποθέτηση επαφών ηλεκτροδίων».



Απαιτείται ηλεκτροσόκ

Πατώντας το κουμπί «Απαιτείται ηλεκτροσόκ», το HeartSine PAD 500P Trainer παρακάμπτει το επιλεγμένο εκπαιδευτικό σενάριο και προσομοιώνει έναν αναταξίμο ρυθμό. Κάθε επακόλουθη περίοδος ανάλυσης θα προτείνει τη χορήγηση ηλεκτροσόκ έως ότου απενεργοποιηθεί το Trainer ή πατηθεί το κουμπί «Δεν απαιτείται ηλεκτροσόκ» στο τηλεχειριστήριο.



Δεν απαιτείται ηλεκτροσόκ

Πατώντας το κουμπί «Δεν απαιτείται ηλεκτροσόκ», το HeartSine PAD 500P Trainer παρακάμπτει το επιλεγμένο εκπαιδευτικό σενάριο και προσομοιώνει έναν μη αναταξίμο ρυθμό. Κάθε επακόλουθη περίοδος ανάλυσης θα προτείνει τη μη χορήγηση ηλεκτροσόκ έως ότου απενεργοποιηθεί το Trainer ή πατηθεί το κουμπί «Απαιτείται ηλεκτροσόκ» στο τηλεχειριστήριο.



Τοποθέτηση επαφών ηλεκτροδίων

Εάν πατηθεί το κουμπί 'Τοποθέτηση επαφών ηλεκτροδίων', το Trainer αναπαράγει τις ειδοποιήσεις 'Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια' κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάλυσης της λειτουργίας. Το Trainer θα συνεχίσει να αναπαράγει τις ειδοποιήσεις 'Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια' μέχρι να πατηθεί ξανά το κουμπί 'Τοποθέτηση επαφών ηλεκτροδίων'.

HeartSine samaritan PAD με CPR Advisor, μοντέλο 500P

Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής HeartSine PAD 500P περιλαμβάνει μια μονάδα ανάδρασης ΚΑΡΠΑ που ονομάζεται 'CPR Advisor'. Το HeartSine PAD 500P χρησιμοποιεί τη λειτουργία CPR Advisor ως ένα απλό μέσο αξιολόγησης της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ που εκτελεί ο διασώστης. Εάν χρειάζεται, ο διασώστης ειδοποιείται να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη δύναμη μέχρι να επιτύχει επαρκές επίπεδο δύναμης στις μαλάξεις που πραγματοποιεί.

Εάν η δύναμη που εφαρμόζεται στις μαλάξεις θεωρηθεί επαρκής, το CPR Advisor αναλύει στη συνέχεια τον ρυθμό εκτέλεσης των μαλάξεων. Ο διασώστης θα ειδοποιηθεί να πραγματοποιήσει τις μαλάξεις πιο γρήγορα ή πιο αργά, όπως ενδείκνυται.

Εάν η δύναμη και η ταχύτητα της παρεχόμενης ΚΑΡΠΑ είναι επαρκείς, το HeartSine PAD 500P θα αναπαράγει την ειδοποίηση 'Καλές μαλάξεις'.

Όλες οι ηχητικές ειδοποιήσεις συνοδεύονται από οπτικές ειδοποιήσεις στο εικονίδιο της ένδειξης ΚΑΡΠΑ.





Εκπαιδευτική ενότητα CPR Advisor

Εκπαίδευση στο CPR Advisor

Οι εκπαιδευτές μπορούν να προσομοιώσουν τη λειτουργία του CPR Advisor στο HeartSine PAD 500P Trainer χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Οι εκπαιδευτές πρέπει να παρατηρούν την ΚΑΡΠΑ που εκτελεί ο διασώστης που εκπαιδεύεται και να πατούν το κατάλληλο κουμπί ανάλογα με τα τεκταινόμενα.

Το HeartSine PAD 500P Trainer θα θεωρήσει αρχικά ότι οι μαλάξεις εκτελούνται σωστά και θα αναπαράγει την ηχητική ειδοποίηση:



«Καλές μαλάξεις»


Τα κουμπιά ελέγχου της ΚΑΡΠΑ βρίσκονται στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Τα κουμπιά στην αριστερή πλευρά χρησιμοποιούνται για την υπόδειξη του ρυθμού με τον οποίο εκτελεί τις μαλάξεις ο εκπαιδευόμενος και τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά χρησιμοποιούνται για την υπόδειξη της δύναμης με την οποία εκτελούνται οι μαλάξεις.

Ρυθμός μαλάξεων

Γρήγορες μαλάξεις

Σωστός ρυθμός

Αργές μαλάξεις

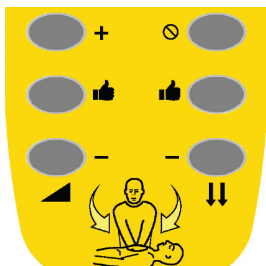

Δύναμη μαλάξεων

Ξεκινήστε την ΚΑΡΠΑ / Όχι μαλάξεις

Καλή δύναμη

Ανεπαρκής δύναμη

Δύναμη μαλάξεων

Το HeartSine PAD 500P Trainer μπορεί να προσομοιώσει τη λειτουργία CPR Advisor του απινιδωτή HeartSine PAD 500P.



Η ΚΑΡΠΑ δεν έχει ξεκινήσει

Εάν ο εκπαιδευόμενος δεν έχει ξεκινήσει να εκτελεί την ΚΑΡΠΑ, πατήστε το κουμπί 'Όχι μαλάξεις'. Το HeartSine PAD 500P Trainer θα αναπαράγει την ηχητική ειδοποίηση:



«Πιέστε πιο δυνατά, Πιέστε πιο δυνατά, Ξεκινήστε την ΚΑΡΠΑ»



Η 'ένδειξη ΚΑΡΠΑ' στο HeartSine PAD 500P Trainer έχει μία μεμονωμένη πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει, όπως στην εικόνα. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ξεκινήσει την ΚΑΡΠΑ αμέσως.





Εκπαιδευτική ενότητα CPR Advisor



Οι μαλάξεις δεν είναι αρκετά δυνατές

Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει ξεκινήσει να εκτελεί την ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν εφαρμόζει αρκετή δύναμη, πατήστε το κουμπί 'Ανεπαρκής δύναμη'. Το HeartSine PAD 500P Trainer θα αναπαράγει την ηχητική ειδοποίηση:



«Πιέστε πιο δυνατά»



На индикаторе СЛР тренажера HeartSine PAD 500P Trainer будут мигать оранжевые лампочки, как показано на рисунке. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να υποδείξει στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη δύναμη.



Καλή δύναμη μαλάξεων

Εάν ο εκπαιδευόμενος εκτελεί τις μαλάξεις σε επαρκές βάθος, πατήστε το κουμπί 'Καλή δύναμη'. На индикаторе СЛР будут мигать все лампочки (оранжевые и зеленые), как показано на рисунке.

Το HeartSine PAD 500P Trainer θα σταματήσει να υποδεικνύει μηνύματα που σχετίζονται με τη δύναμη με την οποία εκτελούνται οι μαλάξεις:



«Καλές μαλάξεις»



Ρυθμός μαλάξεων

Το HeartSine PAD 500P Trainer μπορεί να προσομοιώσει τη λειτουργία CPR Advisor του απινιδωτή HeartSine PAD 500P. Ακολουθούν οδηγίες σχετικά με την προσομοίωση του ρυθμού των μαλάξεων.



Υπερβολικά αργές μαλάξεις

Εάν ο εκπαιδευόμενος εκτελεί τις μαλάξεις υπερβολικά αργά, πατήστε το κουμπί 'Αργές μαλάξεις'. Το HeartSine PAD 500P Trainer θα αναπαράγει την ειδοποίηση:



«Πιέστε πιο γρήγορα»



Υπερβολικά γρήγορες μαλάξεις

Εάν ο εκπαιδευόμενος εκτελεί τις μαλάξεις υπερβολικά γρήγορα, πατήστε το κουμπί 'Γρήγορες μαλάξεις'. Το HeartSine PAD 500P Trainer θα αναπαράγει την ειδοποίηση:



«Πιέστε πιο αργά»



Σωστός ρυθμός μαλάξεων

Εάν ο εκπαιδευόμενος εκτελεί τις μαλάξεις με σωστό ρυθμό, πατήστε το κουμπί 'Σωστός ρυθμός'. Το HeartSine PAD 500P Trainer θα αναπαράγει την ηχητική ειδοποίηση σωστών μαλάξεων:





Συντήρηση

Διαχείριση της μπαταρίας του HeartSine PAD 500P Trainer

Το HeartSine PAD 500P Trainer περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Συνιστάται η πλήρης φόρτιση του HeartSine PAD 500P Trainer πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, το HeartSine PAD 500P Trainer παρέχει περίπου επτά ώρες χρήσης προτού χρειαστεί να επαναφορτιστεί.

Το HeartSine PAD 500P Trainer ελέγχει τη στάθμη της μπαταρίας όταν κοντεύει να εξαντληθεί. Τουλάχιστον μία ώρα πριν εξαντληθεί η μπαταρία, το Trainer αναπαράγει το εξής μήνυμα:



«Προειδοποίηση. Χαμηλή στάθμη μπαταρίας»

Εάν ακούσετε το μήνυμα αυτό, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το HeartSine PAD 500P Trainer για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, η συσκευή Trainer σβήνει αυτόματα. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επαναφορτίσετε το Trainer.

Φόρτιση και επαναφόρτιση του HeartSine PAD 500P Trainer

Για την ασφαλή φόρτιση ή επαναφόρτιση του HeartSine PAD 500P Trainer, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- 1) Εισαγάγετε τον προσαρμογέα του φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στην πλαϊνή πλευρά του HeartSine PAD 500P Trainer. Βεβαιωθείτε πως ο προσαρμογέας έχει εισαχθεί πλήρως.
- 2) Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.
- 3) Αφήστε το Trainer να φορτιστεί. Η λυχνία LED κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας (βρίσκεται πίσω από την υποδοχή) θα είναι κόκκινη όταν πραγματοποιείται ταχεία φόρτιση και θα αναβοσβήνει όταν η φόρτιση κοντεύει να ολοκληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία LED σβήνει. Για τη φόρτιση ενός πλήρως αποφορτισμένου HeartSine PAD 500P Trainer χρειάζονται έως και έξι ώρες.
- 4) Αφαιρέστε τον προσαρμογέα από το HeartSine PAD 500P Trainer. Ενεργοποιήστε το Trainer για να βεβαιωθείτε πως λειτουργεί.

Εάν ενεργοποιηθεί το HeartSine PAD 500P Trainer κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ο φορτιστής θα πρέπει να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί ξανά για να ξεκινήσει εκ νέου η ταχεία φόρτιση.

Το HeartSine PAD 500P Trainer πρέπει να φορτίζεται μόνο με τον φορτιστή που παρέχεται. Η χρήση άλλων φορτιστών ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο HeartSine PAD 500P Trainer.

Το HeartSine PAD 500P Trainer και ο φορτιστής του έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τα χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή υγρά περιβάλλοντα.

Το HeartSine PAD 500P Trainer, το Trainer Pad-Pak και ο φορτιστής δεν φέρουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να ανοίγονται. Στην περίπτωση περίπτωση κάποιας δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε άμεσα με τον αντιπρόσωπο.





Συντήρηση

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο του HeartSine PAD 500P Trainer διαθέτει ένδειξη προειδοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Εάν η ένδειξη αναβοσβήσει δύο φορές σε κόκκινο χρώμα αφού πατηθεί κάποιο κουμπί του τηλεχειριστηρίου, αυτό σημαίνει πως πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες του.

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί δύο τυπικές μπαταρίες AAA.

Για να βγάλετε τις μπαταρίες, αφαιρέστε το καπάκι στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.



Εισάγοντας τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο ενώ πιέζετε το κουμπί απενεργοποίησης, θέτετε το τηλεχειριστήριο σε τρόπο λειτουργίας αντιστοίχισης, κατά την οποία λαμβάνει νέο αναγνωριστικό μετάδοσης. Το αναγνωριστικό αυτό διαφέρει από εκείνο που ήταν ήδη αποθηκευμένο στο Trainer. Εάν αυτό συμβεί ακουσίως, θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά ολόκληρη τη διαδικασία αντιστοίχισης του τηλεχειριστηρίου με το HeartSine PAD 500P Trainer.

Η φυσιολογική αντικατάσταση των μπαταριών δεν δημιουργεί πρόβλημα αφού η αντιστοίχιση ξεκινά μόνο εφόσον είναι ταυτόχρονα πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης.

Εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων HeartSine PAD 500P Trainer

Το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων HeartSine PAD 500P Trainer είναι ένα λογισμικό που μπορείτε να μεταφορτώσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα της HeartSine (www.heart sine.com). Με το λογισμικό αυτό μπορείτε να αναβαθμίσετε το Trainer. Έχετε τις εξής επιλογές.

Γλώσσες

Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το HeartSine PAD 500P Trainer ώστε να λειτουργεί με ηχηρικά μηνύματα σε οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες γλώσσες. Μεταφορτώστε το εγχειρίδιο χρήσης της τρέχουσας έκδοσης του εργαλείου ρύθμισης παραμέτρων HeartSine PAD 500P Trainer από την ιστοσελίδα της HeartSine για τις σχετικές οδηγίες.

Αντιστοίχιση τηλεχειριστηρίου με το HeartSine PAD 500P Trainer

Κάθε HeartSine PAD 500P Trainer συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο για τον χειρισμό του. Αυτό καθιστά εφικτή τη χρήση πολλαπλών συσκευών σε κοντινή απόσταση χωρίς παρεμβολές. Στην απίθανη περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί πια με το Trainer σας, ενδέχεται να απαιτείται εκ νέου αντιστοίχιση με το Trainer.

Το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων του HeartSine PAD 500P Trainer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχιση του τηλεχειριστηρίου με το Trainer σας. Πλήρεις οδηγίες περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.

Αναγνωριστικά στοιχεία συσκευής

Κάθε συσκευή HeartSine PAD 500P Trainer λαμβάνει έναν αριθμό αναγνώρισης από 001 έως 255 κατά την κατασκευή του. Το τηλεχειριστήριο για κάθε Trainer λαμβάνει τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης. Στην απίθανη περίπτωση που δύο συσκευές με τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων του HeartSine PAD 500P Trainer για να εκχωρήσετε νέους αριθμούς στις συσκευές. Θα χρειαστεί να αντιστοιχίσετε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της αφού της δώσετε το νέο αριθμό αναγνώρισης.



Κατευθυντήριες οδηγίες ΚΑΡΠΑ 2010

Τα παρακάτω αποτελούν μια σύντομη περίληψη των βασικών στοιχείων της ΚΑΡΠΑ για διασώστες, όπως αυτά παρέχονται από την Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση (ΑΗΑ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης στις δημοσιευμένες οδηγίες του 2010 για την ΚΑΡΠΑ και την άμεση καρδιολογική φροντίδα. Πρόκειται για μια συνοπτική ανασκόπηση για διασώστες που έχουν εκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ. Η HeartSine προτείνει όλοι οι πιθανοί χρήστες του PAD 500P να εκπαιδευτούν από έναν εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό τόσο στην ΚΑΡΠΑ όσο και στη χρήση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούν το PAD 500P. Σε περίπτωση που οι κατευθυντήριες οδηγίες αλλάξουν, θα διατεθεί λογισμικό για την ανάλογη αναβάθμιση της συσκευής PAD 500P. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της HeartSine ή απευθείας με την HeartSine Technologies.

ΚΑΛΕΣΤΕ τις υπηρεσίες επείγοντων (999/911/112 κτλ.) Στείλτε κάποιον να βρει έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED)



Κοιτάξτε, αισθανθείτε, αφουγκραστείτε



Εκτελέστε ΚΑΡΠΑ. Ακολουθήστε τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της ΑΗΑ ή ERC



Χρησιμοποιήστε αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED), εάν υπάρχει διαθέσιμος

Συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ μέχρι να φθάσει η υπηρεσία επείγοντων. Εκτελέστε την εναλλάξ με ένα δεύτερο άτομο μετά από κάθε κύκλο ή 2 λεπτά



**Το άτομο δεν αντιδρά;
Μιλήστε του και κουνήστε τον ώμο του
Καλέστε τις υπηρεσίες επείγοντων**



Ανοίξτε το στόμα, ελέγξτε για αναπνοή



**Εκτελέστε ΚΑΡΠΑ μέχρι να βρεθεί απινιδωτής ή να φθάσει ο ιατρός
Ζητήστε από άλλα άτομα να σας βοηθήσουν
ώστε να εκτελέσετε εναλλάξ την ΚΑΡΠΑ**



Εάν υπάρχει διαθέσιμος απινιδωτής, ενεργοποιήστε τον και ακολουθήστε τις οδηγίες - ο απινιδωτής αξιολογεί τον ρυθμό

**ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ**

**ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ**

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ**

**Συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ
για 2 λεπτά**

**Συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ
για 2 λεπτά**

Συνεχίστε μέχρι να αρχίσει να συνέχεται ο ασθενής, δηλ. μέχρι να κουνηθεί, να ανοίξει τα μάτια του και να αναπνεύσει κανονικά



HeartSine samaritan® PAD 500P Trainer

Οδηγίες απόρριψης

Το HeartSine PAD 500P Trainer είναι συσκευή με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Εάν συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, διαθέτει περίοδο εγγύησης δύο ετών από την ημερομηνία κατασκευής. Το έτος κατασκευής της συσκευής υποδεικνύεται από τα δύο πρώτα ψηφία του σειριακού αριθμού.

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε τη μονάδα PAD 500P Trainer, θα πρέπει να το κάνετε σε κατάλληλη μονάδα ανακύκλωσης σύμφωνα με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές απαιτήσεις. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιστρέψετε τη μονάδα στον τοπικό αντιπρόσωπό σας ή την HeartSine Technologies για απόρριψη.

Απόρριψη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Μην απορρίπτετε τη μονάδα PAD 500P Trainer ως αδιαχώριστο αστικό απόβλητο. Διατηρήστε το PAD 500P Trainer ξεχωριστά για εκ νέου χρήση ή ανακύκλωση σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) ή επιστρέψτε το στον τοπικό αντιπρόσωπό ή την HeartSine Technologies για απόρριψη.

Εξαιρέση από την εγγύηση

Η HeartSine Technologies ή ο τοπικός της αντιπρόσωπος δεν υποχρεούνται να εκτελέσουν επισκευές βάσει της εγγύησης όταν:

- a. Έχουν πραγματοποιηθεί μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στη συσκευή.
- b. Έχουν χρησιμοποιηθεί μη γνήσια ανταλλακτικά.
- c. Ο χρήστης δεν έχει χρησιμοποιήσει τη συσκευή σύμφωνα με τις υποδείξεις χρήσης ή τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- d. Ο σειριακός αριθμός της συσκευής έχει αφαιρεθεί, παραμορφωθεί, χρησιμοποιηθεί με μη προβλεπόμενο τρόπο ή τροποποιηθεί.
- e. Η συσκευή, οι μπαταρίες ή τα ηλεκτρόδια φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται εκτός των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.
- f. Η συσκευή έχει δοκιμαστεί με χρήση μη εγκεκριμένων μεθόδων ή ακατάλληλου εξοπλισμού (βλέπε την ενότητα «Συντήρηση» του παρόντος εγχειριδίου).

Κάθε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλεται μέσω του αντιπροσώπου από τον οποίο αγοράστηκε αρχικά η συσκευή. Η HeartSine Technologies θα σας ζητήσει την απόδειξη αγοράς πριν προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή βάσει της εγγύησης. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εγχειρίδιο χρήσης και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση email support@heartsine.com για βοήθεια.





HeartSine®

Κεντρικά γραφεία:

HeartSine Technologies Inc
121 Friends Lane
Suite 400
Newtown, PA 18940
Τηλ: 1.215.860.8100
Φαξ: 1.215.860.8192

Κατασκευάζεται από την:

HeartSine Technologies Ltd
Canberra House
203 Airport Road West
Belfast BT3 9ED
Βόρεια Ιρλανδία
Τηλ: +44 (0)28 9093 9400



www.heartsine.com

www.heartsine.eu

support@piggspeak.com

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος