


HeartSine samaritan® PAD
300P Trainer-enhed
model TRN-300-1
Brugervejledning

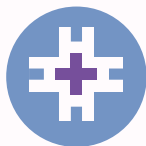

HeartSine®

Denne brugermanual indeholder anvisninger i, hvordan man betjener HeartSine PAD 300P Trainer-enheden (Træningsenhed).

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden er en ikke-medicinsk enhed, der er beregnet til at lære førstehjælpsudøvere, hvordan man anvender HeartSine PAD 300P-hjertestarteren korrekt. Trainer-enheden har ingen terapeutiske egenskaber og må ikke anvendes i virkelige redningssituationer.



VIGTIGT: *For at undgå forvirring i tilfælde af en virkelig redning, må Trainer-enheden ikke opbevares eller efterlades i nærheden af HeartSine PAD-hjertestarteren.*

For at gøre det nemt at identificere HeartSine PAD 300P Trainer-enheden, har den en gul brugergrænseflademembran, hvorimod HeartSine PAD 300P-hjertestarteren har en marineblå/sort membran foran.

HeartSine anbefaler, at førstehjælpsudøvere, der kan komme ud for at anvende en af hjertestarterne, først skal oplæres i hjertestopbehandling med hjertestarter (CPR-D). HeartSine PAD 300P Trainer-enheden er beregnet til anvendelse af godkendte CPR-D-kursusudbydere til dette formål.

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden er konfigureret til at blive anvendt i henhold til de fælles retningslinjer fra American Heart Association/European Resuscitation Council 2010 vedrørende genoplivning. Enheden kommer med seks præprogrammerede scenarier baseret på disse retningslinjer.

Hvis retningslinjerne for genoplivning skulle ændre sig, vil softwaren kunne opgradere HeartSine PAD 300P Trainer-enheden, så disse overholdes. Kontakt venligst din autoriserede HeartSine-forhandler eller HeartSine Technologies direkte.

Når den er tændt, vil HeartSine PAD 300P Trainer-enheden spille hørbare stemmevejledninger med ledsagende visuelle indikatorer. Trainer-enheden kan også styres manuelt med den medfølgende fjernkontrol, der er inkluderet med enheden.

Kontakt din autoriserede HeartSine-forhandler for at få en liste over reservedele.

- 1) Sørg for, at HeartSine PAD 300P Trainer-enheden er helt opladet (se afsnittet Opladning i denne manual).
- 2) Anbring HeartSine PAD 300P Trainer-enheden og Trainer Pad-Pak på en flad overflade. Tryk Trainer Pad-Pak ind i åbningen på HeartSine PAD 300P Trainer-enheden og lyt efter et "klik", så du er sikker på, at den er korrekt anbragt.
- 3) Anbring batterierne, der var vedlagt din Trainer-enheden, i HeartSine PAD-fjernkontrollen.
 *Der må ikke trykkes på nogen knapper, mens der sættes batterier i fjernkontrollen, da dette vil nulstille fjernkontrollens id.*
- 4) Tryk på afbryderknappen på HeartSine PAD 300P Trainer-enheden og lyt til stemmevejledningerne for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
- 5) Hvis HeartSine PAD 300P Trainer-enheden er utilstrækkeligt opladet, vil den ikke fungere korrekt. Når den er tændt, vil statusindikatoren blinke rødt for at indikere, at opladning er påkrævet. Hvis batteriet er helt fladt, vil enheden slet ikke tænde. Se afsnittet Opladning i denne manual for at få detaljerede anvisninger om opladningen.

Sådan tændes og slukkes HeartSine PAD 300P Trainer-enheden

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden tændes ved, at der trykkes på den grønne afbryderknop.



 *Som standard fungerer Trainer-enheden i den sidste scenarieindstilling, der blev anvendt.*

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden slukkes ved, at der trykkes på den grønne afbryderknop igen.

Når HeartSine PAD 300P Trainer-enheden er blevet tændt, kan den slukkes med den vedlagte fjernkontrol. Trainer-enheden slukkes ved, at der trykkes på afbryderknappen (den røde knap) på fjernkontrollen.

 *Når HeartSine PAD 300P Trainer-enheden er tændt, vil den automatisk slukke efter femten minutter, hvis enheden ikke bliver anvendt.*

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden



- A Dataport
- B Lysdiode for batteriets opladningsstatus
- C Statusindikator
- D Stødknop
- E Indikator for sikker at røre
- F Højtaler
- G Pad-Pak-kassette
- H Afbryderknop
- I Indikator for rør ikke
- J Indikator for anbringelse af puder
- K Pile



Afbryderknop

Tryk på denne knap for at tænde og slukke for enheden. (Hvis den trykkes, mens et stød anbefales, udstedes advarslen "Advarsel, afbryderknop trykket"; enheden vil ikke slukke medmindre du trykker på knappen igen inden for tre sekunder).



Indikator for anbringelse af puder

Pilene rundt om dette ikon vil blinke for at instruere brugeren i at fastgøre PAD 300P-puderne på patienten som vist.



Indikatoren for sikker at røre

Det er sikkert at røre ved patienten, når pilene rundt om dette ikon blinker. Du kan udføre genoplivning eller undersøge patienten.



Pile

Pilene rundt om et ikon vil blinke for at indikere handlingerne, som brugeren skal udføre.



Indikatoren for rør ikke

Der må ikke røres ved patienten, når pilene rundt om dette ikon blinker. PAD 300P kan være i færd med at analysere patientens hjerterytme eller ved at gøre klar til at afgive et stød.



Statusindikator

Blinker grønt - Trainer-enheden er klar til brug
Blinker rødt - Trainer-enheden skal oplades



Stødknop

Tryk på denne knap for at simulere afgivelse af et terapeutisk stød.


Sådan anvendes elektroderne

Træningsscenarierne inkluderer hørbare vejledninger, der beder brugeren om at fjerne elektroderne fra Pad-Pak'en og anbringe elektrodepuderne som angivet. Følg trinene nedenfor, når du bliver bedt om dette.

- 1) Træk i den grønne flig for at åbne Trainer Pad-Pak-kassetten og rul elektrodekablerne helt ud.
- 2) Træk elektrodepuderne af deres beskyttende bagbeklædning.
- 3) Anbring elektrodepuderne som indikeret af indikatoren for anbringelse af puder; sternum- og apex-elektrodepuder er tydeligt identificeret på deres respektive puder.
- 4) Tryk puderne forsvarligt ned for at sikre, at der er behørig kontakt.

Opspoling af elektroderne efter anvendelse


- 1) Sæt den beskyttende bagbeklædning tilbage på elektrodepuderne eller udskift med nye puder.
- 2) Fold puderne sammen, således at bagbeklædningen sidder udvendig.
- 3) Lad elektroderne hænge fra enheden og anvend håndtaget på den blå spolemekanisme for at spole elektroderne helt op:

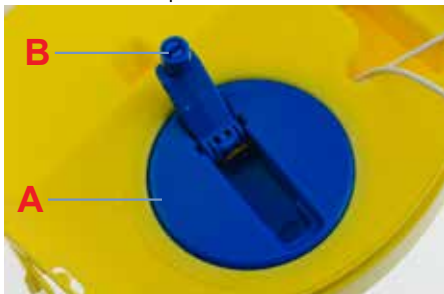

A Spolemekanisme
B Spolehåndtag

- 4) Anbring puderne oven på Pad-Pad-kassetten og sørg for, at ledningerne er under puderne.
- 5) Luk Pad-Pak-kassetten ved at skubbe den gule bakke på plads.

PAD 300P Trainer-fjernkontrol

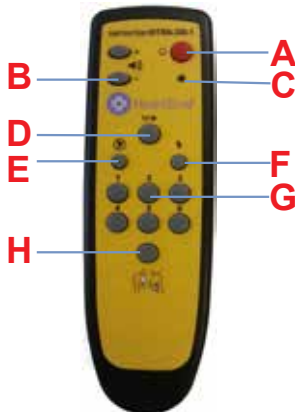

- A Afbryderknap
- B Lydstyrkekontrol
- C Indikator for lavt batteri
- D Pauseknap
- E Intet stød påkrævet-scenarie
- F Stød påkrævet-scenarie
- G Vælg scenarie
- H Fastgør elektrodepuder



Sådan slukker du Trainer-enheden

Fjernkontrollen kan anvendes til at slukke for HeartSine PAD 300P Trainer-enheden. Du slukker for Trainer-enheden ved at trykke på den røde knap på fjernkontrollen.



Sådan ændrer du lydstyrken

Der er fire lydstyrkeindstillinger på HeartSine PAD 300P Trainer-enheden. Lydstyrkekontrolknapperne sidder til venstre for afbryderknappen på fjernkontrollen. For at øge lydstyrken trykkes der på knappen '+', og for at nedsætte lydstyrken trykkes der på knappen '-'.



Sådan sættes Trainer-enheden på pause

Under træning kan HeartSine PAD 300P Trainer-enheden sættes på pause. Sæt Trainer-enheden på pause ved at trykke på knappen Pause (||/▶). Trainer-enheden vil forblive på pause, indtil der trykkes på knappen Pause igen, hvorefter den vil fortsætte med at afspille det valgte scenarie.



Sådan ændres scenariet

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden kommer med seks præprogrammerede træningsscenarier. (Se afsnittet om træningsscenarierne i denne manual for at få yderligere oplysninger om scenarierne). Scenariet kan ændres ved, at du trykker på knappen med det relevante nummer på fjernkontrollen, dvs. at træningsscenarie tre vil blive valgt, hvis du trykker på nummer '3'.

Når scenariet er blevet ændret, vil enheden køre i henhold til detaljerne i afsnittet om scenarier. Enheden vil forblive i dette scenarie, indtil der vælges et nyt.

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden har seks præprogrammerede træningsscenarier at vælge blandt. Alle præprogrammerede scenarier er baseret på AHA/ERC 2010-retningslinjer. Detaljer om scenarierne er givet nedenfor.

Scenarie 1

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Opsætningstilstand | - | "Ring efter lægehjælp", "Træk i den grønne flig" osv. |
| 2. | Brugerintervention | - | Der skal trykkes på knappen "Puder" for at bekræfte, at elektroderne er placeret |
| 3. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 4. | Stød anbefales | - | Bruger skal trykke på stødknappen |
| 5. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov |
| 6. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 7. | Stød ikke anbefalet | - | |
| 8. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov |
| 9. | Gentag | - | Trin 6 til 8 skal gentages indtil der trykkes på afbryderknappen |

Scenarie 2

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Opsætningstilstand | - | "Ring efter lægehjælp", "Træk i den grønne flig" osv. |
| 2. | Brugerintervention | - | Der skal trykkes på knappen "Puder" for at bekræfte, at elektroderne er placeret |
| 3. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 4. | Stød ikke anbefalet | - | |
| 5. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov |
| 6. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 7. | Stød anbefales | - | Bruger skal trykke på stødknappen |
| 8. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov |
| 9. | Gentag | - | Trin 6 til 8 skal gentages indtil der trykkes på afbryderknappen |

Scenarie 3

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 1. | Elektroder | - | Enhed formoder, at elektroderne allerede er fastgjort |
| 2. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 3. | Tjek puder | - | "Tjek puder" |
| 4. | Brugerintervention | - | Der skal trykkes på knappen "Puder" for at bekræfte, at elektroderne er placeret |
| 5. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 6. | Stød anbefales | - | Bruger skal trykke på stødknappen |
| 7. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov |
| 8. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 9. | Stød ikke anbefalet | - | |
| 10. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov |
| 11. | Gentag | - | Trin 3 til 10 skal gentages indtil der trykkes på afbryderknappen |

Scenarie 4

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| 1. | Elektroder | - | Enhed formoder, at elektroderne allerede er fastgjort |
| 2. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 3. | Stød anbefales | - | Bruger skal trykke på stødknappen |
| 4. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov |
| 5. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 6. | Stød anbefales | - | Bruger skal trykke på stødknappen |
| 7. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov |
| 8. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 9. | Stød ikke anbefalet | - | |
| 10. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov |
| 11. | Gentag | - | Trin 5 til 10 skal gentages indtil der trykkes på afbryderknappen |

Scenarie 5

Scenarie 5 er det samme som scenarie 1 med tilføjelsen af hørbare vejledninger i, hvornår der skal udføres kunstigt åndedræt i genoplivningstilstand.

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Opsætningstilstand | - | "Ring efter lægehjælp", "Træk i den grønne flig" osv. |
| 2. | Brugerintervention | - | Der skal trykkes på knappen "Puder" for at bekræfte, at elektroderne er placeret |
| 3. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 4. | Stød anbefales | - | Bruger skal trykke på stødknappen |
| 5. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov; dette omfatter en hørbar indikation af, hvornår der skal udføres kunstigt åndedræt - metronomen ændrer sig fra et "bip" til et "tik" under forløbet af ti kompressioner. |
| 6. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 7. | Stød ikke anbefalet | - | |
| 8. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov; dette omfatter en hørbar indikation af, hvornår der skal udføres kunstigt åndedræt - metronomen ændrer sig fra et "bip" til et "tik" under forløbet af ti kompressioner. |
| 9. | Gentag | - | Trin 6 til 8 skal gentages indtil der trykkes på afbryderknappen |

Scenarie 6

Scenarie 6 er det samme som scenarie 2 med tilføjelsen af hørbare vejledninger i, hvornår der skal udføres kunstigt åndedræt i genoplivningstilstand.

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Opsætningstilstand | - | "Ring efter lægehjælp", "Træk i den grønne flig" osv. |
| 2. | Brugerintervention | - | Der skal trykkes på knappen "Puder" for at bekræfte, at elektroderne er placeret |
| 3. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 4. | Stød ikke anbefalet | - | |
| 5. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov; dette omfatter en hørbar indikation af, hvornår der skal udføres kunstigt åndedræt - metronomen ændrer sig fra et "bip" til et "tik" under forløbet af ti kompressioner. |
| 6. | Monitortilstand | - | "Vurderer hjerterytme", "Rør ikke ved patienten" osv. |
| 7. | Stød anbefales | - | Bruger skal trykke på stødknappen |
| 8. | Genoplivningstilstand | - | Bruger skal anvende genoplivning med rådgivning efter behov; dette omfatter en hørbar indikation af, hvornår der skal udføres kunstigt åndedræt - metronomen ændrer sig fra et "bip" til et "tik" under forløbet af ti kompressioner. |
| 9. | Gentag | - | Trin 6 til 8 skal gentages indtil der trykkes på afbryderknappen |

Fjernkontrollen lader kursusudbyderne kontrollere scenarierne manuelt. Når HeartSine PAD 300P Trainer-enheden er tændt, vil den køre som beskrevet i de angivne træningsscenarier. Kursusudbyderne kan tilsidesætte dette ved at trykke på knappen 'Stød påkrævet', 'Intet stød påkrævet' eller "Fastgør elektrodepuder".



Stød påkrævet

Hvis du trykker på knappen 'Stød påkrævet', vil det resultere i, at HeartSine PAD 300P Trainer-enheden tilsidesætter det valgte træningsscenarie og simulerer en stødbar rytme. Hver efterfølgende analyseperiode vil anbefale, at der skal leveres et stød, indtil enten Trainer-enheden er slukket eller der trykkes på knappen 'Intet stød påkrævet' på fjernkontrollen.



Intet stød påkrævet

Hvis du trykker på knappen 'Intet stød påkrævet', vil det resultere i, at HeartSine PAD 300P Trainer-enheden tilsidesætter det valgte træningsscenarie og simulerer en ikke-stødbar rytme. Hver efterfølgende analyseperiode vil anbefale, at der ikke skal leveres et stød, indtil enten Trainer-enheden er slukket eller der trykkes på knappen 'Stød påkrævet' på fjernkontrollen.



Fastgør elektrodepuder

Hvis der trykkes på knappen 'Fastgør elektrodepuder', vil Trainer-enheden afspille vejledningerne 'Fastgør elektroder' i løbet af analyseperioden. Trainer-enheden vil fortsætte med at afspille vejledningerne til 'Fastgør elektroder', indtil der igen trykkes på knappen 'Fastgør elektrodepuder'.

Håndtering af batteri til HeartSine PAD 300P Trainer-enheden

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden indeholder et genopladeligt batteri. Det anbefales, at du sikrer dig, at HeartSine PAD 300P Trainer-enheden er helt opladet, før du begynder træningsaktiviteterne.

Når HeartSine PAD 300P Trainer-enheden er helt opladet, vil den give dig ca. syv timers anvendelse, før den skal genoplades.

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden vil monitorere batteriets kapacitet, når det er ved at blive dødt. Trainer-enheden vil afspile følgende meddelelse mindst en time før batteriet dør:



"Advarsel. Lavt batteri"

Hvis denne advarsel høres, kan du fortsætte med at anvende din HeartSine PAD 300P Trainer-enheden i en begrænset tidsperiode. Hvis batteriet dør helt, vil Trainer-enheden selv lukke ned. På dette tidspunkt skal Trainer-enheden genoplades.

Opladning og genopladning af HeartSine PAD 300P Trainer-enheden

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden oplades og genoplades sikkert ved at følge anvisningerne nedenfor.

- 1) Isæt opladerens adapter i stikkontakten i siden af HeartSine PAD 300P Trainer-enheden. Sørg for, at adapteren er sat helt ind.
- 2) Tilslut opladeren til forsyningsnettet.
- 3) Lad Trainer-enheden oplade. Lysdioden for batteriets opladningsstatus (ved siden af stikkontakten) vil være rød under hurtigopladning, og vil blinke, når opladningen er næsten færdig. Når opladningen er færdig, vil lysdioden slukke. Det vil tage maksimalt seks timer at oplade en død HeartSine PAD 300P Trainer-enhed.
- 4) Fjern adapteren fra HeartSine PAD 300P Trainer-enheden. Tænd for Trainer-enheden for at sikre, at enheden virker.

Hvis HeartSine PAD 300P Trainer-enheden er tændt, mens den oplades, skal den slukkes, og derefter tændes igen for at genstarte hurtigopladningen.

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden må kun oplades med den oplader, der var vedlagt enheden. Hvis en anden opladningsenhed anvendes, vil det ugyldiggøre garantien, og kan resultere i beskadigelse af HeartSine PAD 300P Trainer-enheden.

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden og opladeren er kun designet til indendørs brug. Må ikke anvendes i våde eller fugtige miljøer.

Der er ingen dele i HeartSine PAD 300P Trainer-enheden, Trainer Pad-Pak eller oplader, der kan serviceres af brugeren. Disse produkter må ikke åbnes. Hvis det usandsynlige skulle ske, at der opstår en fejlfunktion, skal du straks kontakte forhandleren.

Fjernkontrolbatterier

HeartSine PAD 300P Trainer-enhedens fjernkontrol indeholder en advarselsindikator for lavt batteri. Hvis denne indikator blinker rødt to gange, når der trykkes på en knap på fjernkontrollen, er det en indikation for, at batterierne i fjernkontrollen skal udskiftes.

Fjernkontrollen anvender to standard AAA-batterier.

Du kan få adgang til batterierne ved at fjerne batteridækslet bag på fjernkontrollen.



Hvis batterierne indsættes i fjernkontrollen, mens du trykker på afbryderknappen, vil det resultere i, at fjernkontrollen skifter over til tilknytningstilstand og tager en ny transmissions-id. Dette vil være anderledes end det id, der er gemt i Trainer-enheden. Hvis dette sker utilsigtet, vil det være nødvendigt at færdiggøre tilknytningsproceduren til fulde for igen at tilknytte fjernkontrollen til HeartSine PAD 300P Trainer-enheden.

Normal batteriudskiftning er ikke noget problem, da tilknytning kun initieres, når afbryderknappen også holdes nede.

HeartSine PAD 300P Trainer-enhedens konfigurationsværktøj

HeartSine PAD 300P Trainer-enhedens konfigurationsværktøj er en software, der kan downloades gratis fra HeartSines website (www.heartsine.com). Denne software lader dig opgradere din Trainer. De følgende valgmuligheder er tilgængelige:

Sprog

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden kan omprogrammeres til at køre med hørbare vejledninger i en række sprog. Download HeartSine PAD 300P Trainer-enhedens aktuelle brugermanual til konfigurationsværktøjet fra HeartSines website for anvisninger i, hvordan det bruges.

Sådan tilknyttes en fjernkontrol med HeartSine PAD 300P Trainer-enheden

Hver HeartSine PAD 300P Trainer-enhed har en specifik fjernkontrol, der betjener den. Dette gør det muligt, at flere enheder anvendes i nærheden uden interferens. Hvis det usandsynlige skulle ske, at din fjernkontrol ikke længere kan anvendes med din Trainer-enhed, kan det være nødvendigt at tilknytte den til din Trainer-enhed igen.

HeartSine PAD 300P Trainer-enhedens konfigurationsværktøj kan anvendes til at tilknytte en fjernkontrol til din Trainer-enhed. Der er komplette anvisninger i den vedlagte brugermanual.

Enhedsidentifikationer

Hver HeartSine PAD 300P Trainer-enhed har fået et identifikationsnummer mellem 001 og 255 under fremstillingen. Fjernkontrollen for hver Trainer-enhed får dernæst samme identifikationsnummer. Hvis det usandsynlige skulle ske, at to enheder med samme id-nummer anvendes samtidig, skal HeartSine PAD 300P Trainer-enhedens konfigurationsværktøj anvendes til at tildele enhederne nye numre. Det er nødvendigt at tilknytte enheden med dens fjernkontrol, når den har fået et nyt id-nummer.

Det følgende er en kort oversigt over de grundliggende principper for genoplivning for ukyndige reddere som anbefalet af både American Heart Association (AHA) og European Resuscitation Council (ERC) i deres publicerede retningslinjer for genoplivning og kardiovaskulær nødbehandling. Dette er kun beregnet som en hurtig reference for øvede genoplivningsudøvere. HeartSine anbefaler, at alle potentielle brugere af PAD 300P tager et kursus hos en kompetent kursusudbyder i både anvendelsen af genoplivning og PAD 300P, før en PAD 300P sættes i drift. Hvis retningslinjerne skulle ændre sig, vil softwaren kunne opgradere PAD 300P, så disse overholdes. Kontakt venligst din autoriserede HeartSine-forhandler eller HeartSine Technologies direkte.

RING EFTER lægehjælp (112) Bed om en AED (hjertestarter)



Se, føl, lyt



Udfør genoplivning. Følg de seneste AHA- eller ERC-retningslinjer



Anvend en hjertestarter, hvis tilgængelig



Fortsæt med genoplivning, indtil lægehjælpen ankommer. Skift med en anden person efter en cyklus eller 2 minutter

Reagerer personen ikke?

**Tiltal personen og rusk vedkommende i skuldrene
Tilkald lægehjælp**



Åbn luftvejen, undersøg om personen trækker vejret



**Udfør genoplivning, indtil en AED er tilgængelig ELLER akutlægens ankomst
Få andre mennesker til at hjælpe dig og skiftes til at udføre genoplivning**



Hvis en AED er tilgængelig, tændes der for den og anvisningerne følges - AED'en vurderer rytmen

STØD ANBEFALET

INTET STØD ANBEFALET

GIV STØD



Fortsæt genoplivning i 2 minutter

Fortsæt genoplivning i 2 minutter

Fortsæt indtil patienten begynder at vågne, dvs. bevæger sig, åbner øjnene og trækker vejret normalt

Bortskaffelsesanvisninger

HeartSine PAD 300P Trainer-enheden kan genbruges. Hvis enheden vedligeholdes i henhold til anvisningerne i denne manual, har den en garantiperiode på to år fra fremstillingsdatoen. Året for fremstillingen af enheden er angivet med de to første cifre i serienummeret.

Hvis du ønsker at bortskaffe HeartSine PAD 300P Trainer-enheden, skal den bortskaffes på en behørig genbrugsstation i henhold til nationale og lokale bestemmelser. Alternativt kan enheden returneres til den lokale forhandler eller HeartSine Technologies til bortskaffelse.

Bortskaffelse inden for EU:

Heartsine PAD 300P Trainer-enheden må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: opbevar Heartsine PAD 300P Trainer-enheden separat, så den kan genbruges i henhold til direktiv 2002/96/EF af Europaparlamentet og Rådet for Den Europæiske Union vedrørende affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), eller returnér den til din lokale forhandler eller HeartSine Technologies for bortskaffelse.

Undtagelser fra garantien

HeartSine Technologies eller autoriserede forhandlere er ikke forpligtet til at udføre service/reparationer under garantien, hvis:

- a. Der er blevet foretaget uautoriserede modifikationer af enheden.
- b. Der er blevet anvendt ikke-standard-komponenter.
- c. Brugeren ikke har anvendt enheden i henhold til indikationerne for anvendelse eller anvisningerne i denne manual.
- d. Apparatets serienummer er fjernet, gået af, blevet brugt forkert eller blevet ændret.
- e. Enheden, elektroderne eller batterierne opbevares eller anvendes i drift uden for de miljømæssige specifikationer.
- f. Enheden er blevet testet vha. ikke godkendte metoder eller ubehørigt udstyr (se afsnittet Vedligeholdelse i denne manual).

Alle erstatningskrav under garantien skal rettes via din forhandler hos hvem enheden oprindeligt blev købt. Før der udføres service under garantien, kræver HeartSine Technologies dokumentation for købet. Produktet skal anvendes i henhold til brugervejledningen og i henhold til det beregnede formål. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte support@heartsine.com for at få assistance.



HeartSine®

Globalt hovedkvarter:

HeartSine Technologies Inc
121 Friends Lane
Suite 400
Newtown, PA 18940
Tlf.: 1.215.860.8100
Fax: 1.215.860.8192

Fremstillet af:

HeartSine Technologies Ltd
Canberra House
203 Airport Road West
Belfast BT3 9ED
Nordirland
Tlf.: +44 (0)28 9093 9400



www.heartsine.com

www.heartsine.eu

support@heartsine.com

Autoriseret forhandler