



HeartSine

Saver EVO®



Data management Software
for samaritan® PAD & PDU

Οδηγίες χρήσης Saver EVO® για
samaritan® PAD (απινιδωτή δημόσιας
πρόσβασης) και PDU (ατομική μονάδα
απινιδωτή)

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και δεν αποτελούν δέσμευση εκ μέρους της HeartSine Technologies. Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί με κανένος είδους φορμά ή μέσου, είτε ηλεκτρονικού ή μηχανικού, συμπεριλαμβανομένου του φωτοαντίγραφου και της αντιγραφής, για κανένα σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδεια της HeartSine Technologies Inc.

Copyright© 2014 HeartSine Technologies Inc.

Όλα τα δικαιώματα είναι δεσμευμένα.

“samaritan” είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα της HeartSine Technologies Inc.

“Saver” και “SCOPE” είναι εμπορικά σήματα της HeartSine Technologies Inc.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και καταχωρημένα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

Saver EVO® 2014

HeartSine Technologies Ltd.

Canberra House
203 Airport Road West
Belfast
BT3 9ED
Northern Ireland



Τηλέφωνο: +44 28 9093 9400 • Φαξ: +44 28 9093 9401
Ιστοσελίδα: www.heartsine.com • E-mail: support@heartsine.com

Greek
H013-001-312-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Saver EVO

Το λογισμικό Saver EVO σας επιτρέπει να ανακτήσετε δεδομένα συμβάντων απινίδωσης από το samaritan PAD και από την κάρτα μνήμης PDU. Το Saver EVO επιτρέπει επίσης τη διαχείριση των δεδομένων συμβάντων που έχουν αποθηκευτεί στον Η/Υ αναφορικά με την εκτύπωση, την εισαγωγή και την εξαγωγή δεδομένων συμβάντων σε άλλους χρήστες Saver και Saver EVO.








Το Saver EVO παρέχεται με άδεια χρήσης λογισμικού για την εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού σε μονό Η/Υ.

Για λήψη από την τοποθεσία web

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://heartsine.com/support/system-updates/> και κάντε κλικ στη σύνδεση "Download" κάτω από τον τίτλο 'Saver EVO Software'.
2. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εκτελέστε το "SaverEVO_setup.exe" για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Saver EVO. (Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη)
3. Διαβάστε τη σύμβαση άδειας χρήσης. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της σύμβασης αυτής. Για να αποδεχτείτε τους όρους κάντε κλικ στο κουμπί "next" ("επόμενο").
4. Το Saver EVO θα εγκατασταθεί στην προεπιλεγμένη θέση με την τυπική διαμόρφωση. Κάντε κλικ στο κουμπί "I agree" ("συμφωνώ") για αποδοχή. Αυτές οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν θα μεταβληθούν, εκτός εάν είστε προχωρημένος χρήστης.
5. Εάν σας ζητηθεί πιστοποίηση οδηγού συσκευής πατήστε το κουμπί "Continue anyway" ("Συνέχεια").

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για να ανακτήσετε καταγεγραμμένα δεδομένα συμβάντων απινίδωσης από το samaritan PAD ή την μπαταρία του samaritan AED Data-Pak ή την κάρτα μνήμης PDU

1. Συνδέστε την αντίστοιχη συσκευή στον Η/Υ.
2. Ανοίξτε το λογισμικό Saver EVO.
 ή .
3. Κάντε κλικ στο κουμπί .
4. Κάντε κλικ στο κουμπί  για να εμφανιστεί μια λίστα αποθηκευμένων συμβάντων.
5. Επισημάνετε το επιθυμητό καταγεγραμμένο συμβάν από τη λίστα.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί  για να δείτε το συμβάν.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί  και εισάγετε τα στοιχεία του ασθενούς όπως απαιτείται για να αποθηκεύσετε το συμβάν στον Η/Υ.
8. Εάν επιθυμείτε, κάντε κλικ στο κουμπί  για να εκτυπώσετε την καταχώριση συμβάντος.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Saver EVO

Η χρήση του Saver EVO γίνεται μέσω των κουμπιών του λογισμικού. Η οθόνη έναρξης του Saver EVO απεικονίζεται εδώ.



Οθόνη έναρξης
Saver EVO



samaritan PAD – Ανοίγει το μενού των εξειδικευμένων λειτουργιών του PAD. Δείτε τη σελίδα 5 για λεπτομέρειες.



PDU – Ανοίγει το μενού των εξειδικευμένων λειτουργιών του PDU. Δείτε τη σελίδα 12 για λεπτομέρειες.



Manage saved events (Διαχείριση αποθηκευμένων συμβάντων) – Ανοίγει το μενού για τις λειτουργίες που αφορούν ειδικά στα συμβάντα που έχουν αποθηκευτεί στον Η/Υ. Δείτε τη σελίδα 16 για λεπτομέρειες.



Exit Saver (Έξοδος από το Saver) – Έξοδος από το λογισμικό Saver EVO.



Change Saver EVO Settings (Αλλαγή ρυθμίσεων Saver EVO) – Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Saver EVO και επιλογές γλώσσας. Επιτρέπει επίσης στο χρήστη να δει τις πληροφορίες αναθεώρησης του Saver EVO.

Η χρήση των παραπάνω μενού θα αναλυθεί περαιτέρω σε επόμενα κεφάλαια.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Saver EVO ΜΕ ΤΟ samaritan PAD

Για να χρησιμοποιήσετε το Saver EVO με το samaritan PAD θα πρέπει να έχετε το καλώδιο δεδομένων USB που σας παρασχέθηκε μαζί με το PAD ή το λογισμικό Saver EVO.

Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB στο samaritan PAD και στη θύρα USB του Η/Υ σας. Ανοίξτε το λογισμικό Saver EVO.



Κάνοντας κλικ στο κουμπί του Samaritan PAD θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο.



Η οθόνη πρόσβασης
PAD του
Saver EVO



Pad Data (Δεδομένα PAD) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανακτήσετε δεδομένα από το PAD. Δείτε τη σελίδα 6 για λεπτομέρειες.



Change PAD Settings (Αλλαγή ρυθμίσεων PAD) – Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να διεξάγετε διαγνωστικούς ελέγχους ή για να αλλάξετε τη διαμόρφωση (ένταση, γλώσσα ή χρόνο) του samaritan PAD. Δείτε τη σελίδα 8 για λεπτομέρειες.



Back (Πίσω) – Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να επιστρέψετε στην οθόνη έναρξης του Saver EVO.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ samaritan PAD

Για να ανακτήσετε δεδομένα συμβάντων απινίδωσης από το samaritan PAD, βεβαιωθείτε πως το



samaritan PAD είναι συνδεδεμένο στον Η/Υ και κάντε κλικ στο κουμπί δεδομένων PAD. Έτσι θα γίνει αναζήτηση στη μνήμη του

PAD και θα εμφανιστεί η λίστα όλων των καταχωρημένων συμβάντων όπως στην εικόνα.



Η οθόνη λίστας ιστορικού συμβάντων PAD του Saver EVO

Τα συμβάντα που αναγράφονται με πράσινο χρώμα, μαζί με το σύμβολο ✓ είναι συμβάντα που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον Η/Υ.



Save All (Αποθήκευση όλων) – Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό, όλα τα συμβάντα που εμφανίζονται στη λίστα ιστορικού συμβάντων του PAD θα αποθηκευτούν στον Η/Υ σε ένα αρχείο. *Σημείωση: Τα συμβάντα που αποθηκεύονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να ανακτηθούν για επισκόπηση με την παρούσα έκδοση Saver EVO. Για την ανάκτηση συμβάντων από αυτό το αρχείο, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της HeartSine Technologies. Για να αποθηκεύσετε τα συμβάντα μεμονωμένα με σκοπό την ανάκτησή τους αργότερα, ανατρέξτε στη λειτουργία «Save» (Αποθήκευση) της ενότητας ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ samaritan PAD στη σελίδα 7.*



View (Προβολή) – Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό εμφανίζεται το επιλεγμένο συμβάν.



Erase (Διαγραφή) – Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό διαγράφονται όλα τα συμβάντα από το ιστορικό του PAD. Δείτε τη σελίδα 8 για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διαγραφή δεδομένων.




Back (Πίσω) – Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να επιστρέψετε στην οθόνη πρόσβασης του Saver EVO PAD.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ samaritan PAD

Για να προβάλετε ένα συμβάν, επισημάνετε το συμβάν στη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί View



Θα εμφανιστεί το συμβάν απινίδωσης μαζί με το αποτύπωμα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και το ιστορικό συμβάντων σε ένα παράθυρο.

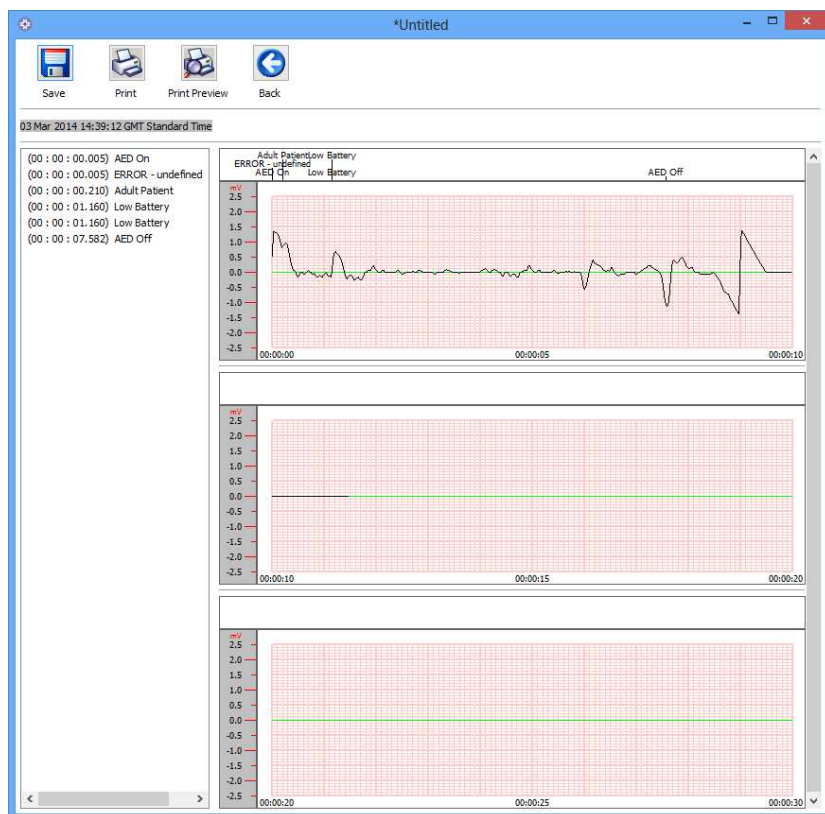

Η οθόνη προβολής συμβάντων PAD του Saver EVO

Μπορείτε τώρα να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το εμφανιζόμενο συμβάν στον Η/Υ κάνοντας κλικ στο



κουμπί Save (Αποθήκευση). Τα συμβάντα που αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ανακτηθούν και να προβληθούν στο Saver EVO. Έτσι παρέχονται οι επιλογές της εισαγωγής πληροφοριών για την αναγνώριση του ασθενούς μέσα από τη λίστα αποθηκευμένων συμβάντων στον Η/Υ. Τα στοιχεία του ασθενούς μπορούν να συνίστανται σε αλφαριθμητικά ψηφία και κάθε πεδίο μπορεί να συμπληρώνεται ή να αφήνεται κενό.

Η οθόνη στοιχείων ασθενούς PAD του Saver EVO

Σημείωση: Μετά την αποθήκευση του δεδομένου συμβάντος στον Η/Υ, η πληροφορία αυτή δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Το παράθυρο προβολής συμβάντων του Saver EVO περιλαμβάνει επίσης τα εξής κουμπιά:



Print Event (Εκτύπωση συμβάντος) – Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να εκτυπώσετε το συμβάν που εμφανίζεται στην οθόνη προβολής.



Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης) – Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό εμφανίζεται στην οθόνη η προεπισκόπηση των δεδομένων που θα εκτυπωθούν.



Back (Πίσω) – Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να επιστρέψετε στην οθόνη λίστας ιστορικού συμβάντων του Saver EVO PAD.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕ ΕΝΑ samaritan PAD



Για να διαγράψετε τη μνήμη από ένα samaritan PAD κάντε κλικ στο κουμπί Erase (διαγραφή)

Ως μέτρο ασφαλείας, το Saver EVO θα σας ζητήσει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας πριν προβείτε στη διαγραφή της μνήμης. Αφού εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης, η μνήμη του samaritan PAD θα διαγραφεί. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης ανατρέξτε στην ενότητα ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ Saver EVO στη σελίδα 18.

Προσοχή: Η HeartSine συνιστά να μεταφορτώσετε την πλήρη μνήμη του PAD πριν τη διαγράψετε. Θα πρέπει να έχετε αποθηκεύσει ασφαλώς τις πληροφορίες αυτές για μελλοντική χρήση.

Συνιστάται, όταν ανακτώνται δεδομένα συμβάντος από το samaritan PAD και αποθηκεύονται στον Η/Υ, να διαγράφονται τα συμβάντα από τη μνήμη του PAD. Έτσι διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα ολόκληρης της μνήμης για την καταχώριση δεδομένων άλλων συμβάντων απινίδωσης.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ samaritan PAD



Το κουμπί change PAD settings (αλλαγή ρυθμίσεων PAD) δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα παραμετροποίησης ορισμένων χαρακτηριστικών του samaritan PAD ως εξής:

- Έλεγχος/Ρύθμιση ώρας
- Διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων

Επιπλέον, οι χρήστες με την αντίστοιχη αρμοδιότητα, μπορούν να αλλάξουν τα εξής:

- Ένταση ήχου
- Γλώσσα
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου μετρονόμου



Πατώντας το κουμπί εμφανίζεται η εξής οθόνη (βλέπε επόμενη σελίδα):



Η οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων PAD του Saver EVO



Check/Set PAD time (Έλεγχος/Ρύθμιση ώρας PAD) – Αυτό το κουμπί επιτρέπει στους χρήστες να συγχρονίσουν την ώρα του samaritan PAD με την ώρα στον Η/Υ τους.



Η οθόνη ώρας PAD του Saver EVO

Πατώντας το κουμπί Synchronise (Συγχρονισμός), η ώρα του samaritan PAD ρυθμίζεται σύμφωνα με την ώρα του Η/Υ με τον οποίο είναι συνδεδεμένο.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Close (Κλείσιμο) επιστρέφετε στην οθόνη αλλαγής ρυθμίσεων PAD του Saver EVO.



Run Diagnostic Tests (Διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων) – Με το κουμπί αυτό ο χρήστης μπορεί να διεξάγει ορισμένους βασικούς ελέγχους για να ελέγξει τη λειτουργία του samaritan PAD. Η πρόσβαση στη λίστα των διαθέσιμων διαγνωστικών ελέγχων αποκτάται μέσω ενός κυλιόμενου μενού στο παράθυρο που ανοίγει από το κουμπί αυτό, όπως απεικονίζεται κάτω.



Η οθόνη διαγνωστικών ελέγχων PAD του Saver EVO




Επεξεργασία διαμόρφωσης PAD – Αυτό το κουμπί δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις έντασης ήχου, γλώσσας και μετρονόμου της συνδεδεμένης συσκευής PAD, καθώς και την εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο «PAD Configuration» (στην παρακάτω εικόνα) για να αλλάξετε την ένταση ήχου, τη γλώσσα και να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τον ήχο του μετρονόμου. Αυτές οι αλλαγές επιβεβαιώνονται μόνο με την εισαγωγή του απαιτούμενου κωδικού πρόσβασης, όταν ζητηθεί. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης ανατρέξτε στην ενότητα ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ Saver EVO στη σελίδα 18.



Η οθόνη επεξεργασίας διαμόρφωσης PAD του Saver EVO

Η πρόσβαση στις επιλογές γλώσσας γίνεται από ένα αναπτυσσόμενο μενού (οι διαθέσιμες γλώσσες εξαρτώνται από τις γλώσσες που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή ή/και από τη χώρα αγοράς).

Σε περίπτωση αλλαγής της γλώσσας, ελέγξτε ότι εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης, όπως φαίνεται παρακάτω. Αν δεν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της HeartSine ή απευθείας με τη HeartSine.

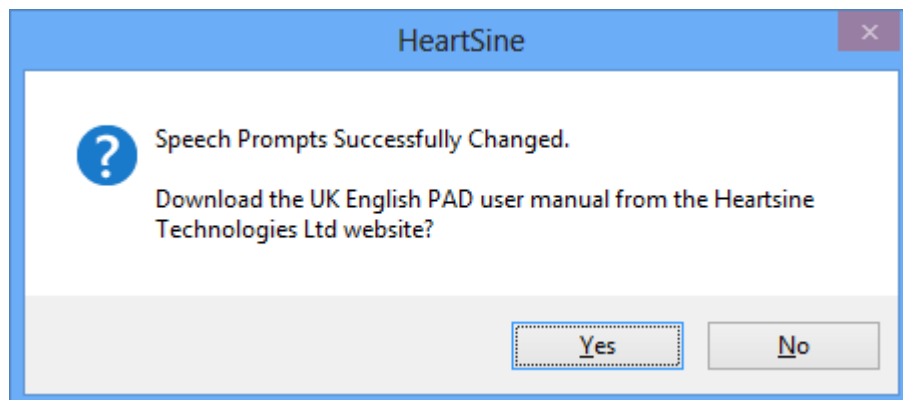

Επίσης, ελέγξτε ότι έχει οριστεί η γλώσσα στο PAD ενεργοποιώντας τη συσκευή και ακούγοντας τα πρώτα μηνύματα.

- Ενήλικος ασθενής/ανήλικος ασθενής
- Καλέστε ιατρική βοήθεια

Όταν βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στη συσκευή η σωστή γλώσσα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Saver EVO ΜΕ PDU

Για να χρησιμοποιήσετε το Saver EVO με τη μνήμη κάρτας samaritan PDU, πρέπει να εισαγάγετε την κάρτα σε μια διάταξη ανάγνωσης καρτών με συμβατότητα MMC/SD, η οποία είτε συνδέεται με τον Η/Υ που λειτουργεί το Saver EVO είτε είναι ενσωματωμένη σε αυτόν. Σημειώνεται πως ενδέχεται να χρειαστούν κάποια δευτερόλεπτα ή ακόμα και περισσότερα από ένα λεπτά για να αναγνωρισθεί η κάρτα από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.



Κάντε κλικ στο κουμπί PDU . Θα ανοίξει το εξής υπομενού:



PDU Data (Δεδομένα PDU) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανακτήσετε δεδομένα συμβάντων από την κάρτα μνήμης PDU. Δείτε τη σελίδα 13 για λεπτομέρειες.



PDU Settings (Ρυθμίσεις PDU) – Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δείτε τις ρυθμίσεις παραμετροποίησης του samaritan PDU Data-Pak. Δείτε τη σελίδα 15 για λεπτομέρειες.



Back (Πίσω) – Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να επιστρέψετε στην οθόνη έναρξης του Saver EVO.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ PDU

Βεβαιωθείτε πως η κάρτα μνήμης samaritan PDU έχει εισαχθεί στον αναγνώστη καρτών SD/MMC και



κάντε κλικ στο κουμπί PDU Data (Δεδομένα PDU). Έτσι θα εμφανιστεί η λίστα των συμβάντων που έχουν καταχωρηθεί στην κάρτα μνήμης.



Η οθόνη λίστας ιστορικού συμβάντων PDU του Saver EVO

Τα συμβάντα με το σύμβολο του ρολογιού ⌚ είναι αυτοέλεγχοι του PDU που διεξάχθηκαν επιτυχώς. Τα συμβάντα που αναγράφονται με πράσινο χρώμα, μαζί με το σύμβολο ✓ είναι συμβάντα που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον Η/Υ.



Save All (Αποθήκευση όλων) – Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας PDU.



View (Προβολή) – Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό εμφανίζεται το επιλεγμένο συμβάν. Δείτε τη σελίδα 14 για λεπτομέρειες.



Erase (Διαγραφή) – Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας PDU.




Back (Πίσω) – Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να επιστρέψετε στην οθόνη πρόσβασης του Saver EVO PDU.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ PDU

Για να προβάλετε ένα συμβάν, επισημάνετε το συμβάν στη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί View



Θα εμφανιστεί το συμβάν απινίδωσης μαζί με το αποτύπωμα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και το ιστορικό συμβάντων σε ένα παράθυρο:

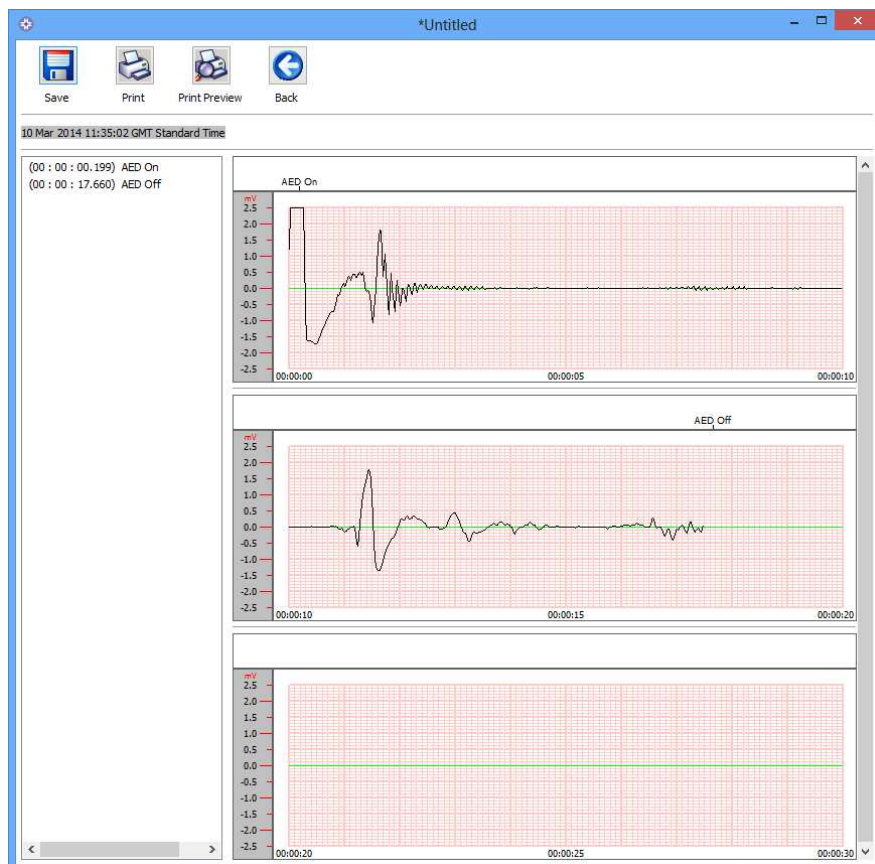

Η οθόνη προβολής
συμβάντων PDU
του Saver EVO

Ο χρήστης μπορεί τώρα να επιλέξει να αποθηκεύσει το εμφανιζόμενο συμβάν στον Η/Υ κάνοντας κλικ



στο κουμπί Save (Αποθήκευση). Έτσι παρέχονται οι επιλογές της εισαγωγής πληροφοριών για την αναγνώριση του ασθενούς. Τα στοιχεία του ασθενούς μπορούν να συνίστανται σε αλφαριθμητικά ψηφία και κάθε πεδίο μπορεί να συμπληρώνεται ή να αφήνεται κενό.

Η οθόνη στοιχείων ασθενούς PDU
του Saver EVO

Σημείωση: Μετά την αποθήκευση του δεδομένου συμβάντος στον Η/Υ, η πληροφορία αυτή δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Το παράθυρο προβολής συμβάντων του Saver EVO περιλαμβάνει επίσης τα εξής κουμπιά:



Print Event (Εκτύπωση συμβάντος) – Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να εκτυπώσετε το συμβάν που εμφανίζεται στην οθόνη προβολής.



Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης) – Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό εμφανίζεται στην οθόνη η προεπισκόπηση των δεδομένων που θα εκτυπωθούν.




Back (Πίσω) – Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να επιστρέψετε στην οθόνη λίστας ιστορικού συμβάντων του Saver EVO PAD.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ PDU.



Κάνοντας κλικ στο κουμπί View Settings (Προβολή ρυθμίσεων), αποκτάτε πρόσβαση στην εξής οθόνη διαμόρφωσης PDU. Μέσω της οθόνης αυτής ο χρήστης μπορεί να δει την ισχύ της μπαταρίας, τις ρυθμίσεις έντασης ηχείου, γλώσσας και μετρονόμου, το ρυθμό και τη διάρκεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) και την ημερομηνία λήξης, την έκδοση λογισμικού και τον αριθμό σειράς παραγωγής της διάταξης PDU. Ο χρήστης μπορεί να δει τις ρυθμίσεις αυτές, αλλά δεν μπορεί να τις τροποποιήσει.

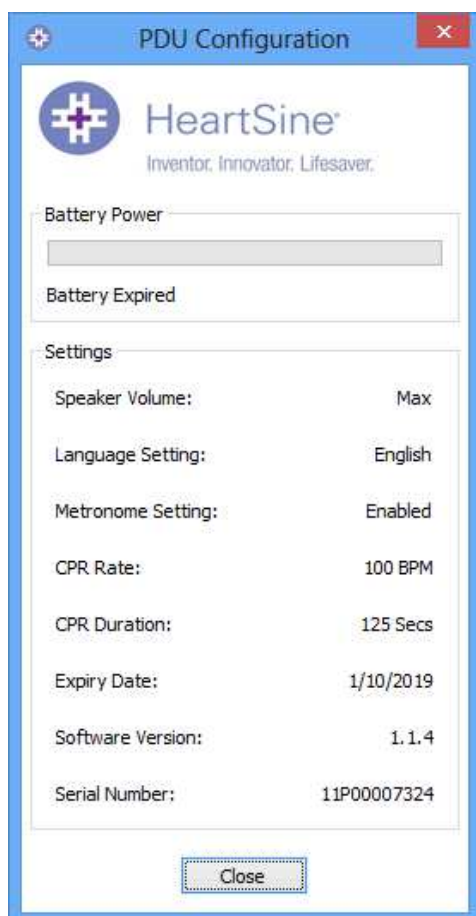

Η οθόνη προβολής ρυθμίσεων PDU του Saver EVO

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Saver EVO ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ



Το κουμπί Manage saved events (Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων) της κύριας οθόνης του Saver EVO δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν δεδομένα συμβάντων που έχουν μεταφορτωθεί από το samaritan PAD, την μπαταρία samaritan Data-Pak ή την κάρτα μνήμης PDU και αποθηκευτεί στον υπολογιστή.

Πατώντας το κουμπί αυτό, θα ανοίξει το εξής παράθυρο:




Επισημαίνοντας ένα συμβάν στη λίστα και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο View (προβολή), θα ανοίξει το αποθηκευμένο συμβάν για να προβληθούν τα δεδομένα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και το ιστορικό συμβάντων.

Εξαγωγή και εισαγωγή

Το Saver EVO διαθέτει λειτουργίες που επιτρέπουν στους χρήστες να στέλνουν ή να λαμβάνουν δεδομένα συμβάντων απινίδωσης από άλλους χρήστες που διαθέτουν το λογισμικό Saver EVO. Για να στείλετε ή να λάβετε αντίγραφα των αποθηκευμένων συμβάντων, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες εξαγωγής και εισαγωγής του Saver EVO.

Για την εξαγωγή συμβάντων.

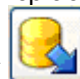1. Από την οθόνη διαχείρισης αποθηκευμένων δεδομένων, επισημάνετε ένα ή περισσότερα συμβάντα που επιθυμείτε να εξάγετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί .
2. Ο Η/Υ θα ρωτήσει σας ζητήσει το φάκελο στον οποίο θέλετε να εξάγετε το αρχείο και να επιλέξετε ένα όνομα για το εξαγόμενο αρχείο.
3. Πατήστε το κουμπί Save (αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε το αρχείο στον επιλεγμένο φάκελο.

Μπορείτε τότε να επισυνάψετε το αρχείο αυτό σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το λογισμικό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και να στείλετε το εξαγμένο αρχείο σε έναν άλλο χρήστη του λογισμικού Saver EVO.

Τα δεδομένα συμβάντων του Saver EVO μπορούν να αναγνωστούν μόνο από έναν άλλο χρήστη Saver EVO. Το προηγούμενο λογισμικό του Saver δεν μπορεί να εισάγει και να προβάλει επιτυχώς δεδομένα από το Saver EVO

Για την εισαγωγή συμβάντων

Για να εισάγετε συμβάντα και να τα προβάλετε στον Η/Υ σας, το αρχείο που σας έστειλε ένας άλλος χρήστης του Saver ή του Saver EVO, πρέπει να αποθηκευτεί σε ένα φάκελο του Η/Υ σας.

1. Από την οθόνη διαχείρισης αποθηκευμένων συμβάντων του Saver EVO κάντε κλικ στο κουμπί



2. Ανατρέξτε στο φάκελο όπου αποθηκεύτηκε το αρχείο και ανοίξτε το.
3. Τα συμβάντα θα προστεθούν στη λίστα των αρχείων Saver EVO στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να τα προβάλετε επιλέγοντας το συμβάν από τη λίστα και πατώντας το κουμπί View (προβολή).

Το Saver EVO εισάγει και προβάλει σωστά δεδομένα συμβάντων που έχουν εξαχθεί από την προηγούμενη έκδοση λογισμικού που ονομάζεται Saver.

Για τη διαγραφή αποθηκευμένων συμβάντων

Τα αποθηκευμένα συμβάντα μπορούν να διαγραφούν από τη μνήμη του υπολογιστή σας μέσω του Saver EVO. Τα συμβάντα διαγράφονται ξεχωριστά επιλέγοντας το ή τα συμβάντα προς διαγραφή (είναι δυνατή η επιλογή πολλών συμβάντων).

Αφού επιβεβαιώσετε πως έχετε επιλέξει μόνο τα συμβάντα που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο κουμπί



Erase (διαγραφή) . Ως μέτρο ασφαλείας, το Saver EVO θα σας ζητήσει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας πριν προβείτε στη διαγραφή της μνήμης. Αφού εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης, η μνήμη από τα επιλεγμένα συμβάντα θα διαγραφεί από τον υπολογιστή σας.


Προσοχή: Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει μόνο τα συμβάντα που επιθυμείτε να διαγράψετε πριν προβείτε στη διαγραφή. Αφού διαγραφούν από τη μνήμη του υπολογιστή σας, τα συμβάντα δεν μπορούν να ανακτηθούν και θα χαθούν όλες οι πληροφορίες.


ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ Saver EVO

Το Saver EVO διαθέτει ορισμένες λειτουργίες που μπορούν να μεταβληθούν ή να συμπληρωθούν μόνο με την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Έτσι, οι διαχειριστές του λογισμικού μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες μόνο σε εγκεκριμένους χρήστες. Το Saver EVO αποστέλλεται με τον κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο στη λέξη "password".

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να κάνετε τα εξής:



Από αυτή την κεντρική οθόνη του Saver EVO κάντε κλικ στο μικρό εικονίδιο . Θα ανοίξει το εξής παράθυρο:

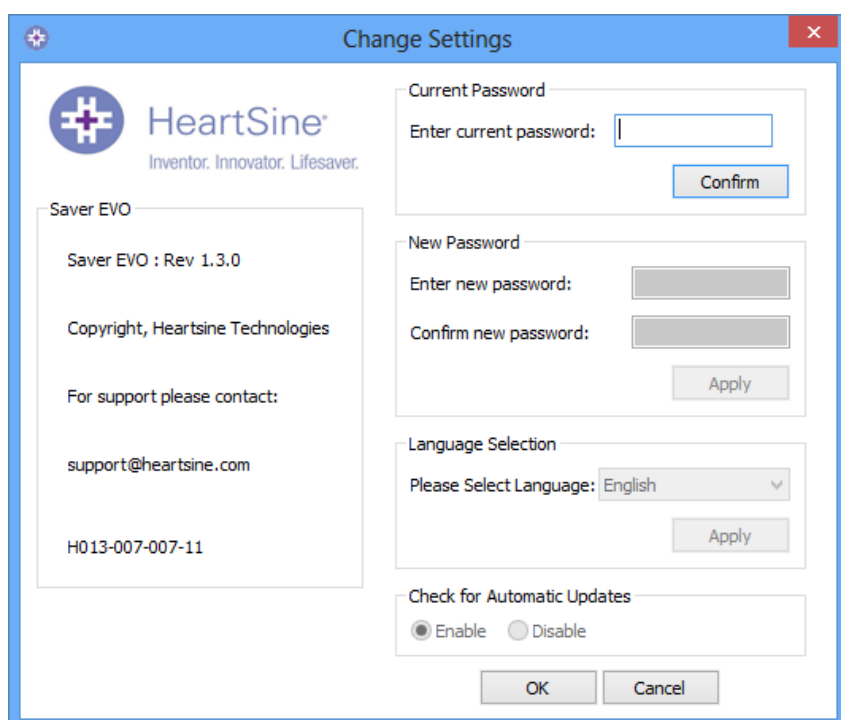


Εισαγάγετε τον ισχύοντα κωδικό πρόσβασης και πατήστε “Confirm” (Επιβεβαίωση). Έτσι θα μπορείτε να εισαγάγετε και να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό σας.

Πατήστε “Apply” (Εφαρμογή) για να προβείτε στην αλλαγή. Θα εμφανιστεί επιβεβαίωση επιτυχούς αλλαγής του κωδικού πρόσβασης. Πατήστε OK στην επιβεβαίωση αυτή και ξανά “OK” στο παράθυρο Change Password (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης) για να εξέλθετε από τη λειτουργία αυτή.


Σημειώνεται πως εάν προβείτε σε επανεγκατάσταση του Saver EVO, ο κωδικός πρόσβασης θα επανέλθει στην αρχική ρύθμιση του λογισμικού. Η ενέργεια αυτή ωστόσο δεν θα αφαιρέσει κανένα προαποθηκευμένο δεδομένο συμβάντος.

Επιλογή γλώσσας

Για να επιλέξετε τη γλώσσα του λογισμικού Saver EVO, επιλέξτε γλώσσα από την κυλιόμενη λίστα και πατήστε apply (εφαρμογή).

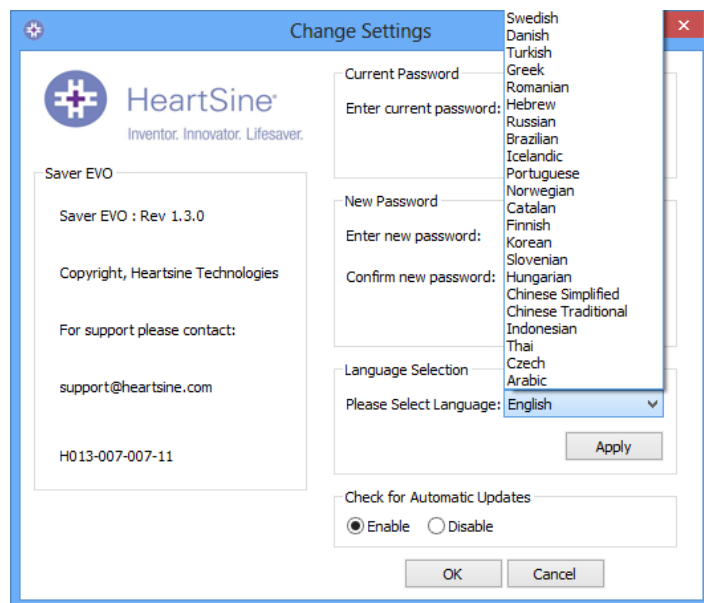

Πατώντας apply θα εμφανιστεί η εξής οθόνη και θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του Saver EVO για να ισχύσει η νέα γλώσσα.

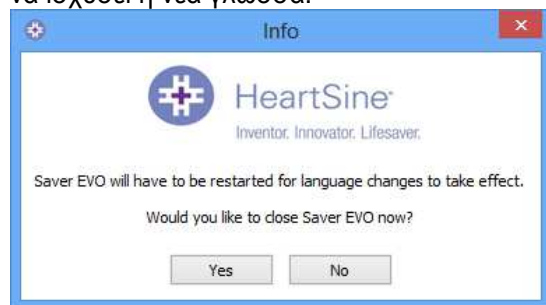

Αναζήτηση αυτόματων ενημερώσεων

Εάν η επιλογή Enable (Ενεργοποίηση) είναι επιλεγμένη, σε κάθε εκκίνηση του Saver EVO θα επιχειρείται σύνδεση με τον ιστότοπο της Heartsine με σκοπό την αναζήτηση πιο πρόσφατων εκδόσεων του Saver EVO. Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανίζεται το επόμενο παράθυρο κατά την εκκίνηση του Saver EVO.



Πατήστε Yes (Ναι) ή No (Όχι), ανάλογα με το εάν επιθυμείτε ή όχι να μεταφορτώσετε τη νεότερη έκδοση του Saver EVO.