



HeartSine samaritan® PAD
SAM 500P Trainer
μοντέλο TRN-500-1
Εγχειρίδιο χρήστη



HeartSine®

Στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη περιέχονται οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer (συσκευή εκπαίδευσης).

Το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer είναι μια μη ιατρική συσκευή που προορίζεται για την εκπαίδευση απόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες στη σωστή χρήση του αυτόματου εξωτερικού απνιδωτή heartSine samaritan PAD 500P της HeartSine. Η συσκευή εκπαίδευσης (Trainer) δεν έχει θεραπευτικές δυνατότητες και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πραγματικές περιστάσεις διάσωσης.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: *Για να αποφευχθεί η σύγχυση στις περιπτώσεις των πραγματικών καταστάσεων διάσωσης, μην φυλάσσετε ή αφίνετε το Trainer κοντά στον αυτόματο εξωτερικό απνιδωτή HeartSine samaritan PAD 500P.*

Για τη γρήγορη και εύκολη αναγνώρισή της, η συσκευή HeartSine samaritan PAD 500P Trainer της HeartSine περιλαμβάνει κίτρινη μεμβράνη πρόσοψης διεπαφής χρήστη, σε αντίθεση με τον αυτόματο εξωτερικό απνιδωτή HeartSine samaritan PAD 500P της HeartSine που διαθέτει σκούρα μπλε/μαύρη μεμβράνη πρόσοψης.

Η HeartSine συνιστά στα άτομα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν έναν από τους απνιδωτές της να εκπαιδευτούν στην αναζωγόνηση με χρήση απνιδωτή (CPR-D). Η συσκευή HeartSine samaritan PAD 500P Trainer προορίζεται για χρήση από εγκεκριμένους εκπαίδευτές CPR-D για τον σκοπό αυτόν.

Η συσκευή HeartSine samaritan PAD 500P Trainer έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά ούτως να λειτουργεί σύμφωνα με τις κοινές οδηγίες του έτους 2015 που εξέδωσε η Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωγόνησης σχετικά με την καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση (ΚΑΡΠΑ). Η συσκευή διαθέτει έξι προ-προγραμματισμένα σενάρια με βάση αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Σε περίπτωση που οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ΚΑΡΠΑ αλλάζουν, θα διατεθεί λογισμικό για την ανάλογη αναβάθμιση της συσκευής HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της HeartSine ή απευθείας με την HeartSine Technologies.

Μόλις ενεργοποιηθεί, η συσκευή HeartSine PAD Trainer αναπαράγει φωνητικά μηνύματα που συνοδεύονται από οπτικές ενδείξεις. Η συσκευή HeartSine samaritan PAD 500P Trainer μπορεί επίσης να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.

Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της HeartSine για να λάβετε τον κατάλογο των ανταλλακτικών.

Προετοιμασία του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer για χρήση


- 1) Βεβαιωθείτε πως το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer είναι πλήρως φορτισμένο (δείτε την ενότητα «Φόρτιση» στο παρόν εγχειρίδιο).
- 2) Τοποθετήστε το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer και το Trainer-Pak™ σε επίπεδη επιφάνεια. Πιέστε το Trainer-Pak στο άνοιγμα του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο (κλικ) που επιβεβαιώνει τη σωστή εισαγωγή του.
- 3) Τοποθετήστε τις μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το Trainer στο τηλεχειριστήριο του HeartSine PAD.

 Μην πατήσετε κάποιο κουμπί όσο τοποθετείτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, καθώς έτσι θα γίνει επαναφορά του αναγνωριστικού αριθμού του τηλεχειριστηρίου.

- 4) Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer και ακούστε τα φωνητικά μηνύματα που επιβεβαιώνουν τη λειτουργία της μονάδας.
- 5) Εάν το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer δεν είναι επαρκώς φορτισμένο, δεν θα λειτουργεί σωστά. Όταν ενεργοποιείται, η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα υποδεικνύοντας ότι απατείται φόρτιση. Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί πλήρως, η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί. Για πλήρεις οδηγίες σχετική με τη φόρτιση, δείτε την ενότητα «Φόρτιση» στο παρόν εγχειρίδιο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

Για να ενεργοποιήσετε το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer, πατήστε το πράσινο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off).

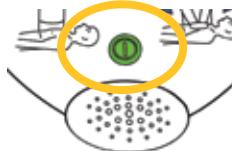

 Το Trainer έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με το τελευταίο σενάριο που χρησιμοποιήθηκε.

Για να απενεργοποιήσετε το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer, πατήστε ξανά το κουμπί On/Off.

Αφού ενεργοποιηθεί, το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer μπορεί να απενεργοποιηθεί με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. Για να απενεργοποιήσετε το Trainer, πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης (κόκκινο κουμπί) του τηλεχειριστηρίου.

 Αφού ενεργοποιηθεί, το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer απενεργοποιείται αυτόμata μετά από δεκαπέντε λεπτά, εφόσον δεν χρησιμοποιείται.

HeartSine samaritan PAD 500P Trainer



Πλήκτρο ενέργοτοίσης/απενέργοτοίσης (On/Off)

Πατήστε αυτό το κουμπί για ενέργοτοίση ή απενέργοτοίση της συσκευής. (Εάν πατήθει όταν υποδεικνύεται η πραγματοποίηση ηλεκτροσόκ, ακούνεται το εχής πραειδοποιητικό μήνυμα «Προειδοποίηση, πατήθηκε το κουμπί απενέργοτοίσης». Η συσκευή δεν θα απενέργοτοίσει αν δεν πατήσετε ξανά το κουμπί εντός τριών δευτερολέπτων.)



Ένδειξη τοποθέτησης επαφέων

Τα βέλη ενέργειών γύρω από αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνουν για να διποτοήσουν τον χρήστη πώς πρέπει να τοποθετηθούν οι επαφέις (pads) του HeartSine samaritan PAD 500P στον ασθενή σύμμωνα με τις ενδείξεις.



Ένδειξη «ασφαλές να αγγίζετε»

Είναι ασφαλές να αγγίζετε τον ασθενή όταν τα βέλη ενέργειών γύρω από αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνουν. Μπορείτε να εκτελέσετε ΚΑΡΠΑ ή να ελέγξετε τον ασθενή.



Ένδειξη κατάστασης

Αναβοσβήνει πράσινο - Το Trainer είναι έτοιμο για χρήση
Αναβοσβήνει κόκκινο - Το Trainer χρειάζεται φόρτιση

A Θύρα δεδομένων

B Λυχνία LED κατάστασης φόρτισης μπαταρίας

C Ένδειξη κατάστασης

D Κουμπί ηλεκτροσόκ

E Ένδειξη «μην αγγίζετε»

F Ηχείο

G Φυσιγγιο Trainer-Pak

H Πλήκτρο ενέργοτοίσης/απενέργοτοίσης

I Ένδειξη «ασφαλές να αγγίζετε»

J Ένδειξη ΚΑΡΠΑ

K Ένδειξη τοποθέτησης επαφέων

L Βέλη ενέργειών



Βέλη ενέργειών

Τα βέλη ενέργειών γύρω από ένα εικονίδιο αναβοσβήνουν για να υποδείξουν τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης.



Ένδειξη «μην αγγίζετε»

Μην αγγίζετε τον ασθενή όταν τα βέλη ενέργειών γύρω από αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνουν. Η συσκευή HeartSine samaritan PAD 500P μπορεί να αναλύει το καρδιακό ρυθμό του ασθενή ή να εισηγάγεται για χορήγηση ηλεκτροσόκ.



Κουμπί ηλεκτροσόκ

Πατήστε το κουμπί για την προσομοιωση της χορήγησης θεραπευτικού ηλεκτροσόκ.



Ένδειξη ΚΑΡΠΑ

Προκειται για μια διάταξη λυχνιών που παρέχει μια διαβασμένη ένδειξη της δύναμης που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια των μαλάζεων στην ΚΑΡΠΑ. Οταν οι πράσινες λυχνίες είναι αναμμένες, η δύναμη που εφαρμόζεται στις μαλάζεις θεωρείται επαρκής.

Διαχείριση των ηλεκτροδίων


Χρήση των ηλεκτροδίων

Τα εκταιδευτικά σενάρια περιλαμβάνουν ηχητικές ειδοποιήσεις για την αφάίρεση των ηλεκτροδίων από το Trainer-Pak και την τοποθέτηση των επαφέων των ηλεκτροδίων σύμφωνα με τις ενδείξεις. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν σας ζητηθεί.

- 1) Τραβήξτε την πράσινη ταινία για να ανοίξετε το φυσίγγιο του Trainer-Pak και επεκτείνετε πλήρως τα καλώδια των ηλεκτροδίων.
- 2) Ξεκολλήστε τους επαφέις των ηλεκτροδίων από τις προστατευτικές επενδύσεις τους.
- 3) Τοποθετήστε τους επαφέις των ηλεκτροδίων όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη τοποθέτησης ηλεκτροδίων. Οι επαφέις των ηλεκτροδίων στέρνουν (sternum) και κορυφής (apex) φέρουν σαφέις αναγνωριστικές ενδείξεις.
- 4) Πιέστε με δύναμη τους επαφέις για να βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείται σωστή επαφή.

Ανατύλιξη των ηλεκτροδίων μετά τη χρήση


- 1) Τοποθετήστε ξανά τις προστατευτικές επενδύσεις στους επαφέις των ηλεκτροδίων ή αντικαταστήστε τους με νέους επαφέις.
- 2) Διπλώστε τους επαφέις μεταξύ τους έτσι ώστε η επένδυση να βρίσκεται προς τα έξω.
- 3) Αφήστε τα ηλεκτρόδια να κρέμονται από τη συσκευή και χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή στον μπλε μηχανισμό περιτύλιξης για να τυλίξετε πλήρως τα ηλεκτρόδια:

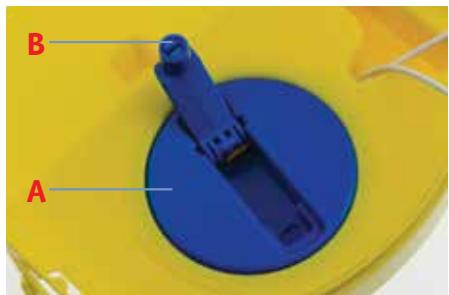

A Μηχανισμός περιτύλιξης
B Χειρολαβή περιτύλιξης

- 4) Τοποθετήστε τους επαφέις επάνω από το φυσίγγιο του Trainer-Pak και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια βρίσκονται κάτω από τους επαφέις.
- 5) Κλείστε το φυσίγγιο του Trainer-Pak σύροντας την κίτρινη θήκη στη θέση της.

Τηλεχειριστήριο του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

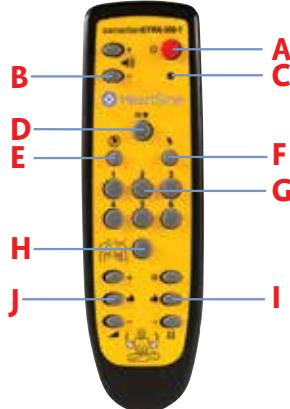


- A Κουμπί απενεργοποίησης
- B Ρυθμιστικό έντασης ήχου
- C Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- D Κουμπί παύσης
- E Σενάριο «δεν απαιτείται ηλεκτροσόκ»
- F Σενάριο «απαιτείται ηλεκτροσόκ»
- G Επιλογή σεναρίου
- H Τοποθέτηση επαφών ηλεκτροδίων
- I Έλεγχος δύναμης CPR Advisor
- J Έλεγχος ρυθμού CPR Advisor



Απενεργοποίηση του Trainer

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Για να απενεργοποιήσετε το Trainer, πατήστε το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

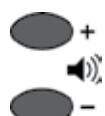


Αλλαγή έντασης ήχου

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα έντασης ήχου στο HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Τα κουμπιά ελέγχου της έντασης βρίσκονται στα αριστερά του κουμπιού απενεργοποίησης του τηλεχειριστήριου. Για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε το κουμπί «+» και για να τη μειώσετε, το κουμπί «-».



Παύση του Trainer

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Για την παύση του Trainer, πατήστε το κουμπί Παύσης (||▶). Το Trainer θα παραμείνει σε παύση έως ότου πατήσετε ξανά το κουμπί παύσης, οπότε θα συνεχιστεί η αναπαραγωγή του επιλεγμένου σεναρίου.

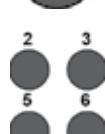

Αλλαγή σεναρίου

Το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer διαθέτει έξι προ-προγραμματισμένα εκπαίδευτικά σενάρια. (Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα εκπαίδευτικά σενάρια, δείτε την αντίστοιχη ενότητα του παρόντος εγχειρίδιου). Μπορείτε να αλλάξετε σενάρια πατώντας το κουμπί του αντίστοιχου αριθμού σεναρίου στο τηλεχειριστήριο, π.χ. πατώντας το κουμπί «3» επιλέγετε το σενάριο τρία.

Αφού αλλάξει το σενάριο, η συσκευή θα λειτουργήσει όπως περιγράφεται στην ενότητα περιγραφής των σεναρίων. Η συσκευή παραμένει στο σενάριο αυτό έως ότου επιλεγεί κάποιο άλλο σενάριο.

Προ-προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σενάρια

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε έξι προ-προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σενάρια στο HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Όλα τα προ-προγραμματισμένα σενάρια βασίζονται στις κατεύθυντηριες οδηγίες των AHA/ERC του 2015. Παρακάτω περιγράφονται οι λεπτομέρειες των σεναρίων.

Σενάριο 1

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Τρόπος λειτουργίας ρύθμισης | - «Καλέστε ιατρική βοήθεια», «Τραβήξτε την πράσινη ταινία», κλπ |
| 2. Παρέμβαση χρήστη | - Πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Pads» (επαφείς) για να επιβεβαιωθεί η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων |
| 3. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 4. Συνιστάται ηλεκτροσόκ | - Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ |
| 5. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 6. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 7. Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ | - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 8. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - Επανάληψη των βημάτων 6 έως 8 ότου πατηθεί το κουμπί «On/Off» |
| 9. Επανάληψη | |

Σενάριο 2

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Τρόπος λειτουργίας ρύθμισης | - «Καλέστε ιατρική βοήθεια», «Τραβήξτε την πράσινη ταινία», κλπ |
| 2. Παρέμβαση χρήστη | - Πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Pads» (επαφείς) για να επιβεβαιωθεί η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων |
| 3. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 4. Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ | - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 5. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - «Αξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 6. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ |
| 7. Συνιστάται ηλεκτροσόκ | - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές |
| 8. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - Επανάληψη των βημάτων 6 έως 8 ότου πατηθεί το κουμπί «On/Off» |
| 9. Επανάληψη | |

Προ-προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σενάρια

Σενάριο 3

1. Ηλεκτρόδια
 2. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης
 3. Έλεγχος επαφέων
 4. Παρέμβαση χρήστη
 5. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης
 6. Συνιστάται ηλεκτροσόκ
 7. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ
 8. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης
 9. Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ
 10. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ
 11. Επανάληψη
- Η συσκευή υποθέτει πως τα ηλεκτρόδια έχουν ήδη τοποθετηθεί «Άξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ
 - «Ελέγχετε τους επαφείς»
 - Πρέπει να πατηθεί το κουμπί «PadS» (επαφείς) για να επιβεβαιωθεί η τοποθετηση των ηλεκτροδίων
 - «Άξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ
 - Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ
 - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές
 - «Άξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ
 - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές
 - Επανάληψη των βημάτων 3 έως 10 έως ότου πατηθεί το κουμπί «On/Off»

Σενάριο 4

1. Ηλεκτρόδια
 2. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης
 3. Συνιστάται ηλεκτροσόκ
 4. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ
 5. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης
 6. Συνιστάται ηλεκτροσόκ
 7. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ
 8. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης
 9. Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ
 10. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ
 11. Επανάληψη
- Η συσκευή υποθέτει πως τα ηλεκτρόδια έχουν ήδη τοποθετηθεί «Άξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ
 - Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ
 - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές
 - «Άξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ
 - Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ
 - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές
 - «Άξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ
 - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές
 - Επανάληψη των βημάτων 5 έως 10 έως ότου πατηθεί το κουμπί «On/Off»

Προ-προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σενάρια

Σενάριο 5

Το Σενάριο 5 είναι ίδιο με το Σενάριο 1 με την προσθήκη ηχητικών ενδείξεων για τους χρόνους εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΚΑΡΠΑ.

1. Τρόπος λειτουργίας ρύθμισης
 2. Παρέμβαση χρήστη
 3. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης
 4. Συνιστάται ηλεκτροσόκ
 5. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ
 6. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης
 7. Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ
 8. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ
 9. Επανάληψη
- «Καλέστε ιατρική βοήθεια», «Τραβήξτε την πράσινη ταϊνία», κλπ
 - Πρέτει να πατηθεί το κουμπί «PadS» (επαφείς) για να επιβεβαιωθεί η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων
 - «Άξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ
 - Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ
 - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές, αυτό περιλαμβάνει μια ηχητική ένδειξη των κατάλληλων χρόνων εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης - ο μετρονόμος αλλάζει από ήχο «μπιππ» σε «τίκ» καθ' όλη τη διάρκεια των δέκα μαλάξεων.
 - «Άξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ
 - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές, αυτό περιλαμβάνει μια ηχητική ένδειξη των κατάλληλων χρόνων εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης - ο μετρονόμος αλλάζει από ήχο «μπιππ» σε «τίκ» καθ' όλη τη διάρκεια των δέκα μαλάξεων.
 - Επανάληψη των βημάτων 6 έως 8 ότου πατηθεί το κουμπί «On/Off»

Προ-προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σενάρια

Σενάριο 6

Το Σενάριο 6 είναι ίδιο με το Σενάριο 2 με την προσθήκη ηχητικών ενδείξεων για τους χρόνους εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΚΑΡΠΑ.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Τρόπος λειτουργίας ρύθμισης | - «Καλέστε ιατρική βοήθεια», «Τραβήξτε την πράσινη ταϊνία», κλπ |
| 2. Παρέμβαση χρήστη | - Πρέτει να πατηθεί το κουμπί «PadS» (επαφείς) για να επιβεβαιωθεί η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων |
| 3. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - «Άξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 4. Δεν συνιστάται ηλεκτροσόκ | - |
| 5. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές, αυτό περιλαμβάνει μια ηχητική ένδειξη των κατάλληλων χρόνων εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης - ο μετρονόμος αλλάζει από ήχο «μπιππ» σε «τίκ» καθ' όλη τη διάρκεια των δέκα μαλάξεων. |
| 6. Τρόπος λειτουργίας παρακολούθησης | - «Άξιολόγηση καρδιακού ρυθμού», «Μην αγγίζετε τον ασθενή», κλπ |
| 7. Συνιστάται ηλεκτροσόκ | - Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί ηλεκτροσόκ |
| 8. Τρόπος λειτουργίας ΚΑΡΠΑ | - Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει ΚΑΡΠΑ με τις αντίστοιχες συμβουλές, αυτό περιλαμβάνει μια ηχητική ένδειξη των κατάλληλων χρόνων εκτέλεσης των αναπνοών διάσωσης - ο μετρονόμος αλλάζει από ήχο «μπιππ» σε «τίκ» καθ' όλη τη διάρκεια των δέκα μαλάξεων. |
| 9. Επανάληψη | - Επανάληψη των βημάτων 6 έως 8 ότου πατηθεί το κουμπί «On/Off» |

Χειροκίνητος έλεγχος του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

Το τηλεχειριστήριο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν το σενάριο χειροκίνητα. Όταν ενεργοποιείται, το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer λειτουργεί όπως περιγράφεται στην ενότητα των εκπαιδευτικών σεναρίων. Οι εκπαιδευτές μπορούν να παρακάμψουν αυτό το στάδιο αυτό πατώντας το κουμπί «Απαιτείται ηλεκτροσόκ», «Δεν απαιτείται ηλεκτροσόκ» ή «Τοποθέτηση επαφέων ηλεκτροδίων».



Απαιτείται ηλεκτροσόκ

Πατώντας το κουμπί «Απαιτείται ηλεκτροσόκ», το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer παρακάμπτει το επιλεγμένο εκπαιδευτικό σενάριο και προσομοιώνει έναν ανατάξιμο ρυθμό. Κάθε επακόλουθη περίοδος ανάλυσης θα προτείνει τη χορήγηση ηλεκτροσόκ έως ότου απενεργοποιηθεί το Trainer ή πατηθεί το κουμπί «Δεν απαιτείται ηλεκτροσόκ» στο τηλεχειριστήριο.



Δεν απαιτείται ηλεκτροσόκ

Πατώντας το κουμπί «Δεν απαιτείται ηλεκτροσόκ», το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer παρακάμπτει το επιλεγμένο εκπαιδευτικό σενάριο και προσομοιώνει έναν μη ανατάξιμο ρυθμό. Κάθε επακόλουθη περίοδος ανάλυσης θα προτείνει τη μη χορήγηση ηλεκτροσόκ έως ότου απενεργοποιηθεί το Trainer ή πατηθεί το κουμπί «Απαιτείται ηλεκτροσόκ» στο τηλεχειριστήριο.



Τοποθέτηση επαφέων ηλεκτροδίων

Εάν πατηθεί το κουμπί 'Τοποθέτηση επαφέων ηλεκτροδίων', το Trainer αναπαράγει τις ειδοποιήσεις 'Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια' κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάλυσης της λειτουργίας. Το Trainer θα συνεχίσει να αναπαράγει τις ειδοποιήσεις 'Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια' μέχρι να πατηθεί ξανά το κουμπί 'Τοποθέτηση επαφέων ηλεκτροδίων'.

HeartSine samaritan PAD με CPR Advisor, μοντέλο 500P

Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής HeartSine samaritan PAD 500P περιλαμβάνει μια μονάδα ανάδρασης ΚΑΡΠΑ που ονομάζεται 'CPR Advisor'. Το HeartSine samaritan PAD 500P χρησιμοποιεί τη λειτουργία CPR Advisor ως ένα απλό μέσο αξιολόγησης της ποιότητας της ΚΑΡΠΑ που εκτελεί ο διασώστης. Εάν χρειάζεται, ο διασώστης ειδοποιείται να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη δύναμη μέχρι να επιτύχει επαρκές επίπεδο δύναμης στις μαλάζεις που πραγματοποιεί.

Εάν η δύναμη που εφαρμόζεται στις μαλάζεις θεωρηθεί επαρκής, το CPR Advisor αναλύει στη συνέχεια τον ρυθμό εκτέλεσης των μαλάζεων. Ο διασώστης θα ειδοποιηθεί να πραγματοποιήσει τις μαλάζεις πιο γρήγορα ή πιο αργά, όπως ενδείκνυται.

Εάν η δύναμη και η ταχύτητα της παρεχόμενης ΚΑΡΠΑ είναι επαρκείς, το HeartSine samaritan PAD 500P θα αναπαράγει την ειδοποίηση 'Καλές μαλάζεις'.

Όλες οι ηχητικές ειδοποιήσεις συνοδεύονται από οπτικές ειδοποιήσεις στο εικονίδιο της ένδειξης ΚΑΡΠΑ.

Εκπαίδευτική ενότητα CPR Advisor

Εκπαίδευση στο CPR Advisor

Οι εκπαίδευτές μπορούν να προσομοιώσουν τη λειτουργία του CPR Advisor στο HeartSine samaritan PAD 500P Trainer χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Οι εκπαίδευτές πρέπει να παρατηρούν την ΚΑΡΠΑ που εκτελεί ο διοσσώστης που εκπαίδευται και να πατούν το κατάλληλο κουμπί ανάλογα με τα τεκταινόμενα.

Το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer θα θεωρήσει αρχικά ότι οι μαλάξεις εκτελούνται σωστά και θα αναπαράγει την ηχητική ειδοποίηση:



«Καλές μαλάξεις»

Τα κουμπιά ελέγχου της ΚΑΡΠΑ βρίσκονται στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Τα κουμπιά στην αριστερή πλευρά χρησιμοποιούνται για την υπόδειξη του ρυθμού με τον οποίο εκτελεί τις μαλάξεις ο εκπαίδευτος και τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά χρησιμοποιούνται για την υπόδειξη της δύναμης με την οποία εκτελούνται οι μαλάξεις.

Ρυθμός μαλάξεων

Γρήγορες μαλάξεις

Σωστός ρυθμός

Αργές μαλάξεις



Δύναμη μαλάξεων

Ξεκινήστε την ΚΑΡΠΑ / Οχι μαλάξεις

Καλή δύναμη

Ανεπαρκής δύναμη

Δύναμη μαλάξεων

To HeartSine samaritan PAD 500P Trainer μπορεί να προσομοιώσει τη λειτουργία CPR Advisor του απινιδωτή HeartSine samaritan PAD 500P Trainer.



Η ΚΑΡΠΑ δεν έχει ξεκινήσει

Εάν ο εκπαίδευτος δεν έχει ξεκινήσει να εκτελεί την ΚΑΡΠΑ, πατήστε το κουμπί 'Όχι μαλάξεις'. To HeartSine samaritan PAD 500P Trainer θα αναπαράγει την ηχητική ειδοποίηση:



«Πιέστε πιο δυνατά, Πιέστε πιο δυνατά, Ξεκινήστε την ΚΑΡΠΑ»



Η 'ένδειξη ΚΑΡΠΑ' στο HeartSine samaritan PAD 500P Trainer έχει μία μεμονωμένη πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει, όπως στην εικόνα. Ο εκπαίδευτος πρέπει να ξεκινήσει την ΚΑΡΠΑ αμέσως.



Οι μαλάξεις δεν είναι αρκετά δύναμες

Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει ζεκινήσει να εκτελεί την ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν εφαρμόζει αρκετή δύναμη, πατήστε το κουμπί 'Ανεπαρκής δύναμη'. To HeartSine samaritan PAD 500P Trainer θα αναπαράγει την ηχητική ειδοποίηση:

«Πιέστε πιο δυνατά»



Η ανδικατόρη ΣΠΡ τρεναγκερα HeartSine samaritan PAD 500P Trainer θα μιγάται ορανκενες λαμποκκι, κακ ποκανόνται στην εικόνη. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να υποδειξει στον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη δύναμη.



Καλή δύναμη μαλάξεων

Εάν ο εκπαιδευόμενος εκτελεί τις μαλάξεις σε επαρκές βάθος, πατήστε το κουμπί 'Καλή δύναμη'. Η ανδικατόρη ΣΠΡ θα μιγάται όλες τις λαμποκκι (ορανκενες και πράσινες), κακ ποκανόνται στην εικόνη.



To HeartSine samaritan PAD 500P Trainer θα σταματήσει να υποδεικνύει μηνύματα που σχετίζονται με τη δύναμη με την οποία εκτελούνται οι μαλάξεις:

«Καλές μαλάξεις»

Ρυθμός μαλάξεων

To HeartSine samaritan PAD 500P Trainer μπορεί να προσομοιώσει τη λειτουργία CPR Advisor του απινιδωτή HeartSine PAD 500P. Ακολουθούν οδηγίες σχετικά με την προσομοίωση του ρυθμού των μαλάξεων.



Υπερβολικά αργές μαλάξεις

Εάν ο εκπαιδευόμενος εκτελεί τις μαλάξεις υπερβολικά αργά, πατήστε το κουμπί 'Αργές μαλάξεις'. To HeartSine samaritan PAD 500P Trainer θα αναπαράγει την ειδοποίηση:

«Πιέστε πιο γρήγορα»



Υπερβολικά γρήγορες μαλάξεις

Εάν ο εκπαιδευόμενος εκτελεί τις μαλάξεις υπερβολικά γρήγορα, πατήστε το κουμπί 'Γρήγορες μαλάξεις'. To HeartSine samaritan PAD 500P Trainer θα αναπαράγει την ειδοποίηση:

«Πιέστε πιο αργά»



Σωστός ρυθμός μαλάξεων

Εάν ο εκπαιδευόμενος εκτελεί τις μαλάξεις με σωστό ρυθμό, πατήστε το κουμπί 'Σωστός ρυθμός'. To HeartSine samaritan PAD 500P Trainer θα αναπαράγει την ηχητική ειδοποίηση σωστών μαλάξεων.

Διαχείριση της μπαταρίας του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

Το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Συνιστάται η πλήρης φόρτιση του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer πριν την έναρξη των εκπαίδευτικών δραστηριοτήτων.

Όταν είναι πλήρως φορτισμένο, το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer παρέχει περίπου επτά ώρες χρήσης προτού χρειαστεί να επαναφορτιστεί.

Το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer ελέγχει τη στάθμη της μπαταρίας όταν κοντεύει να εξαντληθεί. Τουλάχιστον μία ώρα πριν εξαντληθεί η μπαταρία, το Trainer αναπαράγει το εξής μήνυμα:



«Προειδοποίηση. Χαμηλή στάθμη μπαταρίας»

Εάν ακούσετε το μήνυμα αυτό, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οταν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, η συσκευή Trainer σβήνει αυτόματα. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επαναφορτίσετε το Trainer.

Φόρτιση και επαναφόρτιση του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

Για την ασφαλή φόρτιση ή επαναφόρτιση του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- 1) Εισαγάγετε τον προσαρμογέα του φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στην πλαϊνή πλευρά του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Βεβαιωθείτε πως ο προσαρμογέας έχει εισαχθεί πλήρως.
- 2) Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.
- 3) Αφήστε το Trainer να φορτιστεί. Η λυχνία LED κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας (βρίσκεται πίσω από την υποδοχή) θα είναι κόκκινη όταν πραγματοποιείται ταχεία φόρτιση και θα αναβοσθήνει όταν η φόρτιση κοντεύει να ολοκληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία LED σβήνει. Για τη φόρτιση ενός πλήρως αποφορτισμένου HeartSine samaritan PAD 500P Trainer χρειάζονται έως και έξι ώρες.
- 4) Αφαιρέστε τον προσαρμογέα από το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Ενεργοποιήστε το Trainer για να βεβαιωθείτε πως λειτουργεί.

Εάν ενεργοποιηθεί το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ο φορτιστής θα πρέπει να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί ξανά για να ξεκινήσει εκ νέου η ταχεία φόρτιση.

Το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer πρέπει να φορτίζεται μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή. Η χρήση άλλων φορτιστών ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο HeartSine samaritan PAD 500P Trainer.

Το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer και ο φορτιστής του έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τα χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή υγρά περιβάλλοντα.

Το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer, το Trainer-Pak και ο φορτιστής δεν φέρουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να ανοίγονται. Στην απίθανη περίπτωση κάποιας δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε άμεσα με τον αντιπρόσωπο.

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer διαθέτει ένδειξη προειδοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Εάν η ένδειξη αναβοσβήσει δύο φορές σε κόκκινο χρώμα αφού πατηθεί κάποιο κουμπί του τηλεχειριστηρίου, αυτό σημαίνει πως πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες του.

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί δύο τυπικές μπαταρίες AAA.

Για να βγάλετε τις μπαταρίες, αφαιρέστε το καπάκι στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

 Εισάγοντας τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο ενώ πίέζετε το κουμπί απενεργοποίησης, θέτετε το τηλεχειριστήριο σε τρόπο λειτουργίας αντιστοίχισης, κατά την οποία λαμβάνει νέο αναγνωριστικό μετάδοσης. Το αναγνωριστικό αυτό διαφέρει από εκείνο που ήταν ήδη αποθηκευμένο στο Trainer. Εάν αυτό συμβεί ακουστίως, θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά ολόκληρη τη διαδικασία αντιστοίχισης του τηλεχειριστηρίου με το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer. Η φυσιολογική αντικατάσταση των μπαταριών δεν δημιουργεί πρόβλημα αφού η αντιστοίχιση ξεκινά μόνο εφόσον είναι ταυτόχρονα πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης.

Εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

Το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων HeartSine samaritan PAD 500P Trainer είναι ένα λογισμικό που μπορείτε να μεταφορτώσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα της HeartSine (www.heartsine.com). Με το λογισμικό αυτό μπορείτε να αναβαθμίζετε το Trainer. Έχετε τις εξής επιλογές:

Γλώσσα

Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer ώστε να λειτουργεί με ηχητικά μηνύματα σε σπουδαίατε πάντα τις παρεχόμενες γλώσσες. Μεταφορτώστε το εγχειρίδιο χρήστη της τρέχουσας έκδοσης του εργαλείου ρύθμισης παραμέτρων HeartSine samaritan PAD 500P Trainer από την ιστοσελίδα της HeartSine για τις σχετικές οδηγίες.

Αντιστοίχιση τηλεχειριστηρίου με το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer

Κάθε HeartSine samaritan PAD 500P Trainer συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο για τον χειρισμό του. Αυτό καθιστά εφικτή τη χρήση πολλαπλών συσκευών σε κοντινή απόσταση χωρίς παρεμβολές. Στην απίθανη περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί πια με το Trainer σας, ενδέχεται να απαιτείται εκ νέου αντιστοίχιση

Το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχιση του τηλεχειριστηρίου με το Trainer σας. Πλήρεις οδηγίες περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.

Αναγνωριστικά στοιχεία συσκευής

Κάθε συσκευή HeartSine samaritan PAD 500P Trainer λαμβάνει έναν αριθμό αναγνώρισης από 001 έως 255 κατά την κατασκευή του. Το τηλεχειριστήριο για κάθε Trainer λαμβάνει τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης. Στην απίθανη περίπτωση που δύο συσκευές με τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων του HeartSine samaritan PAD 500P Trainer για να εκχωρήσετε νέους αριθμούς στις συσκευές. Θα χρειαστεί να αντιστοιχίσετε τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της αφού της δώσετε το νέο αριθμό αναγνώρισης.

Κατευθυντήριες οδηγίες ΚΑΡΠΑ 2015

Τα παρακάτω αποτελούν μια σύντομη περίληψη των βασικών στοιχείων της ΚΑΡΠΑ για διασώστες, όπως αυτά παρέχονται από την Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση (AHA) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωγόνησης στις δημοσιευμένες οδηγίες του 2015 για την ΚΑΡΠΑ και την άμεση καρδιολογική φροντίδα. Πρόκειται για μια συνοπτική ανασκόπηση για διασώστες που έχουν εκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ. Η HeartSine προτείνει όλοι οι πιθανοί χρήστες του HeartSine samaritan PAD 500P να εκπαιδευτούν από έναν εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό τόσο στην ΚΑΡΠΑ όσος και στη χρήση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούν το HeartSine samaritan PAD 500P. Σε περίπτωση που οι κατευθυντήριες οδηγίες αλλάξουν, θα διατεθεί λογισμικό για την ανάλογη αναβάθμιση της συσκευής HeartSine samaritan PAD 500P. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της HeartSine ή απευθείας με την HeartSine Technologies.

ΚΑΛΕΣΤΕ τις υπηρεσίες επειγόντων (99/911/112 κτλ.). Στείλτε κάποιον να βρει έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED).

Το άτομο δεν αντιδρά; Μιλήστε του και κουνήστε τον ώμο του. Καλέστε τις υπηρεσίες επειγόντων.



Κοιτάξτε, αισθανθείτε,
αφογκραστείτε.
Ανοίξτε το στόμα, ελέγχτε για
αναπνοή.



Εκτελέστε ΚΑΡΠΑ. Ακολουθήστε
τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες
οδηγίες της AHA ή ERC.

Εκτελέστε ΚΑΡΠΑ μέχρι να βρεθεί¹ απινιδωτής Ή να φθάσει ο ιατρός.
Ζητήστε από άλλο άτομο να σας
βοηθήσουν ώστε να εκτελέσετε
εναλλάξ την ΚΑΡΠΑ.



Χρησιμοποιήστε αυτόματο εξωτερικό² απινιδωτή (AED), εάν υπάρχει
διαθέσιμος.



Συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ μέχρι να φθάσει
η υπηρεσία επειγόντων. Εκτελέστε την
εναλλάξ μέχρι να δεύτερο άτομο μετά
από κάθε κύκλο ή 2 λεπτά.

Εάν υπάρχει διαθέσιμος απινιδωτής,
ενεργοποιήστε τον και οκολουθήστε τις οδηγίες
- ο απινιδωτής αξιολογεί τον ρυθμό.

**ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ**

**ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ**

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ**

Συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ
για 2 λεπτά.

**ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ**

**Συνεχίστε την ΚΑΡΠΑ
για 2 λεπτά.**

Συνεχίστε μέχρι να αρχίσει ο
ασθενής, δηλ. μέχρι να κουνηθεί, να ανοίξει
τα μάτια του και να αναπνεύσει κανονικά.

Οδηγίες απόρριψης

Το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer είναι συσκευή με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Εάν συντρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου, διαθέτει περίοδο εγγύησης δύο ετών από την ημερομηνία κατασκευής.

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε τη μονάδα HeartSine samaritan PAD 500P Trainer, θα πρέπει να το κάνετε σε κατάλληλη μονάδα ανακύκλωσης σύμφωνα με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές απαιτήσεις. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιστρέψετε τη μονάδα στον τοπικό αντιπρόσωπο σας ή την HeartSine Technologies για απόρριψη.

Απόρριψη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Μην απορρίπτετε τη μονάδα HeartSine samaritan PAD 500P Trainer ως αδιαχώριστο αστικό απόβλητο. Διατηρήστε το HeartSine samaritan PAD 500P Trainer ξεχωριστά για έκ νέου χρήση ή ανακύκλωση σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/EOK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) ή επιστρέψτε το στον τοπικό αντιπρόσωπο ή τη HeartSine Technologies για απόρριψη.

Εξαίρεση από την εγγύηση

Η HeartSine Technologies ή ο τοπικός της αντιπρόσωπος δεν υποχρεούνται να εκτελέσουν επισκευές βάσει της εγγύησης όταν:

- α. Έχουν πραγματοποιηθεί μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στη συσκευή.
- β. Έχουν χρησιμοποιηθεί μη γνήσια ανταλλακτικά.
- γ. Ο χρήστης δεν έχει χρησιμοποιήσει τη συσκευή σύμφωνα με τις υποδείξεις χρήσης ή τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- δ. Ο σειριακός αριθμός της συσκευής έχει αφαιρεθεί, παραμορφωθεί, χρησιμοποιηθεί με μη προβλεπόμενο τρόπο ή τροποποιηθεί.
- ε. Η συσκευή, οι μπαταρίες ή τα ηλεκτρόδια φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται εκτός των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

στ. Η συσκευή έχει δοκιμαστεί με χρήση μη εγκεκριμένων μεθόδων ή ακατάλληλου εξοπλισμού (βλέπε την ενότητα «Συντήρηση» του παρόντος εγχειρίδιου).

Κάθε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλεται μέσω του αντιπροσώπου από τον οποίον αγοράστηκε αρχικά η συσκευή. Η HeartSine Technologies θα σας ζητήσει την απόδειξη αγοράς πριν προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή βάσει της εγγύησης. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εγχειρίδιο χρήστη και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση email heartsinesupport@stryker.com για βοήθεια.



HeartSine®

www.heartsine.com

EMEA/APAC

HeartSine Technologies, Ltd.

203 Airport Road West

Belfast, Northern Ireland

BT3 9ED

Tel: +44 28 9093 9400

Fax: +44 28 9093 9401

info@heartsine.com



U.S./Americas

HeartSine Technologies LLC

121 Friends Lane, Suite 400

Newtown, PA 18940

Toll Free: (866) 478 7463

Tel: +1 215 860 8100

Fax: +1 215 860 8192

info@heartsine.com



The HeartSine products described in this brochure meet the European Medical Directive requirement.



UL Classified.
See complete marking on product.

H017-001-612-5 EL