

Accessori

HeartSine samaritan[®] PAD Family

Accessori per HeartSine samaritan PAD

Pad-Pak™

PAD-PAK-03

Pad-Pak Adulti per pazienti > 8 anni o 25 kg (55 lb)

PAD-PAK-04

Paediatric-Pak™ per pazienti di età compresa fra 1 e 8 anni o fino a 25 kg (55 lb)

PAD-PAK-07


Pad-Pak Adulti con ETSO-C142a

HeartSine ha adottato un approccio innovativo alla manutenzione degli elementi, inserendo le batterie e gli elettrodi DAE in un'unica cartuccia monouso denominata Pad-Pak. Il vantaggio della cartuccia Pad-Pak è la presenza di una data di scadenza unica da tenere sotto controllo e un solo elemento da sostituire alla scadenza o dopo l'uso.

Ogni Pad-Pak ha una durata di quattro anni, una novità assoluta nel settore, e fornisce 60 scariche elettriche o sei ore di monitoraggio continuo. Quando la carica della batteria è bassa e sufficiente per meno di 10 scariche elettriche, l'indicatore di stato del samaritan PAD passa da verde a rosso e viene emesso un segnale acustico per indicare la necessità di sostituire il Pad-Pak.

Quando viene utilizzato con il Paediatric-Pak, il samaritan PAD garantisce la fornitura del livello adeguato di energia per bambini di età compresa fra 1 e 8 anni, con peso < 25 kg (55 lb).

Per l'uso in aereo, HeartSine offre il Pad-Pak certificato ETSO-C142a.

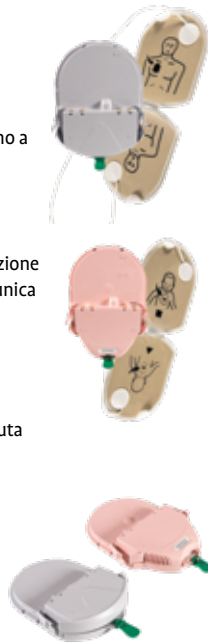

Kit CPR Prep

PAD-ACC-17

Il Kit CPR Prep Kit comprende una mascherina per CPR (apertura da 15 mm, valvola unidirezionale e filtro), forbici, rasoio, due paia di guanti non in lattice per esami, salvietta con antimicrobico, salviettina e sacchetto di plastica.



Cavo dati USB

PAD-ACC-02

Il cavo dati USB personalizzato è progettato per l'uso con il software di gestione dati Saver EVO™ per scaricare dati di eventi ed effettuare aggiornamenti software ai dispositivi samaritan PAD.



Software di gestione dati Saver EVO

Il software gratuito di gestione dati Saver EVO, basato su icone, consente di scaricare, verificare e stampare i tracciati ECG e i dati storici degli eventi memorizzati nei dispositivi samaritan PAD.



Le caratteristiche comprendono:

- Documentazione completa degli eventi per semplificare il controllo da parte del medico
- Reporting stile Utstein e possibilità di esportazione dei report
- Impostazione della configurazione utente e sincronizzazione temporale
- Semplice funzionamento "punta e clicca"

Per garantire un funzionamento corretto del software Saver EVO, occorre che il cavo dati USB opzionale HeartSine sia interfacciato con il samaritan PAD. Il software Saver EVO è scaricabile gratuitamente dal sito Web HeartSine.

Custodia di trasporto (Ricambio)

PAD-BAG-01

Ogni HeartSine samaritan PAD viene fornito con una custodia creata su misura, a due scomparti chiusi con cerniera. Ogni custodia ha spazio per trasportare:

- DAE HeartSine samaritan PAD
- Kit CPR Prep
- Pad-Pak per adulti o Paediatric-Pak aggiuntivo
- Cavo dati USB
- Manuale d'uso



Valigetta di trasporto stagna

PAD-CAB-05

La nuova valigetta super robusta, creata su misura per l'HeartSine samaritan PAD, è caratterizzata da una struttura in ABS per servizi pesanti che garantisce una protezione eccezionale e la massima portabilità per il DAE HeartSine. Questa valigetta di lunga durata a prova di polvere e impermeabile (IP67) ha ampio spazio per oggetti aggiuntivi, quali Pad-Pak aggiuntivi e un kit di pronto soccorso.



Zaino per Mobile AED Rescue

PAD-BAG-02

Lo zaino per HeartSine Mobile AED Rescue, appositamente studiato per HeartSine samaritan Public Access Defibrillator (PAD), vi consente di creare e trasportare una soluzione sicura per il cuore virtualmente in qualsiasi luogo.

Lo zaino per HeartSine Mobile AED Rescue ha spazio per tutto il necessario a garantire la sicurezza del cuore per i membri del team. Questo zaino creato su misura è in grado di trasportare facilmente un DAE samaritan PAD con Pad-Pak, un Paediatric-Pak o un Pad-Pak extra, un kit prep CPR e un kit di pronto soccorso.




Il DAE e il kit di pronto soccorso non sono inclusi.

Armadietto a parete con allarme, su misura per il samaritan PAD

PAD-CAB-04

Realizzato su misura per il samaritan PAD, questo armadietto a ingombro ridotto emette un allarme quando viene aperto.

Dimensioni: 30,5 cm H x 28 cm L x 12,7 cm P
Peso: 2,27 kg (5 libbre)

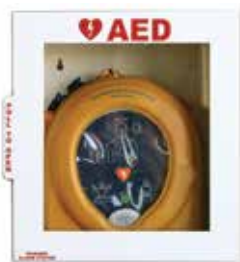

Staffa da parete

PAD-CAB-02

Questa staffa in filo metallico di prima qualità offre il supporto perfetto per il samaritan PAD sia in una stanza sia in un veicolo.



HeartSine samaritan PAD Trainer e accessori

samaritan PAD Trainer

TRN-350-xx (SAM 350P)

TRN-360-xx (SAM 360P)

TRN-500-xx (SAM 500P)

Il samaritan PAD Trainer, dotato di telecomando, guida gli utenti nella simulazione delle fasi di analisi, di erogazione della scarica elettrica e della rianimazione cardiopolmonare (CPR) assistita. Il dispositivo assomiglia, in tutto e per tutto, a un dispositivo samaritan Public Access Defibrillator (PAD) operativo, dal quale si distingue per il solo fatto di non effettuare le procedure di carica e scarica vere e proprie.

Include il Trainer-Pak con tre coppie di elettrodi per corsi di formazione, caricabatterie e valigetta di trasporto.



Telecomando (Ricambio)

TRN-ACC-16 (SAM 350P)

TRN-ACC-18 (SAM 360P)

TRN-ACC-17 (SAM 500P)

Il telecomando multifunzione consente la selezione di circa sei scenari ERC/AHA per dimostrazioni dal vivo o corsi di formazione. Un singolo telecomando è in grado anche di azionare contemporaneamente varie unità per corsi di formazione (entro una distanza di 3-5 metri/10-15 piedi).

Il telecomando SAM 500P Trainer offre all'istruttore la flessibilità di scegliere i messaggi CPR Advisor adatti in base al ritmo di compressione degli studenti.



Trainer-Pak (cartuccia con elettrodi di ricambio)

TRAINER-PAK-04

Grazie al sistema di riavvolgimento facile da usare, la cartuccia Trainer-Pak Electrode Cartridge contiene le piastre elettrodo e i cavi. La comoda funzione di riavvolgimento riduce il tempo speso nel ripristino del sistema.



Elettrodi per i corsi di formazione

10/pak TRN-ACC-02

25/pak TRN-ACC-03

Le piastre elettrodi per corsi di formazione riutilizzabili e sostituibili, da usare su manichini per addestramento sono facili da riposizionare sull'apposita pellicola.



Caricabatterie (Ricambio)

TRN-ACC-14

Il caricabatterie ricarica la batteria interna del samaritan PAD Trainer in solo quattro ore, consentendo il funzionamento del Trainer fino a sette ore, un'intera giornata di formazione con una singola ricarica.



EMEA/APAC

HeartSine Technologies, Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, Northern Ireland
BT3 9ED
Tel: +44 28 9093 9400
Fax: +44 28 9093 9401

U.S.A./Americhe

HeartSine Technologies LLC
121 Friends Lane, Suite 400
Newtown, PA 18940
Numero verde: (866) 478 7463
Tel: +1 215 860 8100
Fax: +1 215 860 8192

I prodotti HeartSine descritti in questa brochure soddisfano i requisiti della Direttiva europea sui dispositivi medicali.

Classificato UL. Vedere il marchio completo sul prodotto.

H009-016-056-1 IT

