

Zubehör

HeartSine samaritan® PAD Produktfamilie

Zubehör für HeartSine samaritan PAD

Pad-Pak™

PAD-PAK-03

Pad-Pak für Erwachsene für Patienten über 8 Jahren bzw. 25 kg Körpergewicht

PAD-PAK-04

Paediatric-Pak™ für Patienten von 1 bis 8 Jahren bzw. bis zu 25 kg Körpergewicht

PAD-PAK-07

Pad-Pak für Erwachsene mit ETSO-C142a

Pad-Pak ist eine innovative Lösung von HeartSine für die Produktwartung: AED-Batterien und Elektroden gemeinsam in einer Einweg-Kassette. Der Vorteil von Pad-Pak ist, dass nur ein Verfalldatum beachtet und anschließend nur ein Teil ersetzt werden muss.

Jedes Pad-Pak verfügt über eine branchenweit überlegene Lebensdauer von vier Jahren und weist eine Kapazität für 60 Schocks bzw. sechs Stunden Dauerüberwachung auf. Wenn die Batterieleistung auf 10 Schocks oder weniger gesunken ist, wechselt die Statusanzeige des samaritan PAD von grün auf rot und es ertönt ein akustisches Warnsignal, um darauf hinzuweisen, dass das Pad-Pak ersetzt werden muss.

Bei Verwendung mit dem Paediatric-Pak stellt der samaritan PAD sicher, dass die richtige Energiemenge für Kinder von 1 und 8 Jahren mit einem Körpergewicht bis zu 25 kg abgegeben wird.

Für die Luftfahrt bietet HeartSine ein nach ETSO-C142a zertifiziertes Pad-Pak.



HLW Prep Kit

PAD-ACC-17

Das HLW Prep Kit umfasst eine HLW-Maske (15-mm-Konnektor, Einwegventil und Filter), Schere, Rasierer, zwei Paar latexfreie Untersuchungshandschuhe, antimikrobielles Wischtuch, Erfrischungstuch und Kunststoffbeutel.



USB-Datenkabel

PAD-ACC-02

Das spezielle USB-Datenkabel dient zur Verwendung mit der Saver EVO™ Datenmanagement-Software, um Ereignisdaten herunterzuladen und Softwareaktualisierungen bei den samaritan PAD Geräten durchzuführen.



Saver EVO Datenmanagement-Software

Saver EVO ist eine kostenlose, symbolbasierte Datenmanagement-Software zum Herunterladen, Überprüfen und Ausdrucken der mit den samaritan PAD Geräten aufgezeichneten EKG-Kurven und Ereignisdaten.



Produkteigenschaften:

- Umfassende Ereignisdokumentation, um dem behandelnden Arzt eine Datenübersicht zur Verfügung zu stellen
- Utstein-Protokoll und Berichtsexport
- Benutzerkonfiguration und Zeitsynchronisation
- Einfacher Point-and-Click-Betrieb

Für die Verbindung mit dem samaritan PAD benötigt Saver EVO das optionale USB-Datenkabel von HeartSine. Die Saver EVO Software ist zum kostenlosen Download auf der Website von HeartSine verfügbar.

Tragekoffer (Ersatz)

PAD-BAG-01

Jeder samaritan PAD von HeartSine wird mit einem eigenen Tragekoffer mit zwei Reißverschlussfächern geliefert.

Jeder Koffer bietet Platz für:

- HeartSine samaritan PAD AED
- HLW Prep Kit
- Zusätzliches Pad-Pak für Erwachsene oder Paediatric-Pak
- Datenkabel
- Gebrauchsanleitung



Wasserfester Hartschalen-Tragekoffer

PAD-CAB-05

Der neue extrem robuste Tragekoffer, der speziell für den samaritan PAD von HeartSine konzipiert wurde, ist aus hochbelastbarem ABS gefertigt und bietet optimalen Schutz und Mobilität für Ihren HeartSine AED. Der beständige staub- und wasserdichte Koffer (Schutzklasse IP67) bietet viel Platz für Zubehör wie etwa Reserve-Pad-Paks und Erste-Hilfe-Kasten.



Mobile AED Rescue Rucksack

PAD-BAG-02

Mit dem speziell für den samaritan Ersthelfer-Defibrillator (PAD) gefertigten Mobile AED Rescue Rucksack von HeartSine sind Sie in der Lage, Erste Hilfe für das Herz praktisch überall mitzunehmen.

Der Mobile AED Rescue Rucksack von HeartSine bietet Platz für alles Nötige, um Ihre Gruppe herzgesund zu halten. In diesen speziellen Rucksack passen ein samaritan PAD AED mit Pad-Pak, ein Paediatric-Pak oder Reserve-Pad-Pak, HLW Prep Kit und Erste-Hilfe-Kasten.




Der AED und Erste-Hilfe-Kasten sind nicht enthalten.

Wandschrank mit Alarm, speziell für samaritan PAD

PAD-CAB-04

Dieser kompakte Wandschrank wurde speziell für den samaritan PAD gefertigt. Beim Öffnen ertönt ein Alarm.


Abmessungen: 12" H x 11" B x 5" T
Gewicht: 2,27 kg

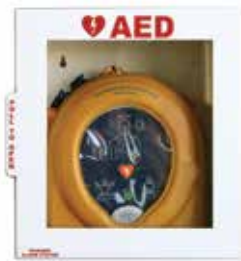

Wandhalterung

PAD-CAB-02

Diese Wandhalterung aus hochwertigem Metalldraht dient zur optimalen Aufbewahrung des samaritan PAD in einem geschlossenen Raum oder Fahrzeug.

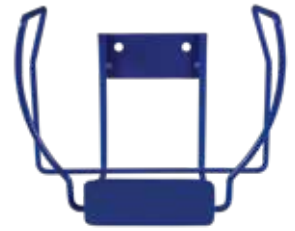

HeartSine samaritan PAD Trainer und Zubehör

samaritan PAD Trainer

TRN-350-xx (SAM 350P)

TRN-360-xx (SAM 360P)

TRN-500-xx (SAM 500P)

Der Samaritan PAD Trainer mit Fernbedienung führt den Anwender durch eine simulierte Analyse, Energieabgabe und angeleitete HLW mit der Optik und Haptik eines echten Samaritan Public Access Defibrillators (PAD) ohne die tatsächliche Ladung und Entladung eines elektrischen Schocks.

Inklusive Trainer-Pak mit drei Paar Trainingselektroden, Aufladegerät und Tragekoffer.



Fernsteuerung (Ersatz)

TRN-ACC-16 (SAM 350P)

TRN-ACC-18 (SAM 360P)

TRN-ACC-17 (SAM 500P)

Multifunktions-Fernsteuerung mit Auswahl zwischen sechs ERC/AHA-Szenarien für Live-Demos bzw. Training. Mit einer Fernbedienung lassen sich sogar gleichzeitig mehrere Trainergeräte bedienen (Reichweite: 3-5 Meter).

Die Fernsteuerung für den SAM 500P Trainer bietet dem Schulungsleiter die Möglichkeit der Auswahl geeigneter CPR Advisor Anweisungen je nach Kompressionsrate des Schulungsteilnehmers.



Trainer-Pak (Ersatz-Elektrodenkassette)

TRAINER-PAK-04

Die Trainer Pak Elektrodenkassette mit einfachem Aufrollsystem dient zur Aufbewahrung der Elektroden und Kabel. Die praktische Aufrollfunktion verkürzt die Rücksetzzeit des Systems.



Trainingselektroden

10 Stk TRN-ACC-02

25 Stk TRN-ACC-03

Wiederverwendbare, austauschbare Trainingselektroden zum Üben an Prüfpuppen. Lassen sich einfach wieder auf die Schutzfolie kleben.



Aufladegerät (Ersatz)

TRN-ACC-14

Das Aufladegerät dient zum Aufladen der integrierten Batterie des samaritan PAD Trainer in nur vier Stunden. Dies ermöglicht einen Betrieb des Trainers bis zu sieben Stunden, d.h. für die Dauer eines ganzen Schultages, mit einer einzigen Aufladung.



heartsinesupport@stryker.com www.heartsine.com

EMEA/APAC
HeartSine Technologies, Ltd.
203 Airport Road West
Belfast, Nordirland
BT3 9ED
Tel: +44 28 9093 9400
Fax: +44 28 9093 9401

USA/Amerika
HeartSine Technologies LLC
121 Friends Lane, Suite 400
Newtown, PA 18940
Toll Free: (866) 478 7463
Tel: +1 215 860 8100
Fax: +1 215 860 8192

Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte von HeartSine erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie über Medizinprodukte.

UL-Prüfzeichen. Siehe vollständige Kennzeichnung auf dem Produkt.

H009-016-055-1 DE



Der SAM 500P ist nicht zum Verkauf in den USA verfügbar.
© 2018 HeartSine Technologies LLC. Alle Rechte vorbehalten.